

** 2025年6月改訂(第3版)

* 2022年9月改訂(第2版)

機械器具 (58) 整形用機械器具
一般医療機器 脊椎手術用器械 70963001

グローバルシステム用手術器械VI

【警告】

○本品の使用にあたりこの添付文書を事前に十分理解すること。
また患者の安全に細心の注意をはらい添付文書に従って使用する。

[重篤な不具合、有害事象が発現するおそれがある。]

○本品は脊椎手術等に習熟し、かつ製品特性や手術手技を十分に理解した医師が使用すること。

[重篤な不具合、有害事象が発現するおそれがある。]

【禁忌・禁止】

○インプラントとしての使用は絶対に行わないこと。

○本品を曲げ、切削、打刻(刻印)等の二次的加工(改造)を行うことは、折損などの原因となるので行わないこと。

○弊社が指定した製品以外との併用はしないこと。

[相互作用の項参照。]

○使用中に手術器械が破損・変形したときは、使用を中止すること。












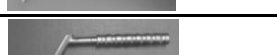


【形状、構造及び原理等】










1.製品外観と製品名

製品名、サイズ等については本体の記載もしくは製品に同梱される一覧表をご確認下さい。

2.材質: ステンレス鋼、樹脂、チタン、チタン合金

※写真は代表例

ペディクルブロープ2	
ハンドル付タップ	
ポリアクシャルスクリューホルダー	
モノアクシャルスクリューホルダー	
クローズドスクリューホルダー	
クローズドスクリューリムーバー	
アンチトルクレンチ	
トルクレンチドライバー 先	
トルクレンチドライバー 先(太)	
インサーター	
インサーターA	
ショートインサーターB	
パースエーダー	
クローズドセットドライバー	

クローズドスクリュー抜去用ドライバー	
スクリューヘッドアジャスター	
ロッキングキャップドライバー	
ロッキングキャップショートドライバー	
ロッキングキャップショートドライバー 2	
ブレークオフドライバー	
T型仮固定用ドライバー	
ロッドフォーク	
ロッドプッシャー	

【使用目的又は効果】

販売名「グローバルシステム」を取り扱う脊椎手術に使用することを目的とする。

【使用方法等】

1.使用前

本器械は未滅菌であるので、使用前に必ず洗浄を行い、下記の条件の高圧蒸気滅菌法又は各医療機関により検証され確認された滅菌条件により滅菌を行う。

滅菌方法: 高圧蒸気滅菌

滅菌条件:

温度	時間
115~118°C	30分
121~124°C	15分
126~129°C	10分

2.使用方法

(詳細な使用方法については手術手技書等を参照のこと。)

(1)ペディクルブロープ2

ペディクルスクリューの刺入孔の作成の為に使用する。

(2)ハンドル付タップ

ペディクルスクリューの刺入孔の作成の為に使用する。

(3)ポリアクシャルスクリューホルダー

接続可能な各種ハンドルを接続し、ポリアクシャルスクリューを保持し挿入する為に使用する。

(4)モノアクシャルスクリューホルダー

接続可能な各種ハンドルを接続し、モノアクシャルスクリューを保持し挿入する為に使用する。

(5)クローズドスクリューホルダー

接続可能な各種ハンドルを接続し、クローズドスクリューを保持し挿入する為に使用する。

(6)クローズドスクリューリムーバー

接続可能な各種ハンドルを接続しクローズドスクリューを抜去する際に使用する。

(7)アンチトルクレンチ

ロッキングキャップの最終固定時のロッドのワイパーモーションを防止する際に使用する。

(8)トルクレンチドライバー先

接続可能な各種ハンドルを接続し、ロッキングキャップの最終固定時に使用する。

(9)トルクレンチドライバー先(太)

接続可能な各種ハンドルを接続し、ロッキングキャップの最終固定時に使用する。

(10)インサーター

ロッキングキャップの装着時のガイドとして使用する。

(11)インサーターA

ロッキングキャップの装着時のガイドとして使用する。

(12)ショートインサーターB

ロッキングキャップの装着時のガイドとして使用する。

(13)パースエーダー

ロッドをペディクルスクリューに圧着し、ロッキングキャップを装着する際のガイドとして使用する。

(14)クローズドセットドライバー

クローズドスクリューとロッドの仮固定時に使用する。

(15)クローズドスクリュー 抜去用ドライバー

クローズドスクリューを抜去する際に使用する。

(16)スクリューヘッドアダプター

ポリアクシャルスクリュー等のヘッド部の方向を変える際に使用する。

(17)ロッキングキャップドライバー

ロッキングキャップを装着する際に使用する。

(18)ロッキングキャップショートドライバー

ロッキングキャップを装着する際に使用する。

(19)ロッキングキャップショートドライバー2

ロッキングキャップを装着する際に使用する。

(20)ブレークオフドライバー

クローズドスクリューのブレークオフセットスクリューの最終固定時に使用する。

(21)T型仮固定用ドライバー

ロッキングキャップを仮固定する際に使用する。

(22)ロッドフォーク

ロッドをペディクルスクリューに圧着し、ロッキングキャップを装着する際に使用する。

(23)ロッドブッシャー

ロッドをペディクルスクリュー等に圧着させる際に使用する。

* ※組合せて使用する医療機器

販売名	製造販売届出番号	製造販売業者
脊椎固定システム用 手術器械Ⅰ	33B1X100014A0009	自社
脊椎固定システム用 手術器械Ⅳ	33B1X100014A0043	自社

3.使用方法に関連する使用上の注意

- (1)本器械は未滅菌品であるので必ず滅菌した後に使用する。
- (2)必要なインプラント及び手術器械が揃っているか確認すること。

【使用上の注意】

1.重要な基本的注意

- (1)衝撃や表面損傷が原因で破損することがあるので、丁寧に取り扱いすること。
- (2)本器械は過度で異常なストレスに耐えることはできない。
- (3)本器械はインプラントではないので術後、体内に埋没させないこと。
- (4)使用後は、付着している血液、体液、組織等の汚物を直ちに除去し、洗浄、消毒、乾燥させること。
- (5)本品がハイリスク手技に使用された場合には、プリオン病感染予防ガイドラインに従った洗浄、滅菌を実施すること。
- (6)本品がプリオン病の感染症患者への使用及びその汚染が疑われる場合には、製造販売業者又は貸与業者に連絡すること。

2.相互作用

併用禁忌・禁止(併用しないこと)

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
* 当社が指定していない器具	不具合が発生する危険性が高まるおそれがある。	インプラントの構造やサイズが正確に適合せず、インプラントが正しく設置されないことがある。

3.不具合・有害事象

以下の不具合・有害事象が発現する可能性がある。

(1)その他の不具合

- ①手術器械の破損、変形
- ②インプラントの破損、緩みや変形

(2)その他の有害事象

- ①外科的侵襲、本器械の不適切な使用又は破損による神経組織の損傷、麻痺、軟部組織の損傷、圧迫、疼痛、周辺臓器の損傷
- ②骨の亀裂、骨折、穿孔
- ③本器械の破損、滑りによる患者及び手術従事者の負傷
- ④破損片等の体内遺残

不具合・有害事象は上記に限定されない。これらの不具合・有害事象の治療のため再手術が必要な場合もある。

4.高齢者への適用

高齢者は、一般に骨量・骨質が十分でないことが多いので、手術器械でもって術中に過度の力を加えることにより骨折したり、インプラント後に緩み等が起きる可能性があるため慎重に使用し、術後の経過にも十分注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

- (1)保管にあたっては、洗浄した後、腐食を防ぐために保管期間の長短にかかわらず乾燥を行うこと。

[保管中は、器械が損傷しないように十分注意して下さい。]

- * (2)滅菌済のものを保管するにあたっては、再汚染を防ぐため清潔な場所に保管をすること。

【保守・点検に係る事項】

- (1)使用前に、損傷、腐食、汚染、接合不良等、異常がないか外観検査を実施すること。
- (2)使用後は、洗浄、すすぎ等により汚染除去を行った後、血液、組織等が付着していないことを確認し、滅菌を行った後保管すること。
- (3)汚染除去には、必ず医療用洗剤等を適正な濃度で使用すること。
- (4)洗剤の残留がないよう十分すすぎをすること。仕上げすすぎには、浄化水(ろ過、蒸留、脱イオン化等)を用いることを推奨する。
- (5)洗浄装置(超音波洗浄器等)で洗浄するときは、鋭利な器具と接触して損傷することがないように注意すること。また、器具の隙間や接続部に異物等が付着・残存していないことを確認すること。
- (6)ラチェットのある器具はラチェットをかけずに開いた状態にすること。
- (7)ボックスロック(合わせ部、交差部)のある器具は開く・分解するなどすること。
- (8)強アルカリ・強酸性洗剤・消毒剤は、器具を腐食させるおそれがあるので、使用を避けること。
- (9)金属ブラシ類、クレンザー(磨き粉)等は、器具の表面が損傷するので汚物除去及び洗浄時に使用しないこと。
- (10)複雑な構造の器具は隙間部や嵌合部は柔らかいブラシ等で特に入念に異物除去を行うこと。
- (11)複数の部品を組み合わせている器具は分解した状態で洗浄すること。
- (12)中空状の器具は、棒状のクリーナーを用いて中に入った組織片、残り屑を除去してから洗浄すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

**・製造販売業者

ナカシマヘルスフォース株式会社

TEL. 086-279-6278(代表)