


機械器具 67 歯科用防湿器
一般医療機器 歯科用ラバーダム 11155010 (JMDNコード)
CoolBright フォトシールテープ

【禁忌・禁止】

- ・本品は抜歯部位や深い歯周ポケットには使用しないでください。部位深部に入り込み除去できない可能性があります。
- ・本品を外科処置部位に使用しないでください、固化接着できない可能性があります。

【形状、構造及び原理等】

1. 外観形状・構造

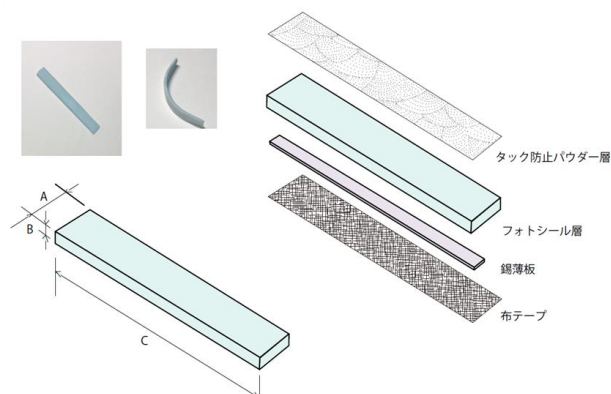

形状 (サイズ)	構成部	奥行き (A)	厚さ (B)	幅 (C)
フォトシール テープ M	フォトシール層	6mm	2mm	70mm
	布テープ	8mm	0.1mm	70mm
フォトシール テープ TM※	タック防止パウダー層	8mm	—	70mm
	フォトシール層	6mm	2mm	70mm
	錫薄板	2mm	0.5mm	70mm
	布テープ	8mm	0.1mm	70mm
フォトシール テープ L	タック防止パウダー層	8mm	—	70mm
	布テープ	8mm	0.1mm	75mm
	フォトシール層	8mm	2mm	75mm
フォトシール テープ TL※	タック防止パウダー層	8mm	—	75mm
	布テープ	8mm	0.1mm	75mm
	錫薄板	2mm	0.5mm	70mm
	フォトシール層	8mm	2mm	75mm

※T：錫薄板あり

2. 原材料

構成部	原材料
フォトシール層	N,N-ジメチルアクリルアミド オレイン酸 酸化チタン シリカ 顔料 (アルミン酸コバルト)
錫薄板	錫
布テープ	綿布
タック防止パウダー層	食品グレード水分吸収パウダー

3. 原理

接着性疎水材料がラバーダムの空隙部やラバーダムとの間隙を塞ぎ、あるいは防壁となり処置部への水、液体などの侵入を防ぎます。

テープ形状となっており、内蔵の錫薄板はテープ屈曲の形状を保持します。タック防止のパウダーにより処置の場合グローブにフォトシールが付着することを防ぎます。さらにパウダー材質は水分吸収性であり水または粘液などを吸収しフォトシールの接着性を向上させます。

【使用目的又は効果】

本製品は、ラバーダムの補修等、歯科治療の際の唾液による汚染の防止、防湿等に用います。

【使用方法等】

1. 形状の保持

処置部の形状に合わせてあらかじめテープを変形しておきます。

2. 貼付

パウダー層のある面を処置部に留置し押さえておきます。

3. フォトシール

布テープ面に指または綿棒等で圧力を加えます。布テープからフォトシールがはみ出ます。はみ出たフォトシールを処置部に接着します。

【使用上の注意】

1. 本製品の留置には塗布部位水分が必要です。唾液等が乾燥した歯面、歯肉等の場合水分を含むコットン等で水分を塗布した上で初期に加圧接着します。
2. 固化接着には光硬化用青色 LED、又は紫外線照射器を照射し、固化接着させます。接着後はゴム弾性が充填剤になります。
3. 一度開封したものは室内灯で硬化します。使用直前まで遮光包装バックに保存しておいてください。
4. 歯面処理はプロフィールカップ等で洗浄してください。
5. 本製品が口腔内に残留した場合、ピンセット、キュレット等で除去し、うがいで排出します。
6. 本品を固化接着した後にラバーダム、本品にタービン、その他の器具で過度の応力をかけたりすると破損する可能性があります。
7. 使用上、保管にあたり誤って目に入れたり、飲み込んだりしないように十分注意してください。万一目に入った場合は眼科医の診断を受けてください。
8. 本製品は再使用できません。
9. 口腔内に発赤、腫脹が見られた場合、気分が悪くなった場合は直ちに使用を中止してください。
10. 皮膚に発赤、腫脹が見られた場合、気分が悪くなった場合は皮膚科医等の診断を受けてください。

【保管方法及び有効期間等】

1. フォトシールテープは密封し湿気を避け、室温にて保管してください。
2. 有効期限：パッケージに記載された使用期限までに使用してください。
製造後 6 ヶ月以内 (自己認証による)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者・製造業者

名称：ナノオブテック有限会社 駒沢事業所

住所：東京都世田谷区駒沢二丁目1 6 番 2 号 長谷川ビル

電話番号：090-8487-6369