

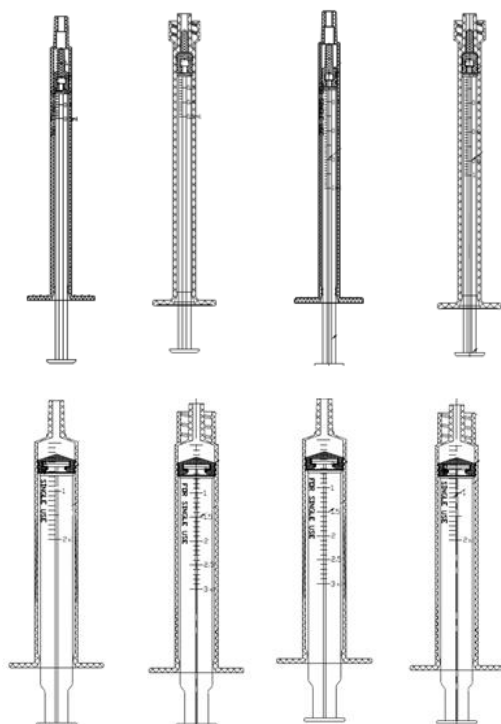
機械器具 48 注射筒
一般医療機器 汎用注射筒 JMDN コード：13929001

ディスポーザブルシリンジ

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止**【形状、構造及び原理等】**

本品はルアーロック式とルアースリップ式があり、それぞれ外筒、押子、ガasketからなる。

**【使用目的又は効果】**

本品は、液体又はガスを注射・注入するか引き抜くために用いる器具である。通常、ガラス製又はプラスチック製で、目盛付の容器及びブランジャから成る。注射針を用いて薬剤の投与又は採血に用いる。臍口に挿入し経血を回収処理するために使用する。

【使用方法等】

- 1) 本品の個包装を開封する（有効期間を確認する）。
- 2) 必要に応じて、外筒の先端に注射針等（本品に含まれない）を取り付ける。
- 3) ブランジャーを引き、液体等を引き抜く。
- 4) 注射針等（本品に含まれない）を取り外し、必要に応じて、外筒の先端にルアーキャップを取り付け、液漏れを防止する。

【使用上の注意】**1. 重要な基本的注意**

- 1) 人体の血管に注入された場合、ガスが発生し、皮下

に注入された場合、腫瘍が発生する可能性があるため、針から上方にバレル内の空気をすべて排出する。

- 2) 5 年の有効期間がある。有効な日付を超過していたら使用しないこと。
- 3) 一回使用した後は破棄すること。
- 4) 開封または破損している場合、保護キャップが外れている場合、または異物が検出された場合は使用しないこと。
- 5) 特別な訓練を受けた人によって使用されること。

2. 不具合・有害事象

- 1) 重大な不具合
 - (1) 製品の変形・破損
- 2) 重大な有害事象
 - (1) 感染症
 - (2) アレルギー反応・異物反応
 - (3) 血腫
 - (4) 血管・神経損傷
 - (5) 創傷治癒の遅れ

【保管方法及び有効期間等】**1. 保管方法**

- 1) 包装にきずや破れが生じないように、取り扱いおよび保管に注意すること。
- 2) 本品は高温多湿や直射日光を避け、水漏れに注意し、清潔な場所に保管すること。

2. 有効期間

5 年間 [自己認証（当社データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**〔製造販売業者〕**

名称：ナガワ薬品株式会社
住所：東京都台東区東上野一丁目 1 7 番 2 号
第二江口ビル 3 階
電話番号：03-5826-4928

〔製造業者〕

名称：アンフェイ ティエンカン メディカルテクノロジー
カンパニーリミテッド
Anhui Tiankang Medical Technology Co., Ltd.
国名：中国