

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
管理医療機器 汎用血液流路用ストップコック 35375012
（輸液ポンプ用ストップコック 35375022、輸血・カテーテル用ストップコック 35375042、
圧モニタリング用ストップコック 35375052、活栓 32172011）

ニプロシフター

再使用禁止


【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は、一般に心臓カテーテル法及び心臓手術時に使用され、流路の断続やフラッシュの操作を円滑にします。

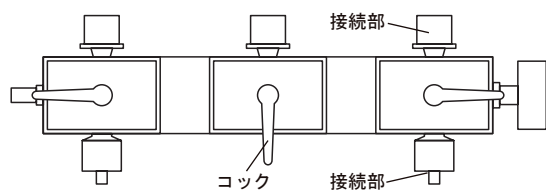

〔代表形状図〕

2. 材質

本体：ポリカーボネート、シリコーンゴム

【使用目的又は効果】

滅菌済みであるから、そのまま直ちに使用できる。

【使用方法等】

本品は再使用せず、1回限りで使い捨てます。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

1. 接続部に薬液、又は血液を付着させないでください。〔接続部の緩み等のおそれがあります。〕
2. コックを必要以上に回転させないでください。〔破損及び液漏れ等のおそれがあります。〕

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 本品に接続する注射筒やコネクタ等が外れないようしっかり接続すること。また、液が流れる方向にコックが操作されていることを確認すること。
- 2) コネクタを接続する場合は、過度な締め付けをしないこと。〔コネクタが外れなくなる、又はコネクタが破損し、接続部からの液漏れ、空気混入のおそれがある。〕
- 3) 本品のコックに対し、引き抜く方向に過度な負荷をかけないこと。〔コック外れや液漏れのおそれがある。〕
- 4) 本品から薬液を混注する場合は、空気の混入に注意すること。
- 5) 使用中は本品の破損、接続部の緩み、空気混入、液漏れ及び詰まり等について、定期的に確認すること。
- 6) 脂肪乳剤及び脂肪乳剤を含む医薬品、ヒマシ油等の油性成分、界面活性剤又はアルコール等の溶解補助剤などを含む医薬品を使用する場合及びアルコールを含む消毒剤を使用する場合は、本品のひび割れについて注意すること。〔薬液により本品にひび割れが生じ、血液及び薬液漏れ、空気混入等の可能性がある。特に、全身麻酔剤、昇圧剤、抗悪性腫瘍剤及び免疫抑制剤等の投与では、必要な投与量が確保されず患者への重篤な影響が生じる可能性がある。なお、ライン交換時の締め直し、過度な締め付け及び増し締め等は、ひび割れの発生を助長する要因となる。〕
- 7) ひび割れが確認された場合は、直ちに新しい製品と交換すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。

有効期間：滅菌後3年（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売（お問い合わせ先）

ニプロ株式会社

電話番号：06-6372-2331（代表）

製造

ニプロ株式会社



NIPRO

ニプロ株式会社