

機械器具 74 医薬品注入器
管理医療機器 単回使用注射用針 30889000

ニプロディスポーザブル注射針

再使用禁止


【禁忌・禁止】

1. 使用方法
- 1) 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は針管、針基及びプロテクタから構成されている。

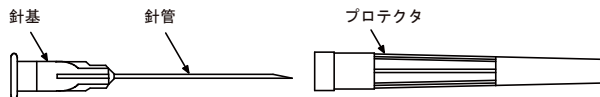

2. 材質

針管	ステンレス鋼
針基	ポリプロピレン

【使用目的又は効果】

本品は滅菌済みであるので、そのまま直ちに使用できる。

【使用方法等】

1. 包装を開封し、本品を取り出します。
2. 本品を注射筒と確実に接続します。
3. プロテクタを真っ直ぐ引いて外し、穿刺します。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

1. 誤って手指等に針を刺さないよう取扱いには十分注意してください。
2. 針基に過剰な負荷をかけないでください。また、接続時はプロテクタで針基に過剰な回転負荷をかけないでください。〔針管又は針基の破損のおそれがあります。〕
3. プロテクタを外すとき、針先がプロテクタに触れないよう注意してください。〔針先変形のおそれがあります。針先が変形した場合は、本品を新しいものと交換してください。〕
4. 針管を薬液容器等のゴム栓に刺通する場合は、なるべく刺通面に垂直に刺し、横方向に力を加えたり、同一部位に刺通されることがないように注意してください。〔針管の曲がりや破損、詰まり、容器内へのゴム片混入のおそれがあります。〕
5. 薬液容器等の壁面に針管が当たらないよう注意してください。〔針先変形のおそれがあります。針先が変形した場合は、本品を新しいものと交換してください。〕
6. 接続部に薬液又は血液を付着させないように注意してください。〔接続部の緩み等のおそれがあります。〕
7. リキャップしないでください。〔リキャップ自体に誤穿刺のおそれがあり、また、誤って斜めにリキャップすることで、針先がプロテクタを貫通するおそれがあります。〕

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 使用中は本品の破損、接続部の緩み、空気混入、液漏れ及び詰まり等について、十分注意すること。
- 2) 個包装を輪ゴムでしばる等の負荷をかけた状態で長時間保管をしないこと。〔包装に負担がかかり、破損のおそれがある。〕
- 3) 個包装での保管は、個包装が経時的に外的環境の影響を受けやすく破損することがあるため、十分注意すること。
- 4) 本品は合成樹脂製品のため、温度が低下するにつれて強度が低下することから取扱いには注意すること。〔破損のおそれがある。〕

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。

有効期間：滅菌後3年〔自己認証（自社データ）による〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*製造販売（お問い合わせ先）

ニプロ株式会社

フリーダイヤル：0120-226-410

受付時間：9:00～17:15（土・日・祝日を除く）

製造

ニプロ医工株式会社



ニプロ株式会社