

機械器具 47 注射針及び穿刺針
管理医療機器 眼科用針 70200000
(単回使用眼科手術用カニューレ 34899032)

ニプロディスプレイブル眼内注射針

再使用禁止


【禁忌・禁止】

1. 使用方法
1) 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は、眼科手術の術中、又は術後において、注射筒、又は医薬品容器等に接続して、前房、硝子体腔、結膜への薬液、又は気体の注入や吸引に使用される針である。針管はプロテクタにより保護されている。

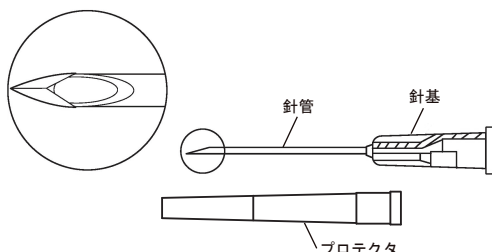

2. 材質

針管	ステンレス鋼
針基	ポリプロピレン

【使用目的又は効果】

眼科の治療において薬液又は気体の注入、吸引に用いること。

【使用方法等】

1. 包装を開封し、本品を取り出します。
2. 本品を注射筒、又は医薬品容器等に取り付けます。
3. プロテクタを真っ直ぐ引いて外し、使用します。
4. 使用後は感染防止に注意し、安全な方法で廃棄します。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

1. 誤って手指等に針を刺さないよう取扱いには十分注意してください。
2. 針管に過剰な負担をかけたり、包装を開封する際やプロテクタを外す際に針先が包材やプロテクタに触れないよう注意してください。〔針先変形のおそれがあります。針先が変形した場合は、本品を新しいものと交換してください。〕
3. リキャップしないでください。〔リキャップ自体に誤穿刺のおそれがあり、また、誤って斜めにリキャップすることで、針先がプロテクタを貫通するおそれがあります。〕

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 本品は合成樹脂製品のため、温度が低下するにつれて強度が低下することから取扱いには注意すること。〔破損のおそれがある。〕

2. 不具合・有害事象

1) その他の不具合

- (1) 液漏れ

2) その他の有害事象

- (1) 誤穿刺

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。

有効期間：滅菌後5年〔自己認証（自社データ）による〕

※【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売

ニプロ株式会社

製造

ニプロ医工株式会社

販売（お問い合わせ先）

サイメンドesign株式会社

電話番号：03-3870-9230



ニプロ株式会社