

機械器具 47 注射針及び穿刺針
管理医療機器 眼科用針 70200000

ニプロディスポーザブルオプタルミック針

再使用禁止


【禁忌・禁止】

1. 使用方法
- 1) 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は、眼科手術の術中において、灌流水、薬液及び気体を前房／硝子体腔へ注入するノズルである。前房／硝子体腔の液体及び気体を吸引する場合と虹彩フックとして使用する場合があります。術中以外では涙道の洗浄や造影剤の注入に使用される。なお、針先に刃面はなく、針管はプロテクタ、又はチューブにより保護されている。

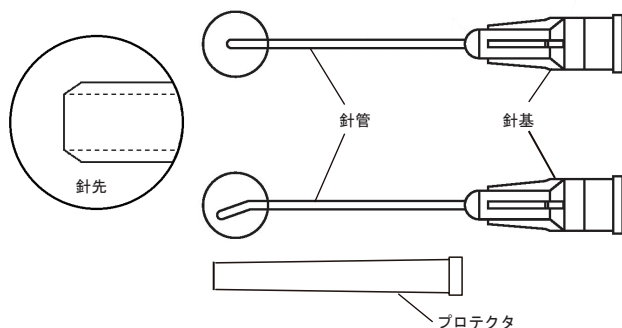

2. 材質

針管	ステンレス鋼
針基	ポリプロピレン

【使用目的又は効果】

本品は滅菌済みであるのでそのまま直ちに使用できる。

【使用方法等】

1. 包装を開封し、本品を取り出します。
2. 本品を注射筒に取り付けます。
3. プロテクタ（又はチューブ）を外し、使用します。
- *4. 使用後は感染防止に注意し、安全な方法で廃棄します。

* 【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 一般注射針と混同しないように針先を確認してください。
- 2) 本品は合成樹脂製品のため、温度が低下するにつれて強度が低下することから取扱いには注意すること。〔破損のおそれがある。〕

2. 不具合・有害事象

- 1) その他の不具合
- (1) 液漏れ

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。
有効期間：滅菌後5年〔自己認証（自社データ）による〕

* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売
ニプロ株式会社

製造
ニプロ医工株式会社

販売（お問い合わせ先）
サイメンドesign株式会社
電話番号：03-3870-9230



ニプロ株式会社