

機械器具 47 注射針及び穿刺針
管理医療機器 眼科用針 70200000

ニプロディスポーザブルオプタルミック針

再使用禁止


【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は、眼科手術の術中において、灌流水、薬液及び気体を前房／硝子体腔へ注入するノズルである。前房／硝子体腔の液体及び気体を吸引する場合と虹彩フックとして使用する場合があり、術中以外では涙道の洗浄や造影剤の注入に使用される。
なお、針先に刃面はない。

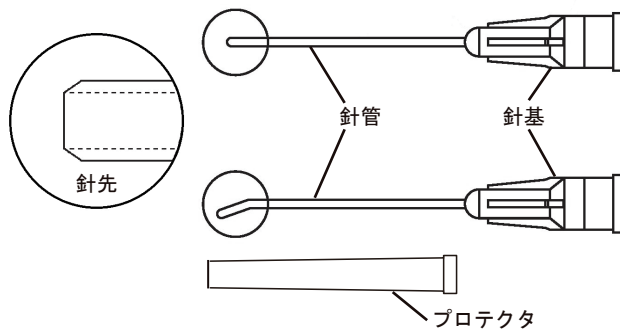

2. 材質

針管：ステンレス鋼
針基：ポリプロピレン

【使用目的又は効果】

本品は滅菌済みであるのでそのまま直ちに使用できる。

【使用方法等】

1. 包装を開封し、本品を取り出します。
2. 本品を注射筒に取り付けます。
3. プロテクタを外し、使用します。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

1. 一般注射針と混同しないように針先を確認してください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。
有効期間：滅菌後5年（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売

ニプロ株式会社

電話番号：06-6372-2331（代表）

製造

ニプロ医工株式会社



ニプロ株式会社