

ニプロ酸素カニューラ

再使用禁止


【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は固定方式の経鼻酸素呼吸用のカニューラであって、本体（2本の通気チューブとステータ）、鼻腔部及び酸素ポンペ又は他の接続管への接続用のコネクタ等からなる。

各部の名称

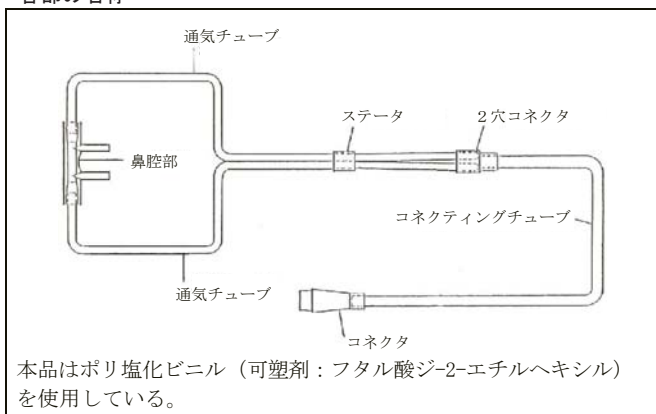

【使用方法等】

1. 湿潤器の酸素吹き出し口にカニューラを接続し指示量の酸素を流出させます。
2. カニューラの破損がなく、鼻腔部先端から確実に酸素が流出していることを確認したら、患者に装着します。
3. チューブを耳介に掛けて固定します。外れやすいので必要時には頬部にテープを固定してください。
4. 鼻腔部を鼻腔内に挿入して酸素吸入を行います。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

1. 接続部への薬液等の付着に注意してください。〔接続部の緩み等が発生するおそれがあります。〕
2. 鼻腔部挿入時は鼻腔粘膜への損傷に十分注意してください。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 本品は脂溶性溶剤存在下で塩化ビニルの可塑剤であるフタル酸ジ-2-エチルヘキシルが溶出するおそれがある。
- 2) 湿潤器内の水位が高すぎて本品内に精製水が流入した場合や長時間同一品を使用したために本品内腔に水滴が発生した場合には酸素吸入量が不確実になるため、本品を速やかに交換すること。
- 3) 使用中は本品の破損、接続部の緩み及び詰まり等について、十分注意すること。
- 4) チューブとコネクタ等の接続部には過度に引っ張る、押し込む、折り曲げるような負荷を加えないよう注意すること。〔チューブの抜け、破損、伸び等が発生するおそれがある。〕
- 5) コネクタを接続する場合は、過度な締め付けをしないこと。〔コネクタが外れなくなる又は、コネクタが破損するおそれがある。〕

- 6) チューブが折り曲げられたり、引っ張られた状態で使用しないこと。
- 7) 体動でねじれると流路が閉塞する可能性があるので注意すること。
- 8) 通気部を汚染させないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。

有効期間：製造後3年（自己認証による）

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売（お問い合わせ先）

ニプロ株式会社

電話番号：06-6372-2331（代表）

製造（輸入先）

ニプロ（上海）有限公司

[NIPRO(SHANGHAI) CORPORATION LIMITED]

中華人民共和国

[People's Republic of China]