

ニプロディスポーザブル球後麻醉針

再使用禁止

【禁忌・禁止】


1. 使用方法
- 1) 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は、注射筒、又は医薬品容器等に接続して、麻酔薬を眼球後部、又は眼球側部へ注入するために使用される針であり、針管及び針基から構成される。本品は滅菌済みであり、単回使用である。

針管には真針及び曲針があり、プロテクタ、又はチューブにより保護されている。

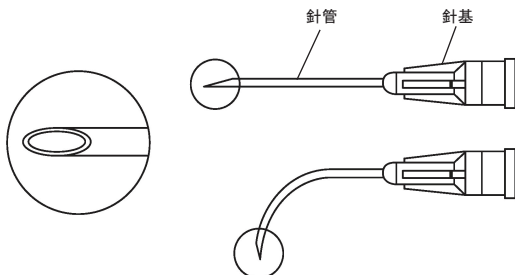

2. 材質

針管	ステンレス鋼
針基	ポリプロピレン

【使用目的又は効果】

眼球後部、眼球側部への麻酔薬注入に用いること。

【使用方法等】

1. 包装を開封し、本品を取り出します。
2. 本品を注射筒、又は医薬品容器等にしっかりと取り付けます。
3. プロテクタ（又はチューブ）を外します。真針の場合は真っ直ぐ引き、曲針の場合は曲型に沿うように引いて外します。
4. 本品を眼科領域に穿刺し、目的とする麻酔薬注入部位まで導入します。
5. 麻酔薬を注入し、本品を抜去します。
6. 使用後は感染防止に注意し、安全な方法で廃棄します。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

- *1. 誤って手指等に針を刺さないよう取扱いには十分注意してください。
- *2. 針管に過剰な負担をかけたり、包装を開封する際やプロテクタを外す際に針先が包材やプロテクタに触れないよう注意してください。〔針先変形のおそれがあります。針先が変形した場合は、本品を新しいものと交換してください。〕
- *3. リキャップしないでください。〔リキャップ自体に誤穿刺のおそれがあり、また、誤って斜めにリキャップすることで、針先がプロテクタを貫通するおそれがあります。〕

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 本品は合成樹脂製品のため、温度が低下するにつれて強度が低下することから取扱いには注意すること。〔破損のおそれがある。〕

2. 不具合・有害事象

- 1) その他の不具合
(1) 液漏れ
- 2) その他の有害事象
(1) 誤穿刺

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

包装に記載の使用期限を参照のこと。

有効期間：滅菌後5年〔自己認証（自社データ）による〕

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売

ニプロ株式会社

製造

ニプロ医工株式会社

販売（お問い合わせ先）

サイメンドesign株式会社

電話番号：03-3870-9230

