

デルマパンチ®

再使用禁止


【禁忌・禁止】

1. 使用方法
1) 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品はエチレンオキサイドガス滅菌済みの穿孔器（皮膚トレパン）であり、刃部、柄部及びキャップから構成されている。
規格：刃部の内径別に柄部を色分けしており3サイズある。
3mm グリーン、4mm ピンク、5mm ホワイト
3サイズとも全長93mm、刃部の長さ8mm、柄部の長さ85mmである。

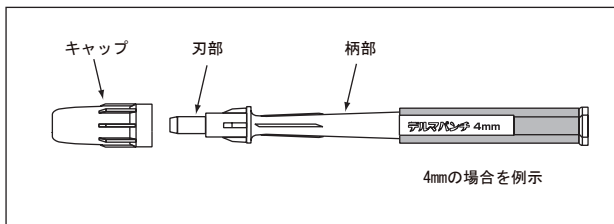

2. 材質

刃部	ステンレスSUS304
----	-------------

**【使用目的又は効果】

1. 生検標本を採取するために用いる円筒状、中空の専用器具である。各種の直径サイズで製造されており、本品は単回使用である。
2. 本品は組織標本用、電子顕微鏡サンプル、組織内菌要素の培養などの目的により、患者の皮膚に穿刺し、組織を採取することに限定して使用される。

【使用方法等】

開封後、本品を内袋より取り出し、キャップを外して直ちに使用します。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 穿刺時は、皮膚組織の厚さや他の直下の組織に十分注意して操作すること。〔他の組織を損傷させるおそれがある。〕

2. 不具合・有害事象

1) その他の不具合

- (1) 誤穿刺
- (2) 穿刺不全

2) その他の有害事象

- (1) 深部組織（腱等）損傷

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- 1) 本品は清潔な場所に保管すること。
- 2) 水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。
有効期間：滅菌後3年〔自己認証（自社データ）による〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*製造販売

ニプロ株式会社
フリーダイヤル：0120-226-069
受付時間：9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

製造

ニプロ医工株式会社

販売（お問い合わせ先）

マルホ株式会社 製品情報センター
電話番号：0120-12-2834



ニプロ株式会社