

機械器具 38 医療用鉤
管理医療機器 単回使用眼科用鉤 35314002

ニプロディスポーザブル眼内レンズムーバー

再使用禁止


【禁忌・禁止】

1. 使用方法
- 1) 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は、眼科眼内レンズ（人工水晶体）挿入術において使用される眼科用鉤である。
針管には、ストレートタイプと弧状タイプ、90～180度の角度が付いたタイプがあり、針先に刃面はなく滑り傷防止のためのシリコンチューブがついている。

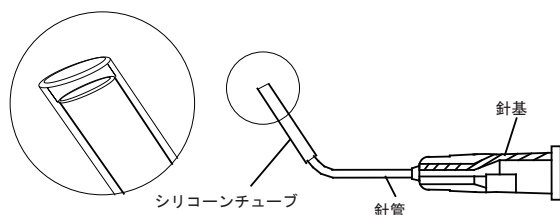

2. 材質

針管	ステンレス鋼
針基	ポリプロピレン
シリコンチューブ	シリコン

【使用目的又は効果】

単回使用眼科用鉤の定義から逸脱しない使用目的、効能又は効果

【使用方法等】

1. 包装を開封し、本品を取り出します。
 2. 本品をハンドピースに取り付けます。
- *3. 使用後は感染防止に注意し、安全な方法で廃棄します。

*【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 本品は合成樹脂製品のため、温度が低下するにつれて強度が低下することから取扱いには注意すること。〔破損のおそれがある。〕

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。
有効期間：滅菌後5年〔自己認証（自社データ）による〕

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売
ニプロ株式会社

製造
ニプロ医工株式会社

販売（お問い合わせ先）
サイメンデザイン株式会社
電話番号：03-3870-9230



ニプロ株式会社