

ニプロCPチャンバーセットEN (キャップ付)

再使用禁止


【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は、バッグ本体、チューブ、トラップ、CPコネクタ、ローリングチューブ、ローラークランプ、カテーテルコネクタ等から構成されている。

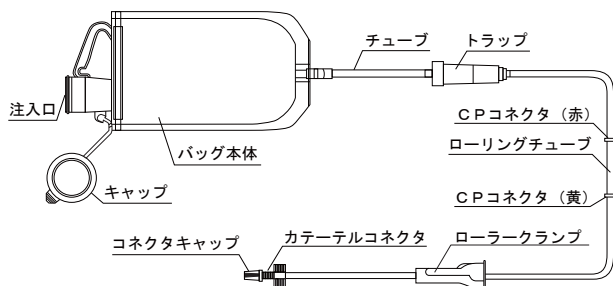

2. 材質

バッグ	ポリエチレン
チューブ	ポリ塩化ビニル
トラップ	アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン共重合体、ポリプロピレン
CPコネクタ	アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン共重合体
ローリングチューブ	シリコーンゴム
カテーテルコネクタ	ポリカーボネート

ポリ塩化ビニルの可塑剤はトリメリット酸トリ-2-エチルヘキシルである。

【使用目的又は効果】

胃若しくは腸に栄養を投与すること。

【使用方法等】

1. 使用方法

- 1) 本品のローラークランプを閉じ、バッグ本体にあらかじめ調製した栄養剤等を充填し、注入口を閉じます。
- 2) 本品のローラークランプを開いて、空気を追い出すようにして、チューブ及びトラップ内に栄養剤等を満たします。ただし、トラップ内には転倒しても流出しない空気が残ります。
- 3) ローラークランプを閉じ、輸液ポンプの使用方法に従って本品を輸液ポンプにセットします。
- 4) ローラークランプを全開にし、輸液ポンプの注入量を正しく設定します。
- 5) 本品のカテーテルコネクタをカテーテル等に接続し、輸液ポンプを始動させ、投与を開始します。
- 6) 使用後は感染防止に留意して、安全な方法で廃棄します。

2. 組み合わせて使用する医療機器

下記に記載の輸液ポンプと組み合わせて使用します。

- 1) 販売名：ニプロキャリカポンプ CP-330
承認番号：21400BZZ00535000

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

1. 本品はニプロキャリカポンプ CP-330専用のポンプ用経腸栄養注入セットであるので、他の輸液ポンプは使用しないでください。
2. チューブセット時は、チューブに折れ、つぶれ、たるみがないこと及び上下のチューブ溝、フィンガー部、チューブガイド、各種検出部、チューブクランプ部にチューブが正しくセットされていることを確認してください。〔過大注入、過小注入や未投与等のおそれがあります。〕

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 本品は誤接続防止ポンプ用経腸栄養注入セットとして接続部にカテーテルチップを採用しているため、ルーアータパへの無理な接続や別用途には使用しないこと。
- 2) 使用中は本品の破損、接合部の緩み及び栄養剤等の漏れ等について定期的に確認すること。
- 3) 脂肪乳剤及び脂肪乳剤を含む医薬品等、ヒマシ油等の油性成分、界面活性剤又はアルコール等の溶解補助剤などを含む医薬品等を投与する場合及びアルコールを含む消毒剤を使用する場合は、コネクタのひび割れについて注意すること。〔薬液等により延長チューブ等のメスコネクタにひび割れが生じ、血液及び薬液漏れ、空気混入等の可能性がある。特に、全身麻酔剤、昇圧剤、抗悪性腫瘍剤及び免疫抑制剤等の投与では、必要な投与量が確保されず患者への重篤な影響が生じる可能性がある。なお、ライン交換時の締め直し、過度な締め付け及び増し締め等は、ひび割れの発生を助長する要因となる。〕
- 4) ひび割れが確認された場合は、直ちに新しい製品と交換すること。
- 5) 本品の使用限度圧は140kPaであるので、注意すること。
- 6) 長時間投与する場合は48時間以内に新しい製品と交換すること。

2. 不具合・有害事象

- 1) その他の不具合
(1) 本品の破損
(2) 接続部の緩み、外れ
(3) 液漏れ

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。
有効期間：滅菌後3年（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売（お問い合わせ先）
ニプロ株式会社
電話番号：06-6372-2331（代表）

製造
ニプロ医工株式会社



ニプロ株式会社