

機械器具 74 医薬品注入器
指定管理医療機器 単回使用注射用針 30889000
（単回使用皮下注射用針 12745002）

プレスワン

再使用禁止


【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は、コンテナ、針管、針基、タンパーシールから構成される、滅菌済み注射針である。

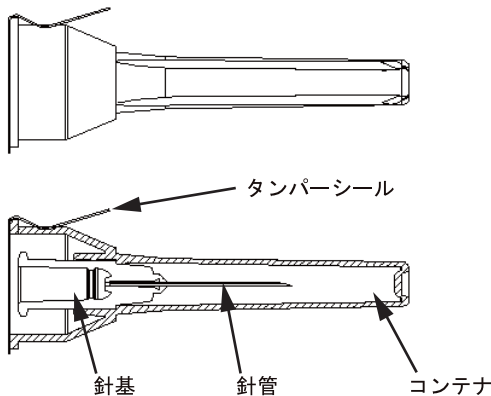

2. 材質

針管：ステンレス鋼
針基：ポリプロピレン

【使用目的又は効果】

プレフィル用シリンジ又は医薬品容器等に接続して注射用医薬品を皮下、皮下筋肉又は血管内に注入する。

【使用方法等】

1. コンテナからタンパーシールを剥がし、針基の位置を確認しながらコンテナごとプレフィル用シリンジ又は医薬品容器等にしっかりと取り付けます。（スリップ式のテーパに取り付ける場合は真っ直ぐに、ロック式のテーパに取り付ける場合は時計回りに回しながら取り付けます。）
2. コンテナを外す場合は、プレフィル用シリンジ又は医薬品容器等とコンテナの根元を持ち、針先に注意しながらひねらずに真っ直ぐコンテナを引き抜きます。
3. 必要に応じてプライミングを行い、皮下注射用医薬品の場合は皮下に、皮下筋肉注射用医薬品の場合は皮下筋肉に、血管内注射用医薬品の場合は血管内に穿刺します。
4. 使用後は、感染防止に注意し、安全な方法で廃棄します。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

1. 本品を接続する際にはコンテナを外さずに行ってください。
2. コンテナを外す際には、誤って手指等に針を刺さないよう取扱いには十分注意してください。
3. 針管に過剰な負荷をかけたり、コンテナを外す際に針先がコンテナに触れないよう注意してください。〔針先が変形するおそれがあります。針先が変形した場合は、本品を新しいものと交換してください。〕
4. 接続部に薬液又は血液が付着しないよう注意してください。〔接続部の緩み等が発生するおそれがあります。〕
5. リキャップしないで行ってください。〔リキャップ自体に誤穿刺のおそれがあり、また、誤って斜めにリキャップすることで、針先がコンテナを貫通するおそれがあります。〕

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 本品は合成樹脂製品のため、温度が低下するにつれて強度が低下することから取扱いには注意すること。〔破損するおそれがある。〕

2. 不具合・有害事象

- 1) その他の不具合
 - (1) 誤穿刺
 - (2) 外れ
 - (3) 液漏れ

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。

有効期間：滅菌後5年（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売（お問い合わせ先）

ニプロ株式会社

電話番号：06-6375-6709

製造

ニプロ医工株式会社

