

溶解液注入針 (TN-5-2)

再使用禁止

【禁忌・禁止】


1. 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は、溶解液と各種製剤を混ぜ合わせる時に用いられる合成樹脂製の滅菌済み溶解液注入針である。

本品は、本体に針が組み込まれており、針先を保護するための保護キャップが付属されている。

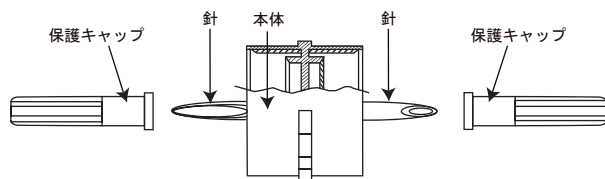

2. 材質


針：アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン共重合体

【使用目的又は効果】


本品は、薬剤を容器から他の薬液容器に移すために用いる用具である。

【使用方法等】


1. 使用方法

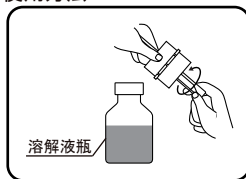


1) 溶解液瓶のゴム栓を消毒し、本品の片方の保護キャップをひねって外します。外した保護キャップは6) で使用するため、清潔な場所へとおきます。

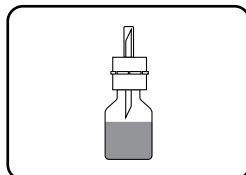


2) 溶解液瓶のゴム栓中央部に針を真っ直ぐ刺し込みます。

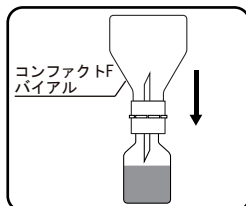


3) コンファクトFバイアルのゴム栓を消毒します。本品のもう片方の保護キャップを外し、コンファクトFバイアルのゴム栓中央部へ針を真っ直ぐ刺し込みます。

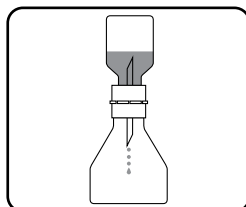


4) 上下を反対にして溶解液をコンファクトFバイアルに注入します。

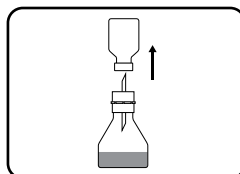


5) 溶解液注入後、本品をコンパクトFバイアル側に残したまま、空の溶解液瓶を抜き取ります。

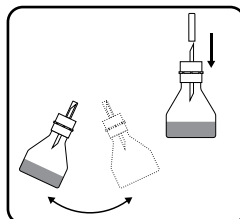

6) 1) でとっておいた保護キャップをはめ、振り子を振るように左右にゆっくりと振盪し、できるだけ泡立ないようにして完全に溶解させます。

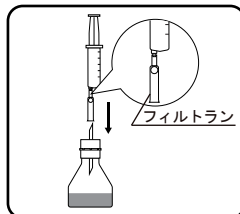

7) 保護キャップを外します。注射筒の筒先にフィルタランを取り付け、押子をコンパクトF用量分引いてそのまま本品の針に深く刺し込み、押子を押し込みます。

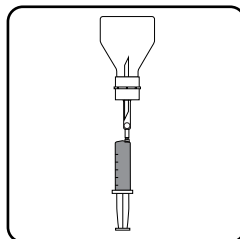

8) コンファクトFバイアルを倒立させ、バイアル中のコンパクトFを注射筒内に移します。

2. 組み合わせて使用する医療機器

本品は、以下の医療機器と組み合わせて使用します。

1) 販売名：フィルタラン、承認番号：15800BZZ00949000

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

1) 誤って手指等に針を刺さないよう取扱いには十分注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。

有効期間：滅菌後4年6ヶ月（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売（お問い合わせ先）

ニプロ株式会社

電話番号：06-6375-6709

製造

ニプロ医工株式会社



ニプロ株式会社