

機械器具 74 医薬品注入器
一般医療機器 薬液調整用針 70379000

溶解移注針 (TN-9-32N)

再使用禁止

【禁忌・禁止】


1. 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は、溶剤と各種薬剤を混ぜ合わせる時に用いられる滅菌済み溶解移注針である。

本品は本体に移注針が同時成形により組み込まれている。

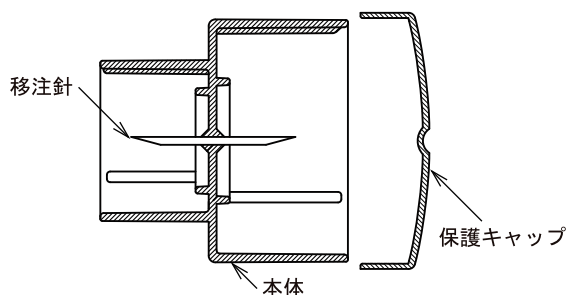


2. 材質

移注針：ステンレス鋼


【使用目的又は効果】

本品は、薬剤を容器から他の薬液容器に移すために用いる用具である。


【使用方法等】

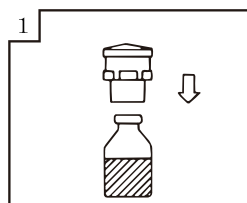

1. 本品の保護キャップのついてる側を上にし、移注針を溶剤瓶のゴム栓中央部に真っ直ぐ刺し込みます。

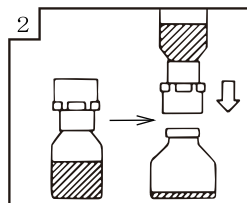

2. 保護キャップを外し、本品を刺し込んだ溶剤瓶を逆さにして薬剤瓶のゴム栓中央部に移注針を真っ直ぐ刺し込むと、溶剤が薬剤瓶へ移注されます。

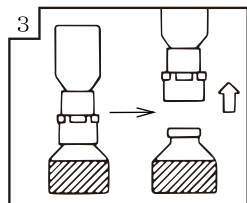

3. 空になった溶剤瓶を本品と一緒に引き抜きます。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 誤って手指等に針を刺さないよう取扱いには十分注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。

有効期間：滅菌後4年6ヶ月（自己認証による）

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売（お問い合わせ先）

ニプロ株式会社

電話番号：06-6375-6709

製造

ニプロ医工株式会社



ニプロ株式会社