

機械器具 47 注射針及び穿刺針
一般医療機器 通気針 70199000

通気針

（献血ベニロンーⅠ専用）


再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

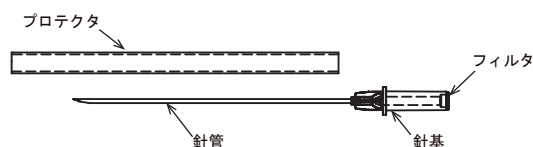

2. 材質

針管：ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

本品は、輸液瓶等から輸液する際、瓶内に通気されるために使用する針である。チューブ及びフィルター付きもある。

【使用方法等】

1. 製剤バイアルのゴム栓に輸液セットのびん針を刺し、バイアルを逆さまに吊るします。
2. 本品のフィルタ部分を指で蓋をした状態のまま、製剤バイアルのゴム栓に刺し、針先が液面より上に出たことを確認してからフィルタ部分の指を放します。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

1. 誤って手指等に針を刺さないよう取扱いには十分注意してください。
2. プロテクタを外すときは、針先がプロテクタに触れないよう注意してください。〔針先が変形し、刺通しづらくなるおそれがあります。〕
3. リキャップしないでください。〔リキャップ自体に誤穿刺のおそれがあり、また、誤って斜めにリキャップすることで、針先がプロテクタを貫通するおそれがあります。〕

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 本品は合成樹脂を用いた製品のため、温度が低下するにつれて強度が低下することから取扱いには注意すること。〔破損のおそれがある。〕

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。

有効期間：滅菌後4年5ヶ月（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売（お問い合わせ先）

ニプロ株式会社

電話番号：06-6375-6709

製造

ニプロ医工株式会社



ニプロ株式会社