

機械器具 55 医療用洗浄器
一般医療機器 洗浄剤注入用具 70463000
クリーン・ウォッシングニードル

再使用禁止

【禁忌・禁止】


1. 使用方法
- 1) 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は、滑らかで丸みのある閉じた先端付近に、通常2ヶ所の側孔を有する針管と針基から構成され、根管や歯周ポケットの洗浄に用いる。

本品の針管はハードタイプと自在に曲げられるソフトタイプの2タイプがある。

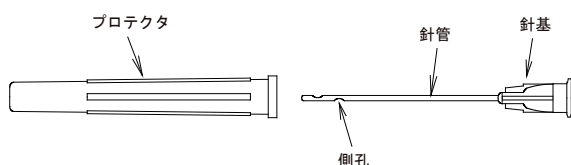

2. 材質


針管	ステンレス鋼
針基	ポリプロピレン

【使用目的又は効果】

本品は、洗浄剤を注入する器具である。

【使用方法等】

1. 包装を開封し、本品を取り出します。
2. 本品の針基に、注射筒（ロック式）を接続します。
3. プロテクタを外し、根管や歯周ポケットの洗浄を行います。

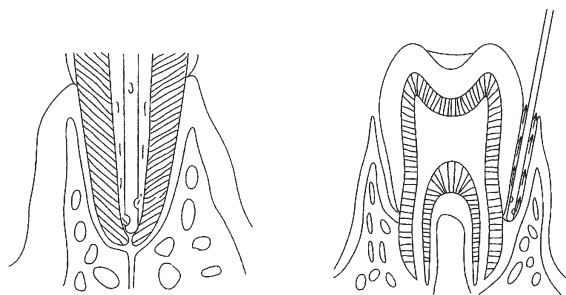

(根管洗浄使用例)

(歯周ポケット洗浄使用例)

<使用方法等に関連する使用上の注意>

1. 必ずロック式の注射筒を使用してください。[ロック式以外の注射筒を用いると、接続部が外れるおそれがあります。]

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。

有効期間：滅菌後5年 [自己認証（自社データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*製造販売（お問い合わせ先）

ニプロ株式会社

フリーダイヤル：0120-226-069

受付時間：9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

製造

ニプロ医工株式会社



ニプロ株式会社