

ニプロ経腸栄養用エクステンションチューブ (汎用胃瘻カテーテル用)

再使用禁止

【禁忌・禁止】


1. 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】


1. 形状・構造

〔構造図（代表図：品種により構成部品が異なる場合がある。）〕

1) カテーテルシリンジ用コネクタタイプ

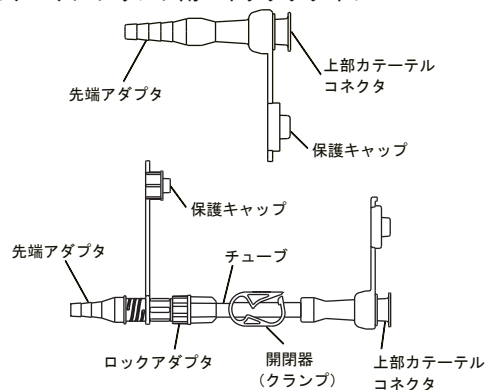

2) バッグ用コネクタタイプ

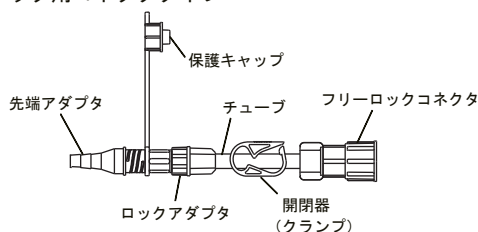

2. 材質

チューブ、 上部カテーテルコネクタ	ポリ塩化ビニル
先端アダプタ	ポリ塩化ビニル、又はアクリロニトリル-ブタジエンスチレン共重合体
ロックアダプタ、 フリーロックコネクタ	アクリロニトリル-ブタジエンスチレン共重合体

本品はポリ塩化ビニルに可塑剤（トリメリット酸トリ-2-エチルヘキシル）を使用している。

【使用目的又は効果】

胃又は腸に挿入したカテーテルと連結して経腸栄養剤を投与する器具をいう。

【使用方法等】

1. 使用方法

- 1) 包装から本品を取り出します。
- 2) 上部カテーテルコネクタをニプロカテーテル用シリンジのカテーテルチップに接続します。バッグ用コネクタタイプの場合は、フリーロックコネクタを栄養剤バッグの開口部に接続します。
- 3) チューブ付の場合はチューブ内を栄養剤で満たし、開閉器（クランプ）を閉じます。
- 4) 先端アダプタを胃瘻カテーテルに確実に接続します。

- 5) 投与を開始します。チューブ付の場合は開閉器（クランプ）を開放し、投与を開始します。
- 6) 投与後、胃瘻カテーテルから先端アダプタを取り外します。チューブ付の場合は開閉器（クランプ）を閉じた後、胃瘻カテーテルから先端アダプタを取り外します。感染防止に留意し、安全な方法で廃棄します。
- 7) 投与後、胃瘻カテーテルに本品を残す場合は、上部カテーテルコネクタからニプロカテーテル用シリンジを取り外し、上部カテーテルコネクタに保護キャップをします。チューブ付の場合は開閉器（クランプ）を閉じた後、ロックアダプタを取り外して保護キャップをします。

2. 組み合わせて使用する医療機器

本品は以下の医療機器と組み合わせて使用できます。

- 1) 販売名：ニプロカテーテル用シリンジ、届出番号：27B1X00045000083
- 2) 販売名：PEGソリッド、届出番号：27B1X00045000078

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

1. 接続部に栄養剤等を付着させないこと。〔接続部の緩みや外れのおそれがある。〕

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 本品は末滅菌品であるので、清浄領域では使用しないこと。
- 2) 使用中は本品の破損、接続部の緩み及び液漏れ、詰まり等について定期的に確認すること。
- 3) 他の装置で栄養補給する場合は、高い圧力が加わらないよう注意すること。
- 4) チューブとコネクタ等の接合部には過度に引張る、押し込む、折り曲げるような負荷をかけないように注意すること。〔チューブの抜け、破損、伸び等のおそれがある。〕
- 5) コネクタを接続する場合は、過度な締め付けをしないこと。〔コネクタが外れなくなる、又はコネクタが破損し、接続部からの液漏れ、空気混入のおそれがある。〕

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売（お問い合わせ先）

ニプロ株式会社

電話番号：06-6372-2331（代表）

製造（輸入先）

ニプロ（上海）有限公司

[NIPRO (SHANGHAI) CORPORATION LIMITED]

中華人民共和国

[People's Republic of China]



ニプロ株式会社