

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管  
一般医療機器 眼科用灌流・吸引チューブ 70339000

# オペセーバー

## 再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

#### 1. 再使用禁止


### 【形状・構造及び原理等】

#### 1. 形状・構造

本品は、主に白内障超音波乳化吸引術で使用される吸引灌流回路に接続して使用するものであり、術中に灌流液の圧力と吸引圧との差によって生じる前房不安定現象（サージ現象）を緩和させる目的で使用する滅菌済みのチューブである。

本品は、吸引灌流回路に接続するためのY字型のコネクタとチューブから構成されている。

#### ＜オペセーバーの形状・構造＞

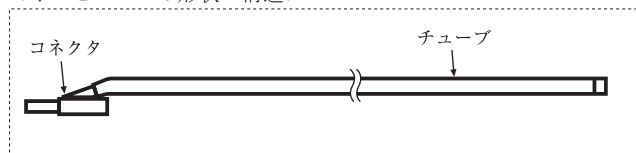

#### 2. 材質

コネクタ：ポリプロピレン

チューブ：ポリ塩化ビニル

### 【使用目的又は効果】

眼科手術時の灌流や吸引時に使用する機器専用のチューブセットである。

### 【使用方法等】

1. 包装を開封し、本品の包装を開封してください。
2. コネクタのメス側に吸引灌流回路の灌流チューブをしっかりと接続してください。次にコネクタのオス側を超音波ハンドピースのコネクタ又は灌流チューブのメス側にしっかりと接続してください。
3. 必要に応じて、本品のチューブを固定具等を用いて、吸引灌流回路に固定してください。
4. 使用後は、安全な方法で廃棄してください。

#### ＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

1. コネクタの接続部分などの薬液に接触する部分には直接手を触れないでください。
2. 他機器との接続に際しては、緩みや外れが発生しないようにコネクタをしっかりと接続してください。コネクタが十分嵌合したことを確認の上、使用してください。
3. 超音波乳化吸引術時には、本品のコネクタを保持して操作しないでください。〔コネクタを持って操作すると、接続部が外れ、灌流液が漏れるおそれがあります。〕

### 【使用上の注意】

#### 1. 重要な基本的注意

- 1) 使用中は本品の破損、接続部の緩み及び液漏れ等について定期的に確認すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

#### 2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。

有効期間：滅菌後3年（自己認証による）

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売（お問い合わせ先）

ニプロ株式会社

電話番号：06-6375-6709

製造

ニプロ医工株式会社

販売（お問い合わせ窓口）

有限会社サージカル・ジャパン

電話番号：03-3790-0247



ニプロ株式会社