


機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 輸液用延長チューブ 12170001

エクステンションチューブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】
1. 再使用禁止**【形状・構造及び原理等】**

1. 形状・構造

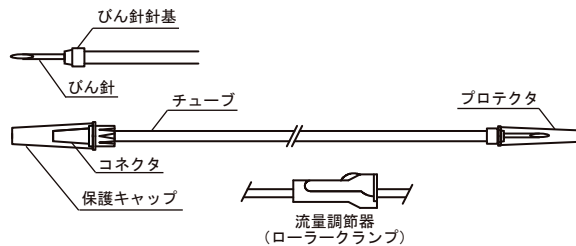

2. 材質

チューブ	ポリ塩化ビニル
コネクタ	ポリカーボネート
びん針	ステンレス鋼、又はアクリロニトリル-ブタジエンスチレン共重合体
びん針針基	ポリ塩化ビニル

ポリ塩化ビニルの可塑剤はフタル酸ジ-2-エチルヘキシルである。

【使用目的又は効果】

輸液などのラインを延長するために用いるチューブである。

【使用方法等】

1. 包装を開封し、本品を取り出します。
2. プロテクタを取り外し、薬液容器のゴム栓の○印中央に、びん針を真っ直ぐいっばいの深さまで刺通します。
3. 薬液容器の位置を上にして、薬液を完全にチューブ内へ導きます。
4. もう一方のびん針、又はコネクタを他の薬液容器、又は医療機器へ接続します。
5. 使用後は感染防止に留意し、安全な方法で廃棄します。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

1. 接続部への薬液等の付着に注意してください。〔接続部の緩み等のおそれがあります。〕
2. びん針を刺通する際、薬液容器のゴム栓（○印）に斜めに刺通したり、横方向に力をかけないでください。〔びん針破損のおそれがあります。〕
3. チューブと硬質部材（コネクタ等）との接合部付近で流量調節器（ローラーランプ）を操作しないでください。〔チューブ破損のおそれがあります。〕
4. 流量調節器（ローラーランプ）内でチューブがつぶれていないこと、ずれていないこと及び調節が確実にできることを確認してください。
5. 流量調節器（ローラーランプ）に過剰な負荷をかけないよう注意してください。〔ローラー外れ、流量調節不良のおそれがあります。〕

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 高圧注入には使用しないこと。〔破損のおそれがある。〕
- 2) 脂溶性の医薬品ではポリ塩化ビニルの可塑剤であるフタル酸ジ-2-エチルヘキシルが溶出するおそれがあるので注意すること。

- 3) プライミング後は直ちに薬液を投与すること。〔薬液汚染のおそれがある。〕
- 4) チューブを鉗子等でつまんで傷をつけないように、さらに注射針の先端、はさみ等の鋭利なもので傷をつけないように注意すること。〔液漏れや空気混入、破損のおそれがある。〕
- 5) コネクタを接続する場合は、過度な締め付けをしないこと。〔コネクタが外れなくなる又は、コネクタ破損のおそれがある。〕
- 6) コネクタ、又はびん針とチューブの接合部には過度に引張る、押し込む、折り曲げるような負荷をかけないように注意すること。〔チューブの抜け、破損、伸び等のおそれがある。〕
- 7) 使用中は本品の破損、接合部の緩み、空気混入、液漏れ及び詰まり等について、定期的に確認すること。
- 8) 脂肪乳剤及び脂肪乳剤を含む医薬品、ヒマシ油等の油性成分、界面活性剤又はアルコール等の溶解補助剤等を含む医薬品を投与する場合及びアルコールを含む消毒剤を使用する場合は、ひび割れに注意すること。〔薬液によりひび割れが生じ、薬液漏れ、空気混入等の可能性がある。特に、全身麻酔剤、昇圧剤、抗悪性腫瘍剤及び免疫抑制剤等の投与では、必要な投与量が確保されず患者への重篤な影響が生じる可能性がある。なお、ライン交換時の締め直し、過度な締め付け及び増し締め等は、ひび割れの発生を助長する要因となる。〕
- 9) ひび割れが確認された場合は、直ちに新しい製品と交換すること。

2. 不具合・有害事象

1) その他の不具合

- (1) 液漏れ
- (2) 空気混入
- (3) 接続した医療機器等の外れ
- (4) コネクタ等の破損

2) その他の有害事象

- (1) 薬液の汚染

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。
有効期間：滅菌後3年（自己認証による。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売（お問い合わせ先）

ニプロ株式会社

電話番号：06-6372-2331（代表）

製造（輸入先）

ニプロ（上海）有限公司

[NIPRO (SHANGHAI) CORPORATION LIMITED]

中華人民共和国

[People's Republic of China]



ニプロ株式会社