

機械器具 74 医薬品注入器
一般医療機器 採液針 70324000

ディスポーザブル採液針P (IS080369-3適合品)

再使用禁止


【禁忌・禁止】

1. 使用方法
- 1) 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は、主にバイアル等に封入された薬液をシリンジで吸入する際に使用されるもので、プラスチック針、コネクタ、濾過フィルタ、プロテクタによって構成される単回使用の採液針である。

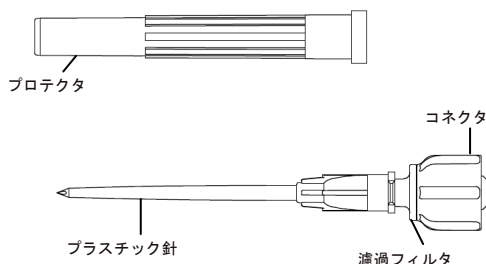

コネクタはIS080369-3（経腸栄養用コネクタ規格）に適合する。

2. 材質

プラスチック針	ポリカーボネート
コネクタ	ポリカーボネート
濾過フィルタ	ポリエステル

【使用目的又は効果】

シリンジに取り付けて薬液容器等から薬液を採取するために用いる採液針である。

【使用方法等】

1. 本品の包装を開封後、本品にシリンジを接続します。
2. 本品をバイアル等の薬液容器に刺通し、シリンジに薬液等を吸引します。この時、必要に応じ薬液容器を上下逆さまにします。
3. 薬液容器から本品を抜き去った後、シリンジから本品を取り去ります。
4. 使用後は安全な方法で廃棄します。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

1. 誤って手指等にプラスチック針を刺さないよう取扱いには十分注意してください。
2. 本品のコネクタは、IS080369-3（経腸栄養用コネクタ規格）対応のため、IS080369-3に適合する製品と接続してください。IS080369-3であるかどうかは包装表示で確認してください。
3. プラスチック針をバイアル等のゴム栓に刺通する場合は、ゴム栓中央部に垂直に刺し、横方向に力をかけたり、他の針により刺通された同一部位に刺通しないよう注意してください。
4. 針先を液面から出さないようにして、薬液をゆっくり吸引してください。
5. コネクタへの薬液等の付着に注意してください。〔接続部の緩み等が発生するおそれがあります。〕
6. リキャップしないでください。〔リキャップ自体に誤穿刺のおそれがあります。〕

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 使用中は本品の破損、接続部の緩み、薬液漏れ及び詰まり等について、十分注意すること。
- 2) 脂肪乳剤及び脂肪乳剤を含む医薬品、ヒマシ油等の油性成分、界面活性剤又はアルコール等の溶解補助剤等を含む医薬品に使用する場合及びアルコールを含む消毒剤を使用する場合は、本品のひび割れについて注意すること。〔薬液により本品にひび割れが生じ、薬液漏れ等の可能性がある。なお、過度の締め付け及び繰り返し締め付け等はひび割れの発生を助長する要因となる。〕
- 3) 本品は合成樹脂製品のため、温度が低下するにつれて強度が低下することから取扱いには注意すること。〔破損のおそれがある。〕
- 4) ひび割れが確認された場合は、直ちに新しい製品と交換すること。

2. 相互作用（他の医薬品・医療機器との併用に関すること）

1) 併用注意（併用に注意すること）

- (1) 使用するシリンジの種類によっては、十分な接続強度が確保出来ない場合があるので、あらかじめ接続状態を確認の上、使用すること。

3. 不具合・有害事象

1) その他の不具合

- (1) 破損
- (2) 液漏れ

2) その他の有害事象

- (1) 誤穿刺

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- 水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

- 包装に記載の使用期限欄を参照のこと。
有効期間：滅菌後3年〔自己認証（自社データ）による〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

* 製造販売（お問い合わせ先）

ニプロ株式会社

フリーダイヤル：0120-226-069

受付時間：8:00～16:45（土・日・祝日を除く）

製造

ニプロ医工株式会社



ニプロ株式会社