

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 内視鏡・関節鏡用接続チューブ 70267000
(送水吸引チューブ 70355000)

i チューブ E E E

再使用禁止

【禁忌・禁止】


1. 使用方法
- 1) 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は経尿道的切除術の際に視界確保のための灌流液を供給する目的に用いられる。関節鏡視下手術時の灌流、創傷面の洗浄の際、薬液を術部に誘導する目的で使用される。メイン及びサブチューブ、プラスチック針、保護キャップ、Y字管、開閉器（クランプ）等からなる。

〔構造図（代表図：品種により構成部品が異なる場合がある）〕

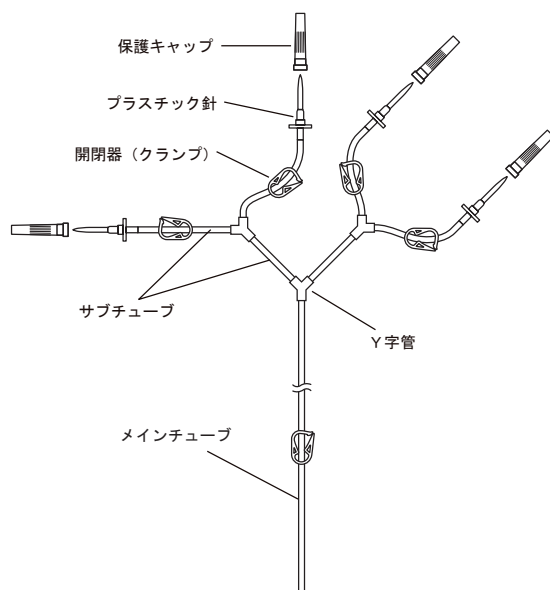

チューブ長さ	チューブ内径
メインチューブ：2.2m	メインチューブ：6.0mm *サブチューブ：4.0mm 5.0mm

2. 材質

チューブ、Y字管	ポリ塩化ビニル
プラスチック針	アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン共重合体

ポリ塩化ビニルの可塑剤はフタル酸ジ-2-エチルヘキシルである。

【使用目的又は効果】

鏡視下手術及び検査時に内視鏡や関節鏡に接続するチューブである。

【使用方法等】

1. 全ての開閉器（クランプ）を閉じます。
2. 灌流液の容器をスタンド等に吊り下げます。
3. 保護キャップがプラスチック針を覆っていることを確認します。

4. プラスチック針の保護キャップを外し、容器のプラスチック針挿入部に刺通します。
5. 回路内を洗浄するため、容器側の開閉器（クランプ）を開き、容器を圧迫したり、緩めたりしてプライミングを行います。
6. 内視鏡又は関節鏡側の開閉器（クランプ）を開き、残りの回路内を洗浄します。
7. 回路内を洗浄した後、開閉器（クランプ）を閉じます。
8. メインチューブを内視鏡又は関節鏡に接続します。
9. 開閉器（クランプ）を開き、灌流液の流量を調節します。
10. 使用中の容器が空になる前に他の容器の回路を開放します。空になった容器の回路を閉じ、必要に応じて新しい灌流液が入った容器に取り替えます。
11. 膀胱洗浄に使用する場合は、回路の洗浄を行った後、開閉器（クランプ）を閉じ、適切に尿道カテーテルの洗浄ポートへ接続します。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

1. 開閉器（クランプ）の開閉操作は確実に行ってください。
2. 灌流液はゴム栓付き容器に入ったものを使用してください。〔プラスチック針の破損や接続後の脱落のおそれがあります。〕

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 本品はポリ塩化ビニルの可塑剤であるフタル酸ジ-2-エチルヘキシルが溶出するおそれがあるので注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。

有効期間：滅菌後3年〔自己認証（自社データ）による〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

**製造販売（お問い合わせ先）

ニプロ株式会社

フリーダイヤル：0120-226-410

受付時間：9:00～17:15（土・日・祝日を除く）

製造

ニプロ株式会社

販売

オリンパスメディカルサイエンス販売株式会社

電話番号：03-3379-6000



ニプロ株式会社