

ニプロセルトリ

再使用禁止

【禁忌・禁止】


1. 使用方法

- 1) 再使用禁止
- 2) サンプリングポートに針を接続しないこと。[液漏れのおそれがある。]

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は、簡便かつ清潔な調整のために、三方活栓等が容器本体にあらかじめ接続されている。

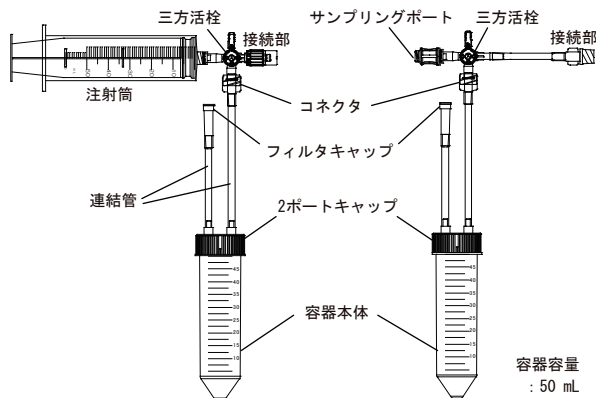

2. 材質

容器本体	ポリプロピレン
2ポートキャップ	ポリエチレン
コネクタ/接続部	ポリカーボネート
サンプリングポート	ポリカーボネート、シリコーンゴム
連結管	ポリ塩化ビニル
三方活栓	ポリプロピレン、ポリカーボネート、ポリエチレン
注射筒	ポリプロピレン、スチレン系熱可塑性エラストマー

ポリ塩化ビニルの可塑剤はフタル酸ジ-2-エチルヘキシルである。

【使用目的又は効果】

本品は、組織培養のために必要な血液成分などを分離調整する容器である。

【使用方法等】

1. 本品を包装から取り出します。
2. 併用する機器（注射筒等）を接続部に接続します。
3. 三方活栓の向きを確認し、血液などを容器本体に注入します。
この時、注射筒付きのものは注射筒を使用して血液などを容器本体に注入できます。
4. 市販の高周波シーラーで2ポートキャップ上部2本の連結管をそれぞれシールし、清潔なはさみを用いて三方活栓等と容器本体をシール部分中央で切り離します。
5. 容器本体を遠心分離する際は、2ポートキャップを清浄な環境で市販のキャップに付け替えます。
6. 調整後の血液成分などを容器から取り出す際は、清浄な環境で行います。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

1. 接続時には必要に応じてテープ等を補助的に使用してください。ロック機構付きのネジが確実にしまっていることを確認してください。
2. 容器本体の容量目盛りは、あくまでも目安として使用してください。
3. 2ポートキャップのまま遠心分離すると、連結管等が遠心分離機のローターに接触して危険ですので、必ず製造販売業者が推奨する市販のキャップに付け替えてください。[推奨するキャップ以外を使用した場合、液漏れや異物混入等のおそれがあります。]
4. 市販のキャップについては本品の製造販売業者へ問い合わせ、製造販売業者が推奨するものを使用してください。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 脂溶性の医薬品ではポリ塩化ビニルの可塑剤であるフタル酸ジ-2-エチルヘキシルが溶出するおそれがあるので注意すること。
- 2) 容器本体を遠心分離する際は専用バケット等にて実施し、破損等に十分注意すること。2400G以上で遠心分離しないこと。
- 3) 使用中は本品の破損、接続部の緩み、部品の外れ、空気混入、液漏れ及び詰まり等について、定期的に確認し、異常がある場合は使用を中止すること。
- 4) アルコールを含む消毒剤を使用する場合は、ひび割れについて注意すること。[薬液により三方活栓及びコネクタ、サンプリングポートにひび割れが生じ、液漏れ等の可能性がある。なお、過度の締め付け及び増し締め等は、ひび割れの発生を助長する要因となる。]
- 5) ひび割れが確認された場合は、直ちに新しい製品と交換すること。
- 6) 連結管とコネクタの接続部には過度に引っ張る、押し込む、折り曲げるような負荷をかけないように注意すること。[連結管の抜け、破損、伸び等のおそれがある。]
- 7) 併用機器を接続部に接続する場合は、過度な締め付けをしないこと。[併用機器が外れなくなる、又は接続部で破損するおそれがある。]
- 8) サンプリングポートに注射筒等を接続する際、注射筒等の先端形状によっては流路が開通しない場合があるので、採取できない場合は、別の注射筒等に交換すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。

有効期間：滅菌後3年 [自己認証（自社データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*製造販売（お問い合わせ先）

ニプロ株式会社

フリーダイヤル：0120-002-192

受付時間：9:00～17:15（土・日・祝日を除く）

製造

ニプロ株式会社



ニプロ株式会社