

機械器具 74 医薬品注入器
一般医療機器 容器アダプタ 44035000

キットH専用V A

再使用禁止


【禁忌・禁止】

1. 使用方法
- 1) 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、専用容器（販売名：生食溶解液キットH（承認番号：20600AMZ00777000））にバイアルを接続させるために用いる接続器具である。

1. 形状・構造

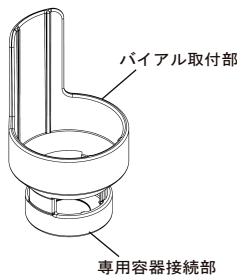


【使用目的又は効果】

専用の容器にバイアルを接続するために用いる。

【使用方法等】

1. 使用方法

- 1) 包装を開封し、本品を取り出します。
- 2) 本品を専用容器に接続します。（図1参照）
- 3) 専用容器に接続した本品にバイアルを取り付け、そのまま垂直に押し、専用容器とバイアルを連通させます。（図2参照）

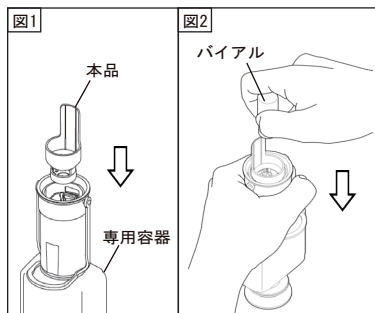

2. 組み合わせて使用する医薬品

本品は、以下の医薬品と組み合わせて使用します。

- 1) 販売名：生食溶解液キットH
承認番号：20600AMZ00777000

<使用方法等に関連する使用上の注意>

1. 専用容器接続部には手を触れないよう注意してください。
[触れた箇所が専用容器の針先に接触することで、薬液を汚染するおそれがあります。]
2. 本品を専用容器に接続する際は、専用容器の針先に接触しないように接続してください。[本品との接触による、専用容器の針先の曲がり、折れのおそれがあります。]
3. 本品を専用容器に接続する際は、専用容器の針が動かないよう注意して接続してください。[バイアルがない状態で専用容器が開通され、専用容器内の薬液が漏れるおそれがあります。]

4. バイアルを取り付ける際は、バイアルのゴム栓の中心に専用容器の針先をあてがってから、取り付けてください。[専用容器の針先の曲がり、折れやバイアルからの液漏れのおそれがあります。]
5. 連通時は、専用容器からの液漏れのおそれがあるため、専用容器を強く握らないでください。
6. 連通させる際は、バイアル底面を押し込んで、連通してください。[本品を持って押し込むとバイアルが専用容器と連通しないおそれがあります。]
7. バイアルを専用容器から取り外す際は、本品とバイアルを一緒に引き抜いてください。[バイアルのみが取り外されると、専用容器が開通状態のままとなり、薬液が漏れるおそれがあります。]
8. 本品の構造上、バイアル口径が16mmよりも大きなもの、ゴム栓口径が5mmより小さいものは接続できないため、注意してください。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 使用中は、専用容器及びバイアルの連通状態に緩みがないか注意すること。[接続部及び取付部の緩みによる液漏れのおそれがある。]
- 2) 本品は合成樹脂製品のため、温度が低下するにつれて強度が低下することから取扱いには注意すること。[破損のおそれがある。]

2. 不具合・有害事象

1) その他の不具合

- (1) 本品の破損
- (2) 接続部及び取付部の外れ、緩み
- (3) 液漏れ

2) その他の有害事象

- (1) 薬液の汚染

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。

有効期間：滅菌後1年

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売（お問い合わせ先）

ニプロ株式会社

電話番号：06-6372-2331（代表）

製造

ニプロ医工株式会社



ニプロ株式会社