

ボルヒール GI エンベロープ

再使用禁止


【禁忌・禁止】

1. 使用方法
- 1) 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は、吸収性組織補強材等を収納するための収納部と、内視鏡を用いて術部へ輸送するための把持部により構成される。収納部は2段構造となっており、それぞれに吸収性組織補強材等が収納可能である。

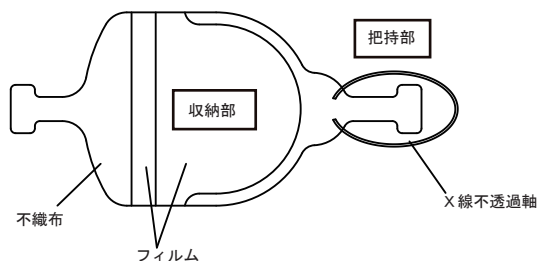

2. 材質


不織布	ポリプロピレン系不織布及びポリエチレン
フィルム	ポリエチレン
X線不透過軸	バリウム混合ポリエチレン

【使用目的又は効果】


内視鏡治療時に消化管内視鏡とともに用いる機器であり、人体の自然開口部を通じて吸収性組織補強材等を輸送するために用いる。

【使用方法等】


1. 包装より本品を取り出します。
2. 本品の収納部に吸収性組織補強材等を内包します。

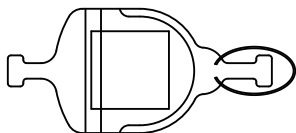


3. 内視鏡の鉗子チャンネルに鉗子を通します。
4. 鉗子チャンネルに通した鉗子を用いて、フィルム部が内視鏡側になるように本品を内視鏡に沿わせて把持し、術部へ輸送します。

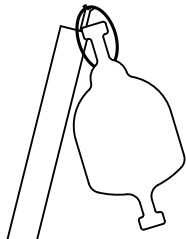

5. 収納部から吸収性組織補強材等を鉗子で取り出し、術部に適用します。

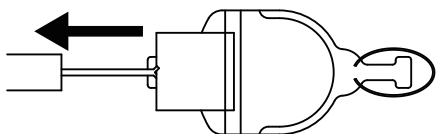

6. 本品を鉗子で把持し、術部から回収します。

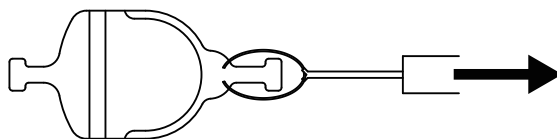

7. 使用後は感染防止に留意し、安全な方法で廃棄します。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

1. 止血鉗子等を用いる場合には、高周波を流した状態で本品を接触させないでください。〔破損のおそれがあります。〕
2. 針付き鉗子は使用しないでください。〔フィルム破損により内包物が濡れるおそれがあります。〕
3. オーバーチューブを併用する際、内視鏡とオーバーチューブの空隙によって輸送抵抗が高くなる場合があります。
4. 本品の輸送中に過度の抵抗等の異常を感じた際は無理に輸送せず、操作を中止して初めからやり直してください。〔破損のおそれがあります。〕
5. 使用後は体内遺残がないよう、構成部品が破損なく体内から取り出されたことを確認してください。

【使用上の注意】

1. 不具合・有害事象

- 1) その他の不具合
- (1) 破損
- 2) その他の有害事象
- (1) 体内遺残

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。

*有効期間：滅菌後3年〔自己認証（自社データ）による〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

**製造販売（お問い合わせ先）

ニプロ株式会社

フリーダイヤル：0120-226-069

受付時間：9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

製造

ニプロ医工株式会社