

機械器具 74 医薬品注入器  
一般医療機器 耳鼻咽喉科用薬液噴霧器 70453000

## イグザドーズ™ Nasal Spray


## 再使用禁止

## 【禁忌・禁止】

1. 使用方法
- 1) 再使用禁止

## 【形状・構造及び原理等】

## 1. 形状・構造

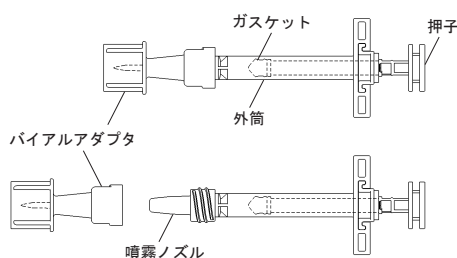

## 2. 材質

|          |                 |
|----------|-----------------|
| バイアルアダプタ | ポリカーボネート        |
| 外筒、噴霧ノズル | ポリプロピレン         |
| ガスケット    | スチレン系熱可塑性エラストマー |

## 【使用目的又は効果】

薬液を患者の鼻腔内に局所的に噴霧するために用いる。

## 【使用方法等】

1. 本品を包装内から取り出します。
2. バイアルアダプタが緩んでいないことを確認し、緩んでいる場合は時計回りに締め込みます。
3. 薬液の入ったバイアルにバイアルアダプタを接続します。
4. バイアルを接続したままバイアルを上に向け、押子をいっぱいまで引きバイアル内の薬液を採取します。
5. 外筒を軽くたたき、薬液中、外筒中の気泡を取り除きます。その後、押子が止まるまで押し込み、空気と余分な薬液をバイアルに移します。
6. バイアルを下に向け、バイアルアダプタを固定した状態で外筒を反時計回りに回し、バイアルアダプタを取り外します。
7. 外筒を固定した状態で押子を時計回りに90°回転させます。
8. 噴霧ノズル先端を鼻孔に挿入し、押子が止まるまですばやく押し切り薬液を噴霧します。この操作で薬液の半量が噴霧されます。
9. 噴霧ノズル先端を鼻孔から抜き、再度、押子を時計回りに90°回転させます。
10. 噴霧ノズル先端をもう一方の鼻孔に挿入し、再度、押子をすばやく押し切り、残りの薬液を噴霧します。
11. 使用後は感染防止に留意し安全な方法で廃棄します。

## &lt;使用方法等に関連する使用上の注意&gt;

1. バイアルアダプタの針に直接手を触れないよう注意してください。
2. バイアルアダプタの締め込みは、接続部破損のおそれがあるため無理な力をかけずに行ってください。
3. バイアルアダプタをバイアルに接続する際は、ゴム栓の中心に真っ直ぐに刺してください。
4. 押子は真っ直ぐに引いてください。[斜めに引くと、ガスケットと外筒との密着性悪化による、液漏れや空気混入、又はガスケット外れのおそれがあります。]
5. 無理な力をかけて押子を引かないでください。[押子が外筒から抜けるおそれがあります。]
6. 押子を回転させる際は無理な力をかけずにおこなってください。[破損のおそれがあります。]

## 【使用上の注意】

## 1. 重要な基本的注意

- 1) 使用中は本品の破損、接続部の緩み、液漏れ等について、十分注意すること。
- 2) 外筒を強く握る等、圧迫するような力をかけないこと。[ガスケットと外筒との密着性が悪くなり液漏れや空気混入のおそれがある。]
- 3) 運搬・操作時には、振動や衝撃に注意すること。
- 4) 本品は合成樹脂製のため、温度が低下するにつれて強度が低下することから取扱いに注意すること。[破損のおそれがある。]

## 2. 不具合・有害事象

## 1) その他の不具合

- |          |            |         |
|----------|------------|---------|
| (1) 破損   | (2) 接続部の緩み | (3) 液漏れ |
| (4) 空気混入 | (5) 部品外れ   |         |

## 【保管方法及び有効期間等】

## 1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

## 2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。

有効期間：滅菌後3年 [自己認証（自社データ）による]

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売（お問い合わせ先）

ニプロ株式会社

フリーダイヤル：0120-226-069

受付時間：8:00～16:45（土・日・祝日を除く）

製造

ニプロ医工株式会社

