

機械器具 74 医薬品注入器
一般医療機器 採液針 70324000
(経腸栄養注入セット 70400000)

ＥＮチップ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 使用方法


- 1) 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

〔構造図（代表図）〕

- 1) チップ本体

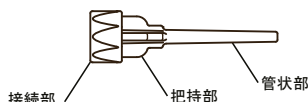

2. 材質

チップ本体	熱可塑性スチレン系エラストマー
-------	-----------------

【使用目的又は効果】

栄養剤容器等から栄養剤等を採取し、投与するために用いる。

【使用方法等】

1. 包装を開封し、本品を取り出します。
2. 注射筒に接続し、栄養剤等を吸引し、投与します。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

1. 本品は、IS080369-3に適合する製品と接続してください。
2. 注射筒と接続する際は、把持部を持ち、緩みや外れが生じないように十分に押し込んで、接続を確認してください。
3. 注射筒から本品を取り外す際は、栄養剤等が周囲に飛散しないように注意してください。また、管状部を持って取り外したり、過度な力をかけたりしないでください。
4. 高粘度や固形物を含む栄養剤等を吸引する際は、詰まりが生じることがあるので注意してください。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 接続部への経腸栄養等の付着に注意すること。〔接続部の緩み等のおそれがある。〕
- 2) 使用中は本品の破損、接合部の緩み及び液漏れ等について、定期的に確認すること。
- 3) 注射筒等に接続したまま長時間放置しないこと。
- 4) 使用後は医療廃棄物として適切に廃棄すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。

有効期間：滅菌後3年〔自己認証（自社データ）による〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売（お問い合わせ先）

ニプロ株式会社

フリーダイヤル：0120-226-410

受付時間：9:00～17:15（土・日・祝日を除く）

製造（輸入先）

ニプロ（上海）有限公司

[NIPRO (SHANGHAI) CORPORATION LIMITED]

中華人民共和国

[People's Republic of China]



ニプロ株式会社