


歯科材料 07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用パターン成形品 31836030

フィジオマグネット キーパーハウジングパターン

【形状・構造及び原理等】

組成：アクリル樹脂

形状：半透明の円型

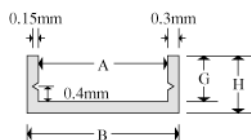

規格	φ A (mm)	φ B (mm)	G (mm)	H (mm)
25 用	2.7	3.3	0.8	1.1
30 用	3.2	3.8	0.8	1.1
35 用	3.7	4.3	0.8	1.1
40 用	4.2	4.8	0.8	1.1
45 用	4.7	5.3	0.8	1.1
48 用	5.0	5.6	0.8	1.1
52 用	5.4	6.0	0.8	1.1
55 用	5.7	6.3	0.8	1.1

原理：キーパーのスペースを確保するためのプラスチック製パターンである。

※【使用目的又は効果】

修復物等の製作に用いる既製パターンをいう。材質はワックス、レジン等からなる。歯科用ワックス成形品に該当するものを除く。

※【使用方法等】

- 1) 根面版ワックスパターンに、所定のサイズのハウジングパターンを埋伏してワックスアップを行います。
- 2) 通法により金合金、金銀パラジウム合金などの歯科用合金を用いて鋳造を行います。
- 3) フィジオマグネット ダイレクトボンド用キーパーの吸着面以外の表面とハウジング内面に 50 μm アルミナサンドブラスト処理を行い、接着性レジンでキーパーを取り付けます。キーパー吸着面、ハウジング辺縁部の余剰な接着性レジン是完全に除去してください。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- 1) 本品は PMMA を使用したレジンパターンですので、鋳造リングの加熱の際は急速加熱を避けること。
- 2) ハウジングの内径はキーパーより半径で 0.1mm 大きくなっている為、ワックスアップの際はハウジングパターンとキーパーの間隔が均等になるようにして使用すること。
- 3) 鋳造した根面板にキーパーを取り付ける前に、接着面は 50 μm のアルミナサンドブラスト処理（エア圧：2～3kgf/cm²）を行い、金属の種類に応じて金属接着プライマー処理をした後、スーパーボンド等の接着性レジンで取り付けること。
- 4) キーパー吸着面、ハウジング辺縁部の余剰な接着性レジン是完全に除去すること。
- 5) フィジオマグネットの使用説明書もよく読んだ上で使用すること。

※【使用上の注意】

- 1) 重要な基本的注意
 - ① 本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症のある術者は、手袋などを用いて直接本品に触れないようにすること。また、本品の使用により過敏症状を起こした場合には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。

※【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・本品は、高温、直射日光を避けて、温度変化の少ない室温で保管すること。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

※※【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ニッシン
住所：〒621-0001 京都府亀岡市旭町樋ノ口 88
電話番号：0120-571939（フリーダイヤル）
電話受付時間 月～金（祝日を除く）
午前 10：00～午後 5：00
発売元：株式会社モリタ