

ドクターメディラス MC-7500

【警告】

次の人は、本機の使用を禁止します。

- ・医師からマッサージを禁じられている人。

（例：血栓(塞栓)症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など）

- ・発症後 6 ヶ月以内の下肢深部静脈血栓症を患っているか、もしくはその恐れのある場合。

※「下肢深部静脈血栓症」とは、下肢全体または膝より下が腫れ上がって痛みがあり、立ったり歩いたりすると痛みが強くなる自覚症状のあることをいいます。

- ・装着部に急性炎症や化膿性疾患がある場合。

定格電圧 AC100V (50/60Hz)、定格時間 30 分

消費電力 34/29W (PSE)、24/22W (JIS)

4. 動作原理


本体にはコンプレッサ、制御回路、電磁弁が内蔵されており、コンプレッサと電磁弁は制御回路により制御され、パンツの各気室は制御回路のプログラムに従い加圧・除圧を繰り返す。

- ※ 5. 性能及び安全性に関する規格
圧力設定：4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0kPa

※ 【使用目的又は効果】

あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用する。

【形状・構造及び原理等】

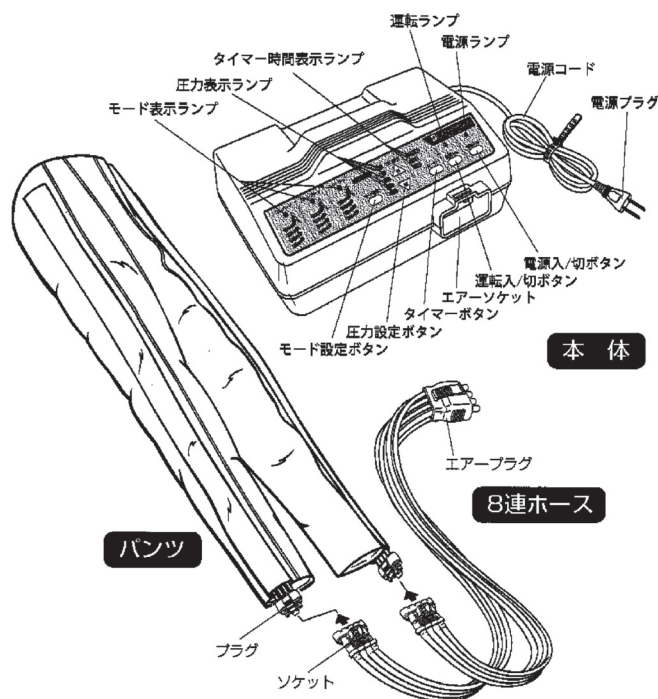

1. 構成

本体、8 連ホース、パンツ

2. 本体の寸法及び質量

高さ 155 x 幅 315 x 奥行き 222 (mm) 4.8 kg

※ 3. 電氣的定格

※ 【使用方法等】

使用に当たっては、機器に異常がないか確認してから使用してください。

1. 使用時間・使用頻度

1 回の使用時間：30 分以下、使用間隔：3 時間以上

2. 使用方法

- (1) 電源プラグを AC100V コンセントに差し込む。
- (2) 8 連ホースのソケットをパンツのプラグに接続する。
- (3) 8 連ホースのエアープラグを本体のエアーソケットに接続する。
- (4) パンツを被装着部に装着する。
- (5) 電源入/切ボタンで電源を入れる。
- (6) 運転入/切ボタンを押す毎に運転と停止ができるか確認する。
- (7) 運転入/切ボタンを押して運転させ、加圧・除圧の順番が末梢から中枢に向かっているか確認し停止させる。
- (8) モード設定ボタンでモードを選択する。
- (9) 圧力設定ボタンで圧力を選択する。
- (10) タイマーボタンで使用時間を選択する。
- (11) 運転を開始する。必要に応じて圧力の設定を変更する。途中で停止させる場合は、運転/停止ボタンを押す。

取扱説明書を必ずご参照ください。

(12) 終了したらパンツを外す。

(13) 電源を切り、電源プラグを電源コンセントから抜く。

【使用上の注意】

1. 次の人は必ず医師と相談のうえ使用してください。

- ・ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み形医用電気機器を使用している人
- ・心臓に障害のある人
- ・高血圧症と診断されている人
- ・悪性しゅよう(腫瘍)のある人
- ・糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
- ・体温 38℃以上(有熱期)の人(例：急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期。衰弱している時)
- ・骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性[とう(疼)痛性]疾患の人
- ・妊娠初期の不安定期または、出産直後の人
- ・安静を必要とする人
- ・特に身体に異常を感じている人
- ・皮膚の弱い人
- ・施療部位に疾患から生じるむくみや疼痛のある人
- ・施療部位に骨折、脱きゅう、肉ばなれ、ねんざ、創傷のある人
- ・上記以外の疾患で医師の治療を受けている人
- ・自覚症状の意思表示ができない人
- ・本機の使用によりかえって疼痛の増す人
- ・本機を使用しても症状の改善が見られない人

2. 使用環境及び使用条件

- ・ストーブなどの火気の近くで使用しないでください。
- ・浴室などの湿気の多い場所で使用しないでください。
- ・本体は使用中、操作できる所に置いてください。
- ・自分で、意思表示できない人に使わせないでください。
- ・子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところで使用しないでください。
- ・他の治療器と同時に使用しないでください。
- ・治療目的以外には使用しないでください。
- ・附属のパンツ以外は使用しないでください。

3. 使用前の注意事項

- ・初めて使用する場合、または、しばらく使用しなかった場合は、取扱説明書をよく読み、正常に作動するか確認してから使用してください。

・使用前に必ず圧力設定を「1」に設定してください。

・縫製品に破れがある場合は、使用しないでください。

・パンツを装着するときは、ズボンのポケットなどに物が入っていないことを確かめてください。[脚をけがしたり、パンツ破損の原因になります。]

・パンツは決められた部位に装着してください。[正しい部位に装着されていない場合は、身体に悪影響を及ぼしたり、事故の原因になります。]

・操作ボタンが正常に作動することを確認してください。

・電源コード、8 連ホースは容易に離脱しないよう、正しく確実に接続してください。

4. 使用中の注意事項

・身体に異常を感じたときは、直ちに使用を中止し、医師と相談してください。[使用を続けた場合、身体に悪影響を及ぼす原因になります。]

・本機に異常（発煙、手でさわれないほど熱い、音が急に大きくなった等）を感じたときは、直ちに使用を中止し電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

・30 分を超えての使用はしないでください。[筋肉に対して必要以上の刺激となります。] また、次の使用までには少なくとも 3 時間以上の間隔をあけてください。

・通常、圧力設定は「3」以下で使用してください。[特に肌の弱い方は、圧迫痕が残ることがあります。]

・高齢者の方は「ハイパーモード」で使用しないでください。また、圧力設定は「3」以下で使用してください。

・使用中にパンツのファスナーが開く場合は、ファスナーの破損であるので、すぐに使用を中止してください。[皮膚、ストッキング、ズボン等をはさむ恐れがあります。]

・使用中にパンツの加圧・除圧に異常を感じた場合（加圧が異常に長い。または、除圧しないなど）は、すぐに本体のエアースocketからエアープラグを抜き、パンツを外してください。また、本体は電源を切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。[使用を続けた場合、身体に悪影響を及ぼす原因になります。]

・使用中に停電した場合は、電源プラグを電源コンセントから抜き、エアープラグをエアースocketから抜いてください。

・使用中に立ち上がったたり、歩いたりしないでください。

5. 使用後の注意事項

・使用後は必ず電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

取扱説明書を必ずご参照ください。

- ・電源プラグを電源コンセントから抜く場合は、電源コードを持って引き抜かないでください。
- ・本体を保管するときは、電源コードを本体にまかないでください。[電源コードの接続部が断線し、火災や感電の原因になります。]
- ・本体およびパンツが汚れた場合は、蒸しタオルで拭いて良く乾かし、直射日光の当たる場所や湿気の高い場所を避けて保管してください。
- ・パンツおよび8連ホースは伸ばした状態かゆるく巻いた状態で保管してください。

【取扱い上の注意】

1. 取扱いを間違えると不具合を生じることがあるので、使用方法、使用上の注意等を厳守してください。
2. 消耗品及び寿命の終わった本体の廃棄に関しては、地域で定める条例に従って廃棄してください。

【保守・点検に係る事項】

1. 常に使用前後の点検を励行し、故障または異常が認められた場合には、販売店に点検修理を依頼してください。
2. 故障した場合は、勝手にいじらず、販売店に連絡してください。
3. 機器は、改造しないでください。

＊ ＊ 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 日東工器株式会社

〒146-8555 東京都大田区仲池上 2-9-4

TEL 03-3755-1111（代表）

FAX 03-3755-5294

製造元 栃木日東工器株式会社

取扱説明書を必ずご参照ください。