

ドクターメディラス MC-7500 の付属品 ショートパンツ

【警告】

- 次の人は、本機の使用を禁止します。
- ・ 医師からマッサージを禁じられている人
- (例：血栓(塞栓)症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など)
- ・ 発症後 6 ヶ月以内の下肢深部静脈血栓症を患っているか、もしくはその恐れのある場合。
- ※「下肢深部静脈血栓症」とは、下肢全体または膝より下が腫れ上がって痛みがあり、立ったり歩いたりすると痛みが強くなる自覚症状のあることをいいます。
- ・ 装着部におでき、やけど、虫さされなどの急性炎症や化膿性疾患がある場合。
 - ・ 本機の改造、分解、修理は絶対にしないでください。【事故の原因になります。】

【禁忌・禁止】


他の治療器と同時に使用しないでください。
[本機の効果が十分発揮できないばかりか、身体に悪影響を及ぼす原因になります。]

* 【形状・構造及び原理等】

ショートパンツ (消耗品)

ドクターメディラス本体に接続し、下半身に装着して下半身をマッサージします。①ショートパンツ(単体)と、②ショートパンツ用ホース(右・左)で構成されています。


①ショートパンツ(単体) ②ショートパンツ用ホース左

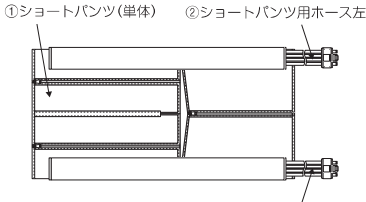

②ショートパンツ用ホース右

キューブ (消耗品)

ひざ、くるぶしの間にはさんで使用します。

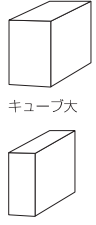


キューブ大

キューブ小


①ショートパンツ(単体) (消耗品)

ショートパンツは腹部用ファスナーと脚部用ファスナーを開閉して装着します。
下のイラストは、腹部用ファスナーを開いた状態のイメージです。

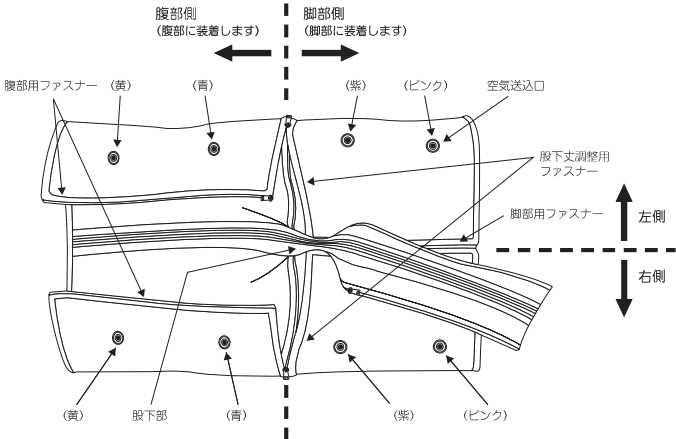

②ショートパンツ用ホース (右・左) (消耗品)

ショートパンツに空気を送り込む部品です。

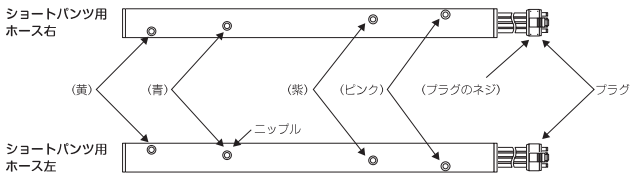

※ショートパンツ用ホース右：ニップルを上にした時、プラグのネジが見えます。
※ショートパンツ用ホース左：ニップルを上にした時、プラグのネジは見えません。

■寸法[mm]

ショートパンツ丈：880 【930】
股上：440
股下：440 【490】
ウェスト周囲：1100
裾周囲：1000
太もも周囲：600
ショートパンツ用ホース：1420

■重量[g]

ショートパンツ：470
ショートパンツ用ホース
(1 本)：400

※【】内の数値は、股下丈調整用ファスナーを開けたときの寸法値です。

* 性能及び安全性に関する規格

圧力設定範囲(kPa)	4.0～12.0
(mmHg)	30～90

* 【使用目的又は効果】

あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用する。

* 【使用方法等】

※ドクターメディラス MC-7500 の本体と組み合わせて使用します。
※本体の操作方法は、本体に付属の取扱説明書に記載の「使用の手順」および本体に付属の添付文書に記載の「使用方法等」をよく読み、正しく安全にお使いください。

(1)使用時間・使用頻度

1 回の使用時間：3 0 分以下
使用間隔：3 時間以上

(2)操作方法

- 1) 電源プラグを AC100V コンセントに差し込む。
- 2) ショートパンツ用ホースのプラグに 8 連ホースのソケットを接続します。
- 3) 8 連ホースのエアープラグを本体のエアーソケットに差し込みます。
- 4) ショートパンツを脚に装着し、キューブをひざ又はくるぶしの間にはさみます。
- 5) 運転入/切ボタンを押す毎に運転と停止ができるか確認します。
- 6) ウェーブモード、圧力「1」で、加圧・除圧の順番が末梢から中枢に向かっているか確認します。
- 7) 終了したら空気がよく抜けてからショートパンツを外します。
- 8) 電源を切り、電源プラグを電源コンセントから抜きます。

取扱説明書を必ずご参照ください。

【使用上の注意】

※本体に付属の取扱説明書に記載の「使用上の注意」をよく読み、正しく安全にご使用ください。

次の人は必ず医師と相談のうえ使用してください。

症状や病因によっては使用に適さない場合があります。

- ・ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
- ・悪性しゅよう(腫瘍)のある人
- ・心臓に障害のある人
- ・妊娠初期の不安定期又は出産直後の人
- ・糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
- ・皮膚に創傷のある人
- ・安静を必要とする人
- ・体温 38℃以上(有熱期)の人
(例：急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱している時。)
- ・骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、ねんざ(捻挫)、肉離れなど、急性[とう(疼)痛性]疾患の人
- ・本機を使用しても症状の改善が見られない人
- ・本機の使用によりかえって疼痛の増す人
- ・高血圧症と診断されている人
- ・特に身体に異常を感じている人
- ・皮膚の弱い人
- ・施療部位に疾患から生じるむくみや疼痛のある人
- ・施療部位に骨折、脱臼のある人
- ・自覚症状の意思表示ができない人
- ・上記以外の疾患で医師の治療を受けている人

(1) 使用環境及び使用条件

- ・子供は使用しないでください。また、幼児の手の届く場所で使用しないでください。[事故につながる場合があります。]
- ・子供を本体の上に乗せたり、本体の上で遊ばせたりしないでください。[事故につながる場合があります。]
- ・ストーブなどの火気の近くで使用しないでください。[火災・故障の原因になります。]
- ・浴室などの湿気の多い場所で使用しないでください。[故障・感電・火災の原因になります。]
- ・他の治療器と同時に使用しないでください。[本機の効果が十分発揮できないばかりか、身体に悪影響を及ぼす原因になります。]
- ・高齢者の方は「ハイパーモード」で使用しないでください。また、圧力設定は「3」以下で使用してください。[事故につながる場合があります。]
- ・同時に複数の人が使用しないでください。[事故につながる場合があります。]
- ・治療目的以外には使用しないでください。
- ・自分で、意思表示できない人に使わせしないでください。[事故につながる場合があります。]
- ・通常、圧力設定は「3」以下で使用してください。[特に肌の弱い方は、圧迫痕が残ることがあります。]
- ・本体は使用中、操作できる所に置いてください。[事故につながる場合があります。]

(2) 使用前の注意事項

- ・操作ボタン(タイマー、圧力、モード、運転 入/切)が正常に動作するか確認してからご使用ください。
- ・すべてのプラグ(電源プラグ、エアープラグ、プラグ)は容易に離脱しないよう正しく確実に接続してください。
- ・使用前に縫製品の破れの有無を点検し、破れがあるときは使用を中止してください。
- ・ショートパンツを装着するときは、被施療部のポケットなどに物が入っていないことを確かめてください。[けがをしったり、ショートパンツ破損の原因になります。]
- ・ファスナーは最後まできちんと閉めてください。[不完全ですと、ファスナーやショートパンツを破損する場合があります。]
- ・ショートパンツ装着の際、両脚を揃えた時、両脚が付く部位(ひざ又はくるぶし)の間には必ずキューブをはさんでください。(キューブは2種類あります。身体に合ったキューブを選んでください。両脚を揃えた時、くるぶしが付き、ひざの隙間が大きい場合は、くるぶしの間にキューブ大を、ひざの隙間が小さい場合は、くるぶしの間にキューブ小をはさんでください。また、両脚を揃えた時、ひざが付き、くるぶしの隙間が大きい場合は、ひざの間にキューブ大を、くるぶしの隙間が小さい場合は、ひざの間にキューブ小をはさんでください。)[キューブをはさまずに使用すると、身体に悪影響を及ぼす原因になります。]
- ・股下丈調整用ファスナーを開けて使用する場合は、左右共に開けてください。閉めて使用する場合は、左右共に閉めてください。[片方だけ開けた状態で使用すると、正しいマッサージ効果を得られません。]
- ・ショートパンツは、腹部側および脚部側(右側・左側)を間違えないよう正しく装着してください。[正しい部位に装着されていない場合は、正しいマッサージ効果を得られません。]
- ・ショートパンツは指定の部位(腹部・脚部)以外に装着しないでください。[指定の部位以外に装着した場合、重大な事故に繋がることがあります。]
- ・ホースは折れたり潰れたりした状態で使用しないでください。[加圧・除圧が正常に行われず身体に悪影響を及ぼす原因になります。]
- ・使用前に必ず設定圧力を「1」に設定してください。[事故につながる場合があります。]
- ・ショートパンツ用ホースをショートパンツに接続する場合は、ニップルを空気送込口に色を合わせて接続してください。[誤った接続方法では、正しい加圧順序にならず、血行を妨げ、身体に悪影響を及ぼす原因になります。(安全装置が作動し、自動停止することがあります。)]

(3) 使用中の注意事項

- ・身体に異常を感じたときは、直ちに使用を中止し、医師と相談してください。[使用を続けた場合、身体に悪影響を及ぼす原因になります。]
- ・30分を超えての使用はしないでください。また、次の使用までには少なくとも3時間以上の間隔をあけてください。[筋肉に対して必要以上の刺激となります。]

取扱説明書を必ずご参照ください。

- ・使用中にショートパンツのファスナーが開く場合はファスナーの破損です。すぐに使用を中止し、修理または新品のショートパンツをお求めください。【皮膚、衣類等をはさむ恐れがあります。】
- * ・使用中にショートパンツの加圧・除圧に異常を感じた場合(加圧が異常に長い、または、除圧しない等)はすぐに本体のエアースケットからエアープラグを抜き、ショートパンツを被装着部から外してください。また、本体は電源を切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。この場合には、「使用方法等」にしたがって、電源プラグを電源コンセントに差し込むところから始めてください。それでもなお異常がある場合には、お買い上げの窓口に点検を依頼してください。【異常がある状態で使用を続けた場合、身体に悪影響を及ぼす原因になります。】
- ・使用中に立ち上がったたり、歩いたりしないでください。【事故につながる場合があります。】

(4) 使用後及び保管の注意事項

- ・ショートパンツおよびキューブが汚れた場合は、蒸しタオルで拭いて、良く乾かし、直射日光の当たる場所や湿度の高い所を避けて保管してください。
- ・ショートパンツは、伸ばした状態か、ゆるく巻いた状態で保管してください。
- ・ホースおよびショートパンツは折り曲げたり、重い物を載せたりした状態で保管しないでください。【ホースに折れや潰れ癖がつくと、加圧・除圧が正常に行われず身体に悪影響を及ぼす原因になります。】
- ・針や刃物でホースやショートパンツに傷を付けないでください。【事故や故障の原因になります。】

【取扱い上の注意】

- (1) 取扱いを間違えると不具合を生じることがありますので、使用方法、使用上の注意等を厳守してください。
- (2) 廃棄に関しては地域で定める条例に従って廃棄してください。

【保守・点検に係る事項】

- (1) 常に使用前後の点検を励行し、故障又は異常が認められた場合には、販売店または製造販売元に点検・修理を依頼してください。
- (2) 故障した場合は勝手にいじらず、販売店に連絡してください。
- (3) 機器は、改造しないでください

* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 日東工器株式会社
住 所 〒146-8555
東京都大田区仲池上 2-9-4
電 話 03-3755-1111 (代表)
F A X 03-3755-5294

製 造 元 栃木日東工器株式会社

取扱説明書を必ずご参照ください。

