

類別：機械器具 77 バイブレーター

管理医療機器 一般の名称：家庭用エアマッサージ器(JMDNコード 34663000)

エクセレントメドマー EXM-12000、
＊ エクセレントメドマー EXM-12000A の付属品
ブーツ、アームバンド

【警告】

次の人は、本機の使用を禁止します。

- ・ 医師からマッサージを禁じられている人
(例：血栓(塞栓)症、重度の動脈リゅう(瘤)、急性静脈リゅう(瘤)、
各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など)

- ・ 発症後 6 ヶ月以内の下肢深部静脈血栓症を患っているか、
もしくはその恐れのある場合。

※「下肢深部静脈血栓症」とは、下肢全体または膝より下が腫れ
上がって痛みがあり、立ったり歩いたりすると痛みが強くなる
自覚症状のあることをいいます。

- ・ 装着部におでき、やけど、虫さされなどの急性炎症や化膿性疾患
がある場合。

本機の改造、分解、修理は絶対にしないでください。【事故の原因に
なります。】


【禁忌・禁止】

他の治療器と同時に使用しないでください。

【本機の効果が十分発揮できないばかりか、身体に悪影響を及ぼ
す原因になります。】

＊ ＊ 【形状・構造及び原理等】

ブーツ(材質：ナイロン)

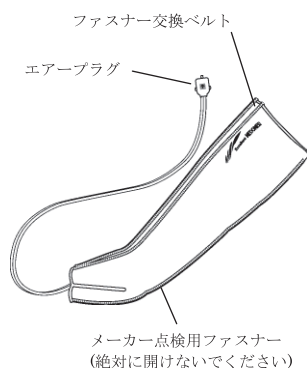

寸法[mm]

ブーツ丈：800

ふくらはぎ部周長：460

下腿部周長：680

質量：1.2 kg

アームバンド(材質：ナイロン)



寸法[mm]

アームバンド丈：710

指先部周長：320

上腕部周長：460

質量：0.9kg

＊ ＊ 【使用目的又は効果】

- ・ 血行促進
- ・ 疲労回復
- ・ 筋肉の疲れ、こりをほぐす

＊ ＊ 【使用方法等】

＊ エクセレントメドマー EXM-12000、またはエクセレントメドマ
ーEXM-12000A と組み合わせて使用します。

(1)使用時間・使用頻度

1 回の使用時間：30 分以下

使用間隔：3 時間以上

(2)操作方法

- 1) ブーツ(アームバンド)のエアープラグを本体のエアーソケット
に差し込みます。
- 2) ブーツ(アームバンド)を脚(腕)に装着します。
- 3) 運転/停止ボタンを押して運転と停止ができるか確認をします。
- 4) ウェーブモード、圧力「1」で、加圧・除圧の順番が末梢から
中枢に向かっているか確認します。

【使用上の注意】

次の人は必ず医師と相談のうえ使用してください。症状や病因に
よっては使用に適さない場合があります。

- ・ ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み
型医用電気機器を使用している人
 - ・ 悪性しゅよう(腫瘍)のある人
 - ・ 心臓に障害がある人
 - ・ 妊娠初期の不安定期または、出産直後の人
 - ・ 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
 - ・ 皮膚に創傷のある人
 - ・ 安静を必要とする人
 - ・ 体温 38℃以上(有熱期)の人
(例：急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い
時期。衰弱している時)
 - ・ 骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、ねんざ(捻挫)、
肉離れなど、急性[とう(疼)痛性]疾患の人
 - ・ 本機を使用しても症状の改善が見られない人
 - ・ 本機の使用によりかえって疼痛の増す人
 - ・ 高血圧症と診断されている人
 - ・ 特に身体に異常を感じている人
 - ・ 皮膚の弱い人
 - ・ 施療部位に疾患から生じるむくみや疼痛のある人
 - ・ 施療部位に骨折、脱きゅうのある人
 - ・ 自覚症状の意思表示ができない人
 - ・ 上記以外の疾患で医師の治療を受けている人
- ＊ 腱鞘炎の人(アームバンド使用時に限る)

(1)使用環境及び使用条件

- ・ ストープなどの火気の近くで使用しないでください。[火災・故障の原因になります。]
- ・ 浴室などの湿気の多い場所で使用しないでください。[故障・感電・火災の原因になります。]
- ・ 自分で意思表示できない人に使わせしないでください。[事故につながる可能性があります。]
- ・ 子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところで使用しないでください。[事故につながる可能性があります。]
- ・ 他の治療器と同時に使用しないでください。[本機の効果が十分発揮できないばかりか、身体に悪影響を及ぼす原因になります。]
- ・ 治療目的以外には使用しないでください。
- ・ ブーツとアームバンドを同時に使用しないでください。[事故につながる可能性があります。]
- ・ アームバンドは 2 本同時(両腕)に使用しないでください。[事故につながる可能性があります。]
- ・ マイクロ波治療器のアプリケーションからは 1.5 メートル以上離してご使用ください。[事故や故障の原因になります。]

(2)使用前の注意

- ・ 初めて使用する場合、または、しばらく使用しなかった場合は、取扱説明書をよく読み、正常に作動するか確認してからご使用ください。
- ・ 使用前に縫製品の破れの有無を点検し、破れがあるときは使用を中止してください。
- ・ ブーツを装着するときは、施療部の衣類のポケットなどに物が入っていないことを確かめてください。[脚をけがしたり、ブーツの破損の原因になります。]
- ・ アームバンドを装着するときは、腕時計や指輪などを身につけていないことを確かめてください。[腕をけがしたり、アームバンド破損の原因になります。]
- ・ ブーツは脚に、アームバンドは腕に装着してください。[正しい部位に装着されていない場合は、身体に悪影響を及ぼしたり、事故の原因になります。]
- ・ エアープラグは正しく確実に接続してください。
- ・ ホースは折れたり潰れたりした状態で使用しないでください。[加圧・除圧が正常に行われず身体に悪影響を及ぼす原因になります。]
- ・ ブーツ(アームバンド)は踏みつけたり投げたりしないでください。[ブーツ(アームバンド)内部に取付けられている電磁弁により足裏を負傷したり、電磁弁やブーツ(アームバンド)の破損の原因になります。]
- ・ メーカー点検用ファスナー(ブーツ(アームバンド)背面のファスナー)は開けないでください。
- ・ 針や刃物でホースやブーツ(アームバンド)に傷を付けないでください。[事故や故障の原因になります。]

(3)使用中の注意

- ・ 身体に異常を感じたときは、直ちに使用を中止し、医師と相談してください。[使用を続けた場合、身体に悪影響を及ぼす原因になります。]
- ・ 30 分を超えての使用はしないでください。[筋肉に対して必要以上の刺激となります。] また、次の使用までには少なくとも 3 時間以上の間隔をあけてください。
- ・ 使用中にブーツ(アームバンド)のファスナーが開く場合は、ファスナーの破損です。すぐに使用を中止してください。[皮膚、衣類等をはさむ恐れがあります。]
- ・ 使用中に立ち上がったたり、歩いたりしないでください。[事故につながる可能性があります。]
- ・ 使用中にブーツ(アームバンド)の加圧・除圧に異常を感じた場合(加圧が異常に長い、または、除圧しない等)は、すぐに本体のエアーソケットからエアープラグを抜き、ブーツ(アームバンド)を脚(腕)から外してください。[使用を続けた場合、身体に悪影響を及ぼす原因になります。]

(4)使用後及び保管の注意事項

- ・ ホース及びブーツ(アームバンド)は折り曲げたり、重い物を載せたりした状態で保管しないでください。[ホースに折れや潰れ癖がつくと、加圧・除圧が正常に行われず身体に悪影響を及ぼす原因になります。また、ホース及びブーツ(アームバンド)内にあるケーブルの断線の原因になります。]
- ・ 直射日光の当たる場所や湿気の高いところを避けて保管してください。
- ・ ブーツ(アームバンド)およびブーツ(アームバンド)に取付けられているホースは、伸ばした状態か、ゆるく巻いた状態で保管してください。
- ・ ブーツ(アームバンド)が汚れた場合は、蒸しタオルで拭いて、良く乾かしてください。

【取扱い上の注意】

- (1) 取扱いを間違えると不具合を生じることがありますので、使用方法、使用上の注意等を厳守してください。
- (2) 廃棄に関しては、地域で定める条例に従って廃棄してください。

【保守・点検に係わる事項】

- (1) 常に使用前後の点検を励行し、故障又は異常が認められた場合には、販売店または製造販売元に点検修理を依頼してください。
- (2) 故障した場合は、勝手にいじらず、販売店または製造販売元に連絡してください。
- (3) 機器は、改造しないでください。

＊ ＊ 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元	日東工器株式会社
住 所	〒146-8555 東京都大田区仲池上 2-9-4
電 話	03-3755-1111
F A X	03-3755-5294
製 造 元	栃木日東工器株式会社