

類別：機械器具77 バイブレーター
管理医療機器 一般的名称：家庭用エアマッサージ器(JMDN コード34663000)

「ドクターメドマー DM-4S」の付属品

(カフ、ホース、ファスナー交換ベルト、電源コード、ファスナータブ、Lサイズベルト)

【警告】

次の人は、本機の使用を禁止します。

- ・医師からマッサージを禁じられている人。

(例：血栓(塞栓)症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、
各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など)

- ・発症後 6ヶ月以内の下肢深部静脈血栓症を患っているか、もしくはその恐れのある場合。

※「下肢深部静脈血栓症」とは、下肢全体または膝より下が腫れ上がって痛みがあり、立ったり歩いたりすると痛みが強くなる自覚症状のあることをいいます。

- ・装着部におでき、やけど、虫さされなどの急性炎症や化膿性疾患がある場合。

- ・本機の改造、分解、修理は絶対にしないでください。

[事故の原因になります。]


【禁忌・禁止】

他の治療器と同時に使用しないでください。


[本機の効果が発揮できないばかりか、身体に悪影響を及ぼす原因になります。]

【形状・構造及び原理等】


＜形状＞

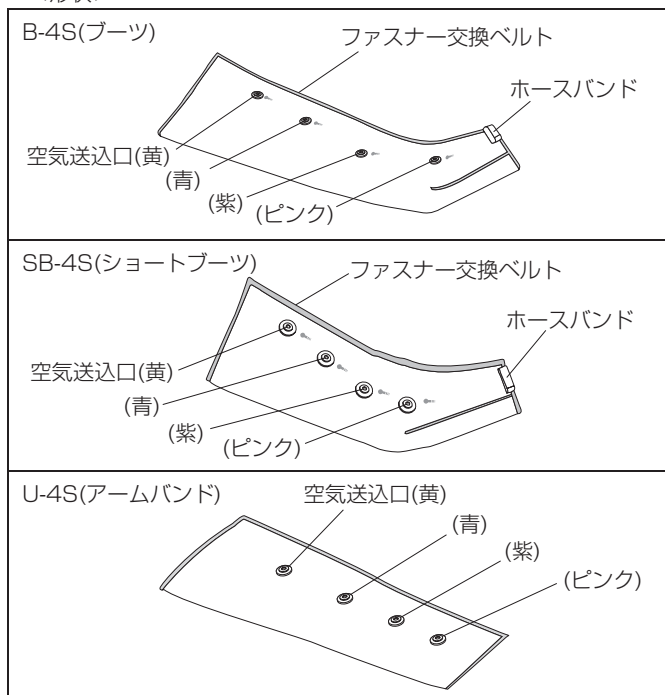


SP-4S(ショートパンツ)

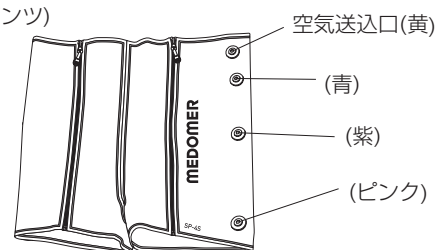


HB-4S(ブーツ用ホース)

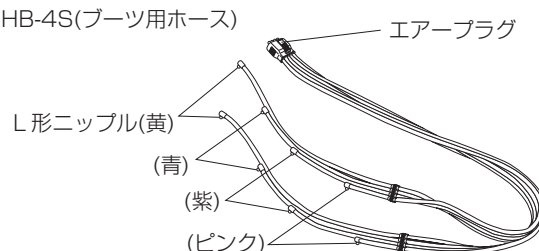


HSB-4S(ショートブーツ用ホース)

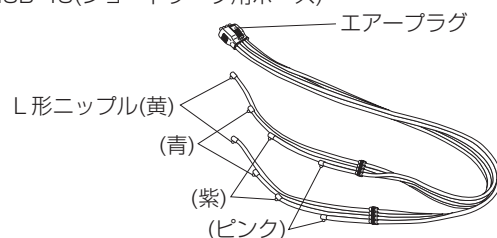


HU-4S(アームバンド用ホース)

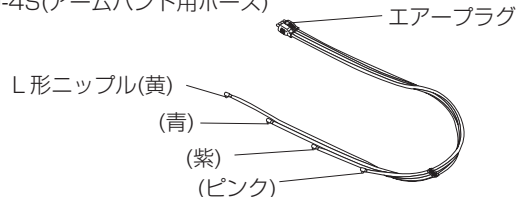

HSP-4S(ショートパンツ用ホース)

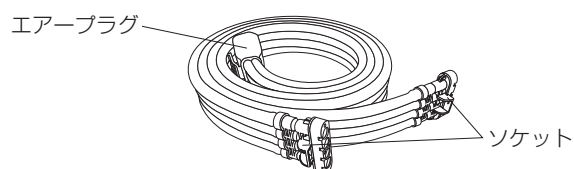

HBSG-4S(ブーツシングル用ホース)

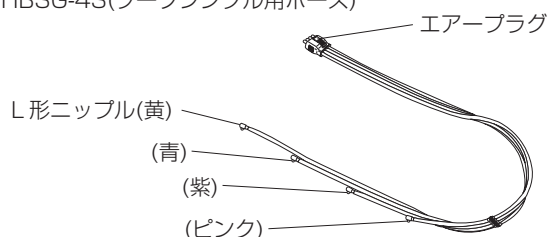

取扱説明書を必ずご参照ください。

SHRSP-4S(SP用ショートホース 右) (ピンク) (紫) プラグ T形ニップル(黄) (青)	
SHLSP-4S(SP用ショートホース 左) (紫) (ピンク) (青) プラグ T形ニップル(黄)	
Z-4S (B-4S用ファスナー交換ベルト)	ZSB-4S (SB-4S用ファスナー交換ベルト)
CAB100L(電源コード)	ZT-4S(ファスナータブ)
YB-4S(Lサイズベルトブーツ用)	YSB-4S (Lサイズベルトショートブーツ用)
YU-4S (Lサイズベルトアームバンド用)	YSP-4S (Lサイズベルトショートパンツ用)

<DM-6000との互換性>

	DM-6000	DM-4S
B-4S(ブーツ)	○	○
SB-4S(ショートブーツ)	○	○
U-4S(アームバンド)	○	○
SP-4S(ショートパンツ)	×	○
HB-4S(ブーツ用ホース)	○	○
HSB-4S(ショートブーツ用ホース)	×	○
HU-4S(アームバンド用ホース)	○	○
HSP-4S(ショートパンツ用ホース)	×	○
HBSG-4S(ブーツシングル用ホース)	○	○
SHRSP-4S(SP用ショートホース 右)	×	○
SHLSP-4S(SP用ショートホース 左)	×	○
Z-4S(B-4S用ファスナー交換ベルト)	○	○
ZSB-4S(SB-4S用ファスナー交換ベルト)	○	○
CAB100L(電源コード)	○	○
ZT-4S(ファスナータブ)	○	○
YB-4S(Lサイズベルトブーツ用)	○	○
YSB-4S(Lサイズベルトショートブーツ用)	○	○
YU-4S(Lサイズベルトアームバンド用)	○	○
YSP-4S(Lサイズベルトショートパンツ用)	×	○

【使用上の注意】

次の人は必ず医師と相談のうえ使用してください。

症状や病因によっては使用に適さない場合があります。

- ・ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
- ・心臓に障害がある人
- ・高血圧症と診断されている人
- ・悪性しゅよう(腫瘍)のある人
- ・糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
- ・体温38℃以上(有熱期)の人
(例：急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期にある人。衰弱している人)
- ・骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性[とう(疼)痛性]疾患の人
- ・妊娠初期の不安定期または、出産直後の人
- ・安静を必要とする人
- ・特に身体に異常を感じている人
- ・皮膚の弱い人
- ・施療部位に疾患から生じるむくみや疼痛のある人
- ・施療部位に骨折、脱きゅう、肉ばなれ、ねんざ、皮膚に創傷のある人
- ・上記以外の疾患で医師の治療を受けている人
- ・自覚症状の意思表示ができない人
- ・本機の使用によりかえって疼痛の増す人
- ・本機を使用しても症状の改善が見られない人
- ・腱鞘炎の人(アームバンド使用時に限る)
- ・椎間板ヘルニア・腰椎すべり症・脊柱管狭窄症・変形性腰椎症・おしり周りの急性炎症・急性臀部痛・梨状筋症候群・坐骨神経痛の人(ショートパンツ使用時に限る)

(1) その他の注意事項

- ・アームバンドは2本同時(両腕)に使用しないでください。
[事故につながる場合があります。]
- ・針や刃物でホースやカフに傷を付けないでください。
[事故や故障の原因になります。]
- ・L形ニップル(T形ニップル)と空気送込口の色は合わせて接続してください。色違いで接続すると正しい加圧順序にならず血行を妨げ、身体に悪影響を及ぼす原因になります。
- ・ショートパンツを使用する場合、ウエスト周囲が100cmを超える方はLサイズベルト(別売品)をお求めの上ご使用ください。
[事故につながる場合があります。]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 日東工器株式会社

〒146-8555 東京都大田区仲池上2-9-4

TEL 03-3755-1111(代表)

FAX 03-3755-5294

製造元 栃木日東工器株式会社

LQ08188-0

取扱説明書を必ずご参照ください。