


医療用品 6 視力表及び色盲検査表

一般医療機器 視力表 (16800000)

システムチャート SC-1600

【形状・構造及び原理等】

本装置には、標準仕様タイプ (SC-1600) と偏光機能を搭載したタイプ (ペットネーム:SC-1600 Pola) の 2 つのタイプがあります。SC-1600 Pola では、偏光フィルターを用いて立体視検査等の両眼視機能検査を行います。SC-1600 では、赤色/緑色フィルターあるいはプリズムを用いて同様の検査を行います。

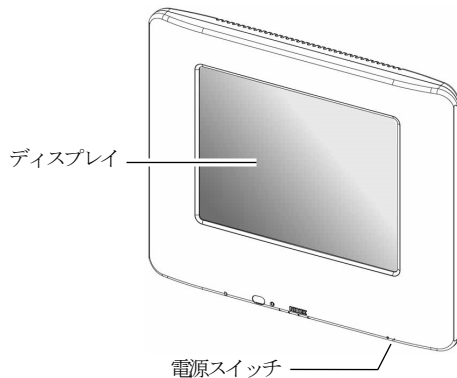

1. 構成

各構成部品は単体または任意の組み合わせで出荷されます。

基本構成(標準仕様タイプ:SC-1600)

本体、電源コード、壁掛け金具、木ネジ(4 本)、取扱説明書、位置合わせ用紙、2P/3P 変換プラグ

基本構成(偏光機能付タイプ:SC-1600 Pola)

本体、電源コード、壁掛け金具、木ネジ(4 本)、傾斜アダプター、ネジ(4 本)、取扱説明書、位置合わせ用紙、2P/3P 変換プラグ、偏光メガネ

オプション

リモコン、RT 用通信ケーブル、フロアスタンド、テーブルスタンド、レッドグリーンメガネ、プリズムメガネ、反射ミラー

2. 電氣的定格

電源: AC100~240V、50/60Hz、100VA

3. 機器の分類

電撃に対する保護の形式: クラス I 機器

4. 寸法及び質量

寸法: 520mm (W) × 47mm (D) × 455mm (H)

質量: 5kg

5. 作動・動作原理

本装置は、視標形状のデータを内部に保存しており、そのデータをもとに内蔵の LCD ディスプレイに視標を表示します。

表示する視標は、レフラクターのコントロールボックスまたはオプションのリモコンのボタンで指定します。

また、視標輝度を落とし、薄明時の視力を確認ができる夜間機能を備えています。

【使用目的又は効果】

使用目的

視力検査に用いる視力表

【使用方法等】

1. 環境条件

温度: +10~+35℃

湿度: 30~90% (結露なきこと)

気圧: 800~1060hPa

2. 使用方法

基本的な操作は(1)→(2)→(3)→(4)の流れとなります。

(1) 起動

(1)-1. 電源コードを確実にコンセントに接続します。

(1)-2. 本体の電源スイッチを ON にします。

(1)-3. 始業点検を行います。

(2) 準備

被検者は装置から検査距離だけ離れ、視標を視認します。

(3) 検査

必要な設定を行い、検査を行います。

(4) 終了

(4)-1. 電源スイッチを OFF にします。

(4)-2. 電源コードをコンセントから外します。

(4)-3. 次回の使用に支障がないように、清潔な状態で保管します。

詳細は装置付属の取扱説明書【第 1 章】、【第 2 章】、【第 3 章】、【第 4 章】を参照のこと。

**【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

・検査に先立ち、検査の目的、方法について十分に説明すること。

取り扱い

・ディスプレイに傷が付いたり、指紋、ホコリ、その他で汚れないようにすること。[検査結果の信頼性が低下する恐れがある。]

** 2. 相互作用 (他の医薬品・医療機器等との併用に関すること)

併用注意 (併用に注意すること)

・構成部品は、必ず(株)ニデック指定の物を使用すること。[電子化された添付文書および取扱説明書の範囲外の使用により予期せぬ不具合・有害事象が発生する恐れがある。]

3. 移動及び設置等の注意

・壁に掛ける場合は、付属の金具を用い、本体の重量を支えられる丈夫な壁に取り付けること (石膏ボードや薄い板壁に掛けないこと)。[落下、転倒により怪我および故障の恐れがある。]

・装置がその使用中に強い電磁場にあふることがない場所に設置すること。

取扱説明書を必ずご参照ください。

システムチャート SC-1600 電子添文
34607-P941-E2

- ・装置の運搬時は、電源コードを装置につけたまま引きずらないこと。[装置を落下させて、怪我および故障になる恐れがある。]

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管の条件（非包装状態）

温度 : -10～+55 ℃
湿度 : 20～90%（結露のないこと）
気圧 : 700～1060 hPa

2. 耐用期間

新規購入日から8年 [自己認証による]

3. 貯蔵・保管

- ・水のかからない場所に保管すること。
- ・直射日光や湿度の高い環境を避け、室温にて保管すること。
- ・清潔で乾燥した場所に、荷重の掛からない状態で保管すること。
- ・化学薬品、有機溶剤の保管場所や腐食性ガスの発生する場所には保管しないこと。
- ・空気中に塩分、イオウ分、多量のホコリを含む場所には保管しないこと。
- ・振動、衝撃が加わらず、傾斜のない場所に保管すること。
- ・装置が結露しないようにすること。

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

- ・万一装置が故障した場合は、電源コードをコンセントから抜き、装置の内部に触れないで、(株)ニデックまたは購入先まで連絡すること。
- ・ディスプレイの清掃は、脱脂綿か柔らかい布で軽く拭くこと。
- ・しばらく使用しなかった機器を再使用する時には、使用前に必ず機器が正常かつ安全に作動することを確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 株式会社ニデック
電話番号 : 0533-67-6151(代)