


機械器具 81 磁気治療器
管理医療機器 家庭用永久磁石磁気治療器(71016000)

マグボーイ

【禁忌・注意】

磁気及び電磁傷害で影響を受けやすい、次の体内植込み型医用機器を使用している人は使用しないでください。
・ペースメーカー、脳脊髄液短絡術用圧可変式シャントなど

【形状・構造及び原理】

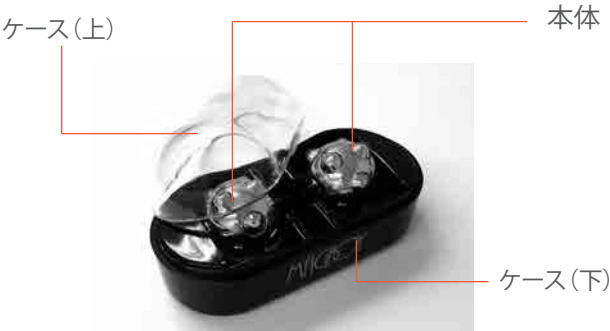

構成	本体:2個 ケース上下:1セット
寸法	本体: 径28mm 突起2.5mm
磁束密度	85mT
使用目的	一般家庭での磁気治療に使用すること
効能効果	装着部位のこり、血行
原理	本体2個を握り、手のひらで回転させ治療します。指先や手のひらを磁気および、突起により刺激し、こり、血行を良くします。

【操作方法又は使用方法等】

本品に異常がないか確認してからご使用ください。

1. 使用方法

本体2個を掌内(手のひら)で握ったり、指を使って動かしながらご使用ください。

2. お手入れ方法

汚れた場合は、タオルや布等でふき取ってください。

3. 保管方法

直射日光・高温多湿になる所は避けて、ケースに入れて保管してください。

【使用上の注意】

警告 ⚠

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 磁気及び電磁傷害で影響を受けやすい、次の体内植込み型医用機器を使用している人は使用しないでください。
・ペースメーカー、脳脊髄液短絡術用圧可変式シャントなど

注意 ⚠

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 医師の治療を受けている人や下記の人は必ず医師とご相談のうえで使用ください。
 - (1) 電磁傷害の影響を受けやすい体内植込み型医用機器を使用している人
 - (2) 磁気影響を受ける可能性のある医用機器を使用している人
 - (3) 悪性腫瘍のある人
 - (4) 心臓に傷害がある人
 - (5) 妊娠初期の不安定期または出産直後の人
 - (6) 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
 - (7) 皮膚に異常(感染症、創傷など)のある人
 - (8) 安静を必要とする人
 - (9) 体温38℃以上(有熱期)の人
 - (10) 捻挫、肉離れなど、急性(疼痛性)疾患の人
- お子様が手にした時は、口に入れたり、遊びの道具にしないよう十分ご注意ください。

1. 頭部に使用しないでください。

2. ご使用前には次のことにご注意ください。

- (1) 時計、磁気カードなどの磁気の影響を受けるものは近づけないでください。
- (2) しばらく使用しなかったときには、表面に金属などの異物が吸引付着していないことを確認してください。

3. ご使用中には次のことにご注意ください。

- (1) 身体に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。
- (2) 発疹、発赤、かゆみなどの症状が現れた場合は、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。
- (3) 本品に故障が発見された場合は、使用を直ちに中止してください。
- (4) 磁気共鳴画像診断装置(MRI)の検査を受ける人は、検査の前に使用を中止してください。

4. ご使用後及び保管には次のことにご注意ください。

- (1) 使用しても効果が現れない場合は、医師または専門家に相談してください。
- (2) 高温・多湿・直射日光を避けてください。
- (3) 本品を廃棄する時には、お住まいの市町村の廃棄方法に従ってください。

5. 本品の取扱いには次のことにご注意ください。

- (1) 本品の分解や、改造はしないでください。
- (2) 本品の乱暴な取扱いはしないでください。損傷の原因になります。
- (3) 他の治療器との併用は避けてください。

【包装】

1梱包に本体:2個、ケース上下:1セット、取扱説明書1枚(本紙)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者名:株式会社N I K K E N

住所: 福岡県福岡市中央区天神1-13-17

お問い合わせ先: お客様相談窓口 0120-777-849

製造業者: 株式会社N I K K E N九州工場

MAGBOY

マグボーイ[®]ゴールド

取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください

磁気治療器「マグボーイ」は、指先や手のひらを、磁気および、突起により刺激し、こり、血行をよくします。
いつでも、どこでも簡単にご使用になれます。



家庭用永久磁石磁気治療器
管理医療機器承認番号 61B-1833


効能 効果	装着部位の こり、血行
----------	----------------

磁束 密度	85mT
----------	------

1 ケースからの取り外し方



①透明ケース(上)の中央取手部分を持ち、引き上げてください。

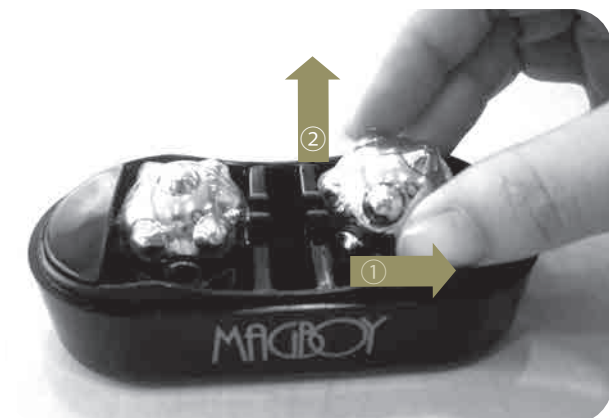

②本体を外側に押しながら上に引き上げて外してください。

2 マグボーイの使い方




マグボーイ2個を手のひらのなかで軽く握り、磁気突起によりマッサージしてください。



手のひらのなかで、2個のマグボーイを握り5本の指を使ってクルクル回転させてください。

3 収納

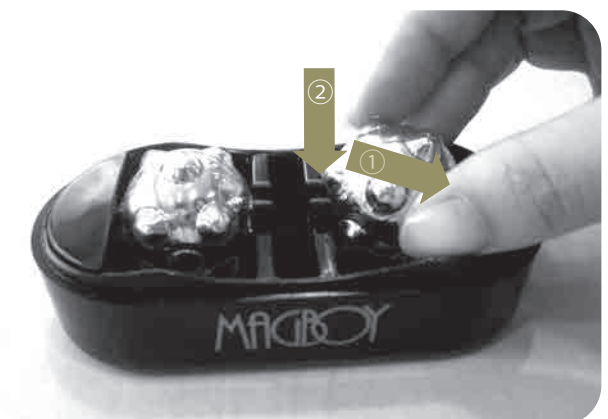

ご使用後は、ケース内部側面のくぼみへ本体突起部をはめ込み収納してください。

お問い合わせ



株式会社

NIKKEN

〒810-0001

福岡市中央区天神1-13-17

お客様相談窓口

0120-777-849

土・日・祝日を除く 9:00~17:00