

機械器具 81 磁気治療器
管理医療機器 家庭用永久磁石磁気治療器 (JMDNコード:71016000)

マグビアン® 21

【禁忌・禁止】

磁気及び電磁障害で影響を受けやすい医用電気機器及び体内植込み型医用電気機器を使用している人は使用しないこと。(ペースメーカー、脳脊髄液短絡術用圧可変式シャントなど)

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

- 本体 : 30粒 (10粒入×3袋)
- 貼りかえ用絆創膏 : 10枚
- 取扱説明書 (添付文書): 1部

2. 商品仕様


- 寸法 磁石: 8.3×2.6mm
絆創膏: 23mm

3. 性能

- 最大磁束密度: 75mT

4. 動作原理

- 磁石から発生する磁力線を人体に浸透させて治療します。

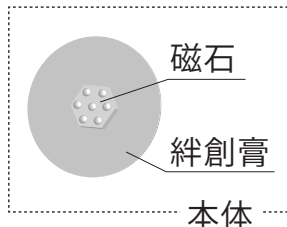

【使用目的又は効果】


- 一般家庭での磁気治療に使用する。
装着部位のこり及び血行の改善。

【使用方法等】

ご使用に当たっては、取扱説明書をよくお読みになってご使用ください。
また、機器に異常がないか確認してからご使用ください。

1. 使用方法

(ア) 本体を台紙から取り外してください。

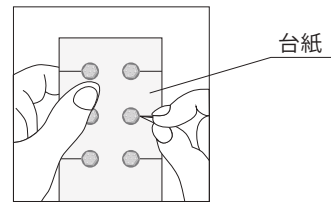


(イ) 肩・首すじ・腰・足など、コリのある部位に1粒ずつ貼り付けしてください。

(ウ) コリのある部位の汗や汚れを拭き取り、清潔にしてから貼り付けしてください。


(エ) 少なくとも2～3日毎にお取りかえください。同一部位に新しく貼り付けする場合は、貼付部位を消毒用エタノールか水で拭き、清潔にした後に貼り付けしてください。

2. 貼りかえ用絆創膏の使い方


(ア) マグネットを貼る部分の円形の台紙を指先ではがします。

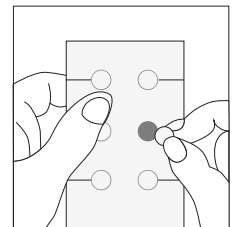

(イ) 台紙をはがした円形部分にマグネットを貼りつけます。

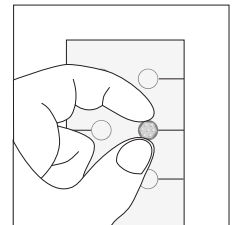

(ウ) マグネットを絆創膏にぴったりフィットさせ、本体を台紙から取り外してください。

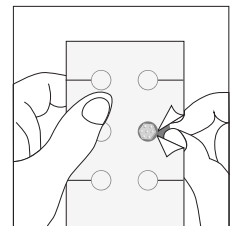

【使用上の注意】

1. 医師の治療を受けている人や下記の人には必ず 医師と相談のうえご使用ください。

- (ア) 悪性腫瘍のある人
- (イ) 心臓に障害のある人
- (ウ) 妊娠初期の不安定期または出産直後の人
- (エ) 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
- (オ) 皮膚に異常(感染症、創傷など)のある人
- (カ) 安静を必要とする人
- (キ) 体温38℃以上(有熱期)の人
 - ・急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期。
 - ・衰弱しているとき
- (ク) 捻挫、肉離れなど、急性(疼痛性)疾患の人

2. 頭部には使用しないでください。

3. 使用しても効果が現れない場合、医師または 専門家に相談してください。

4. ご使用前には次のことにご注意ください。

- (ア) 時計、磁気カードなど磁気の影響を受けるものには近づけないでください。
- (イ) しばらく使用しなかったときには、表面に金属などの異物が吸引付着していないことを確認してください。

5. ご使用中には次のことにご注意ください

- (ア) 身体に異常を感じたときは、使用を直ちに中止してください。
- (イ) 装着部に発疹、発赤、かゆみなどの症状が現れた場合は、使用を直ちに中止してください。
- (ウ) 万一磁石を飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。
- (エ) 皮膚の弱い人は同一部位に続けて使用しないでください。
- (オ) 入浴中は貼っている部位を強くこすらないでください。
- (カ) 磁気共鳴画像診断装置(MRI)の検査を受ける人は、検査の前に使用を中止してください。

【保管方法及び有効期間等】

- (ア) 小児および監督を必要とする人の手の届かない場所に保管してください。
- (イ) 高温・多湿・直射日光を避けて保管してください。
- (ウ) 本品を廃棄するときには、お住まいの市町村の廃棄方法に従ってください。

【取扱い上の注意】

- (ア) 本品の分解や改造はしないでください。
- (イ) 本品の乱暴な取扱いはしないでください。
- (ウ) 他の治療器と同時に使用しないでください。

【保守・点検に係る事項】

ご使用に際し、異物の付着等がないかご確認の上ご使用ください。常に使用前後の点検を励行し、本品に異常が発見された場合にはすぐに使用を中止し、当社お客様相談窓口までご連絡ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名 又は名称等】

製造販売業者名：株式会社N I K K E N

電 話：092-714-1721

お問い合わせ先：株式会社N I K K E N お客様相談窓口

電 話：0120-777-849

受 付 時 間：平日9:00～17:00

製 造 業 者：ファミリー・サービス・エイコー株式会社

血行を良くし、コリをほぐす
ピンポイント治療器

家庭用永久磁石磁気治療器

マグビアン[®]21



ご使用になる前に必ずこの「添付文書／取扱説明書」をお読みいただき、安全に正しくご使用ください。お読みになった後も、いつでも見られる場所に大切に保管してください。

下図「コリのポイント」を参考にコリのある箇所には貼ると効果的です。

コリのポイント

