

ネタロー®デラックス

【禁忌・禁止】

磁気及び電磁障害で影響を受けやすい医用電気機器及び体内植込み型医用電気機器を使用している人は使用しないこと。(ペースメーカー、脳脊髄液短絡術用圧可変式シャントなど)


【形状・構造及び原理等】

1. 構成

○本体 : 1個 ○取扱説明書(添付文書): 1枚

2. 商品仕様

寸法	600×340×110(低い方100)mm
重量	1.25kg
磁石(強/弱)	48個(32/16個)
本体カバー(側生地)	綿 100%

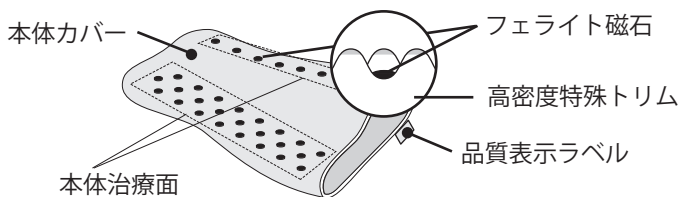

3. 動作原理

○枕として使用する際、磁石と人体が密着する構造です。人体の圧力によって高密度特殊トリムの凸部が圧縮され、高密度特殊トリムの凹部に装着された磁石が人体に密着します。このような原理によって人体に磁力線を浸透させて治療します。

4. 性能

○最大磁束密度(強/弱): 140/110mT

【使用目的又は効果】


○装着部位のこり及び血行の改善。
一般家庭での磁気治療に使用する。

【使用方法等】

ご使用に当たっては、取扱説明書をよくお読みになって、ご使用ください。また、機器に異常がないか確認してからご使用ください。

1. 使用方法

- 枕としてご使用ください。
- 本品は高さ調整することができます。本体カバーのファスナーを開き、高さ調整シート(2枚)を出し入れしてお好みの高さに調整してください。
- ※調整シート: 10mm(1枚)

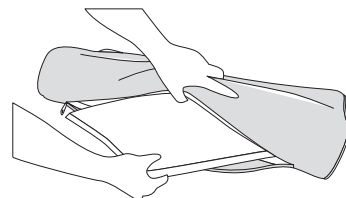

- 本品が汚れないように、市販のまくらカバー等をご使用いただくことをお勧めします。
- 肩・首筋に本体治療面があたるようにしてご使用ください。

【使用上の注意】

1. 医師の治療を受けている人や下記の人は必ず医師と相談のうえご使用ください。

- 悪性腫瘍のある人 ○心臓に障害のある人
- 妊娠初期の不安定期または出産直後の人
- 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
- 皮膚に異常(感染症、創傷など)のある人
- 安静を必要とする人
- 体温38℃以上(有熱期)の人
 - ・急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期。
 - ・衰弱しているとき
- 捻挫、肉離れなど、急性(疼痛性)疾患の人

2. 他の治療器との併用は避けてください。

3. 使用しても効果が現れない場合、医師または専門家に相談してください。

4. 付属品は指定されたものを使用してください。

5. 頭部には使用しないでください。

保証書

品名	ネタロー デラックス	製造番号	
----	---------------	------	--

本書は、保証規定(裏面記載)のもとで無償修理を行うことをお約束するものです。下記期間内に損傷が発生した場合は、商品と本書をご準備のうえ、当社までご連絡ください。

販売者名・住所・電話番号

ご住所 -

都・道
府・県

市
郡

ご氏名

お電話番号

保証期間

お買い上げの日から1年間

お買い上げ年月日

年 月 日

6. ご使用前には次のことにご注意ください。

- 時計、磁気カードなどの磁気の影響を受けるものは近づけないでください。
- 本品に破れなどがないかを点検し、磁石の装着部などに破損がある場合は使用しないでください。
- しばらく使用しなかったときには、表面に金属などの異物が吸引付着していないことを確認してください。

7. ご使用中には次のことにご注意ください。

- 身体に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。
- 本品に故障が発見された場合は、直ちに使用を中止してください。
- 装着部に発疹、発赤、かゆみなどの症状が現れた場合は、直ちに使用を中止し医師にご相談ください。
- 磁気共鳴画像診断装置(MRI)の検査を受ける人は、検査の前に使用を中止してください。

【保管方法及び有効期間等】

- 直射日光、高温多湿になる所は避けて、収納、保管してください。

【取扱い上の注意】


- 高温・多湿・直射日光を避けてください。
- 本品の乱暴な取扱いはしないでください。損傷の原因になります。
- 本品を廃棄する時には、お住まいの市町村の廃棄方法に従ってください。

【保守・点検に係る事項】


- 本品の分解や、改造はしないでください。
- 故障した場合は、勝手に修理などせず、販売店又は製造販売元に連絡してください。

《お手入れ方法》


- 直射日光があたる所は避けて、風通しの良い所で陰干してください。

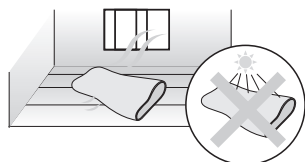

- 汚れた場合は布やタオルを薄めた中性洗剤の液に浸し、硬く絞った後で、汚れをふき取ってください。

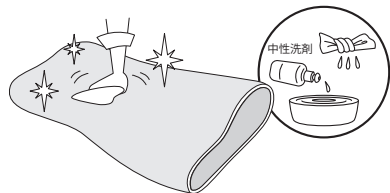

- 本体カバーを洗濯する際はファスナーを開け、本体内部を折り曲げながら取り出してください。

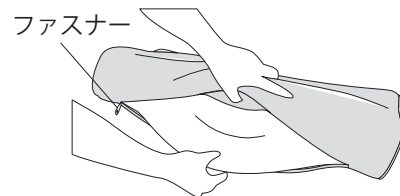

- 濃色製品は、染料の性質上、水や汗等で濡れた時、また、強くこすられた場合、摩擦により色落ちし、他の繊維を汚すことがあります。

- 他の洗濯物(特に白や淡い色)と一緒に洗わないでください。

- 洗濯後は、放置せずに、直ちに干してください。

《洗濯表示》 本体カバー(側生地)

	液温40度を限度とし、洗濯機で弱い洗濯ができます。
	酸素系漂白、塩素系漂白ともに使用できません。
	乾燥機を使った乾燥はできません。
	底面温度200度を限度としてアイロン仕上げができます。
	直射日光の当たらない日陰に、つり干してください。
	石油系溶剤を使った弱いドライクリーニングができます。
	ウェットクリーニングはできません。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者名：株式会社N I K K E N

お問い合わせ先：株式会社N I K K E N お客様相談窓口

電話：0120-777-849

受付時間：平日9:00~17:00

製造業者：やわらか製作所株式会社

ご使用になる前に必ずこの「取扱説明書(添付文書)」をお読みいただき、安全に正しくご使用ください。お読みになった後も、いつでも見られる場所に大切に保管してください。

----- 切り取り線 -----

保証規定

- 取扱説明書、品質表示ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に損傷した場合には、無償修理致します。
- 保証期間はお買い上げ日より1年間です。以後の修理に関しましては修理費等実費を申し受けます。
- 保証期間内でも、次のような場合には有償修理となります。
 - (1) 不当な改造、当社以外の修理による損傷
 - (2) 落下、移動、輸送等の不注意による損傷
 - (3) 天災、火災、公害による損傷
 - (4) 生地等の摩耗、消耗等の場合
 - (5) 本書のご提示がない場合
 - (6) 本書に販売者名、お買い上げ年月日の記入がない場合

- 但し、(6)の場合であっても、ご購入時に交付された販売者名、お買い上げ年月日が明記されている「売買契約お申込内容」、又はこれに準ずる書面を本書に添付することにより、無償修理致します。
- 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。

注) この保証規定は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従って、この保証規定によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は当社へお問い合わせください。