

機械器具(24) 知覚検査又は運動機能検査用器具
一般医療機器 体表面筋電計電極 11441001

銀球電極

禁忌・禁止

- 併用医療機器[相互作用の項参照]
 - 磁気共鳴画像診断装置(MRI装置)
 - 電気手術器

【形状・構造及び原理等】


1. 概要

本電極は、蛸電図検査などに使用される信号導出用の電極です。

2. 構成

名 称	数 量
(1) 銀球電極 YZ-0073	1

3. 外観形状および寸法

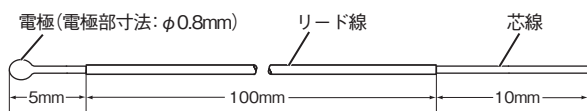

4. 原材料

電極: 銀

【使用目的又は効果】

1. 使用目的

本品は、蛸電図検査などに使用される、外耳における生体電気信号を検知する導体をいいます。本品によって感知された電気活動を記録する一般的な装置は、筋電計(EMG)です。

【使用方法等】

1. 使用方法

- 接続ケーブルへの接続
芯線の先端を接続ケーブルに接続します。
 - 電極接続箱に接続
接続ケーブルのコネクタを筋電計もしくは誘発反応測定装置*の電極接続箱に接続します。
- ※以下に記載の組合せ可能な医療機器のほか、日本光電製の筋電計もしくは誘発反応測定装置を使用することができます。
製造販売業者は日本光電株式会社です。

販売名	承認番号
1) 誘発電位・筋電図検査装置 MEB-9200シリーズ ニューロパック M1	21500BZZ00067000

(3) 電極を装着する

被検者の測定部位にペーストなどを用いて装着します。

2. 使用方法等に関連する使用上の注意

- 本電極は滅菌してありません。
- 傷および炎症のある部位には装着しないでください。

【使用上の注意】

1. 相互作用(他の医薬品・医療機器等との併用に関すること)

(1) 併用禁忌(併用しないこと)

医薬品・医療機器の名称等 (一般的名称/一般名・販売名)	臨床症状・ 措置方法	機序・危険因子
1) 磁気共鳴画像診断装置 (MRI装置)	MRI検査を行うときは、患者に装着されている電極を取り外すこと	誘導起電力により局所的な発熱で患者が熱傷を負うことがある
2) 電気手術器 (電気メス)	使用禁止	電気手術器の電流が電極に流れ、熱傷を生じる

【保管方法及び有効期間等】

1. 耐用期間

本品は消耗品です。
※開封時に傷、破損があった場合、材料に変質が見られた場合は、無償交換いたします。

【保守・点検に係る事項】

1. 清掃・消毒

使用前および使用後は、消毒用エタノールを含ませた柔らかい布で消毒してください。
消毒が必要な場合は、逆性石鹼で行ってください。

* 2. 交換

断線したときは、新しいものと交換してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 日本光電工業株式会社
電話番号: 03-5996-8000(代表)

日本光電

日本光電工業株式会社

東京都新宿区西落合1-31-4 〒161-8560
☎(03)5996-8000(代表) Fax. (03)5996-8091

<http://www.nihonkohden.co.jp/>