

機械器具（21）内臓機能検査用器具

管理医療機器 特定保守管理医療機器 二酸化炭素モジュール 36552000
 （空気・酸素マスク 35171000）

CO₂ センサキット 酸素マスクシリーズ
 （YG-272T、YG-282T）

再使用禁止（cap-ONE マスクのみ）

【警告】

1. 使用方法

- 患者に cap-ONE マスクを装着する前に、酸素供給回路に緩みや外れ、閉塞等がないか確認してください。[酸素供給量が不足することがあります。]
- 使用中は常に患者の状態を確認し、コネクタの緩みや外れ、閉塞等に十分注意してください。[酸素供給量が不足することがあります。]
- 本品を使用しても、動脈血酸素分圧が上がらない場合は、本品の使用をただちに中止し、他の酸素供給方法を選択してください。[適切な酸素供給が行えません。]

【禁忌・禁止】

1. 併用医療機器 [相互作用の項参照]

- 高圧酸素患者治療装置内での使用 [爆発または火災を起こすことがあります。]
- 可燃性麻酔ガスおよび高濃度酸素雰囲気内での使用 [爆発または火災を起こすことがあります。]
- 磁気共鳴画像診断装置（MRI 装置）[誘導起電力により局所的な発熱で患者が熱傷を負うことがあります。]（cap-ONE マスク以外）

2. 使用方法

- cap-ONE マスクの再使用
- 火気のある場所、静電気の発生する場所など発火の恐れがある場所で使用しないこと。[本品に引火して、使用者または患者が熱傷を負うことがあります。]

【形状・構造及び原理等】

1. 概要

本品は CO₂ センサキットと cap-ONE マスクを組み合わせる使用のもの。

CO₂ センサキットは患者の呼気 CO₂ 分圧をモニタする際に使用します。本キットは患者の呼気 CO₂ 分圧を測定する CO₂ センサ、および終末呼気 CO₂ 分圧や呼吸数などをデジタルデータに演算処理する CO₂ アダプタから構成されています。測定されたデジタルデータは、患者モニタなどに送信することができます。また cap-ONE マスクは CO₂ センサキットを取り付けることができる患者に酸素投与をするためのマスクです。

2. 構成

名 称	個数
cap-ONE マスク	
(1) 1) 成人用 cap-ONE マスク YG-272T	選択
2) 成人用 cap-ONE マスク（大） YG-282T	選択
CO ₂ アダプタ JG-970P	
(2) (CO ₂ センサキット TG-900 シリーズ （認証番号：21400BZZ00536000） 構成部品）	1


名 称	個数
CO ₂ センサ TG-221T (3) (CO ₂ センサキット TG-900 シリーズ （認証番号：21400BZZ00536000） 構成部品）	1

※上記構成部品は、単品でも販売されることがあります。
 ※cap-ONE マスクは再使用禁止です。


3. 形状および寸法

(1) cap-ONE マスク

1) 成人用 cap-ONE マスク YG-272T

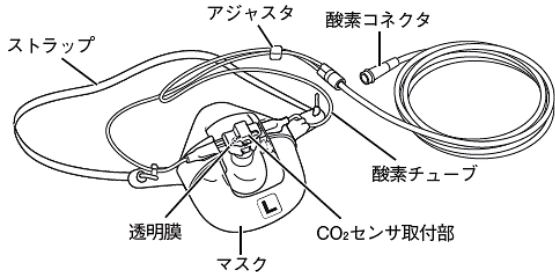


2) 成人用 cap-ONE マスク（大） YG-282T

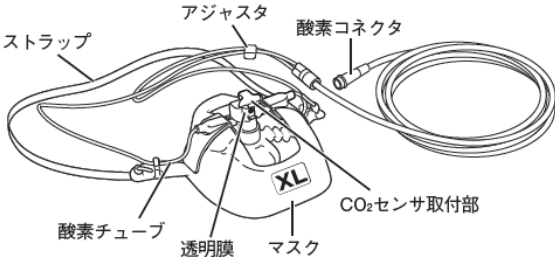

名称・型名	成人用 cap-ONE マスク YG-272T	成人用 cap-ONE マスク（大） YG-282T
寸法	W83×H95×D62mm	W95×H120×D65mm
適応患者（体重目安）	30kg～	40kg～
死腔量（標準値）	7mL	10mL
個数	10	10

(2) CO₂ センサキット TG-970P

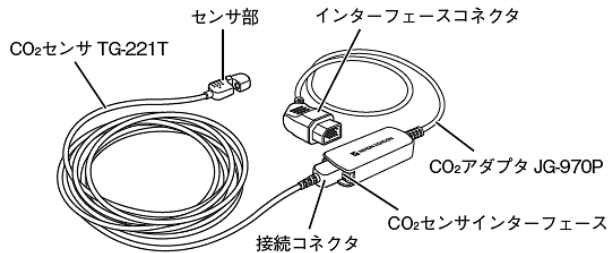

※本構成で使用する場合は、エアウェイアダプタは使用しません。

※※ 本品には以下のような図記号が使用されています。図記号が示す名称および意味は、下表のとおりです。

図記号	名称・意味	図記号	名称・意味
EMC	・IEC 60601-1-2:2001 ・IEC 60601-1-2 Amendment 1:2004 適合品		取扱説明に従うこと
			CE マーク
	再使用不可、 単回使用		CE マーク (XXXX は Notified Body の識別番号)
IPX4	防沫形機器		WEEE
IPX7	防浸形機器		欧州代理人
	シリアルナンバー		上
	ロットナンバー		壊れもの
	製造業者		水ぬれ防止
	製造日		上積み段数制限 (nは制限する段数)
	非滅菌		使用期限
	湿度制限		温度制限
	気圧制限		医療機器
※/※※	カタログナンバー、 発注コード		※/※※
*	機器固有識別	型式、モデルナンバー	*

4. 測定原理

本品は赤外吸収方式の CO₂ センサキットで、CO₂ ガスが 4.3 μm 付近の赤外線を非常に良く吸収する性質を利用しています。CO₂ センサの片側には赤外線を発生するランプがあり、cap-ONE マスクを通った光は、4.3 μm の狭バンドパスフィルタ等を通り、ランプの対面側に取り付けられた 2 つの赤外線検出器で受光されます。呼気・吸気時の CO₂ ガスによって吸収される赤外線量と CO₂ ガスの影響が軽減された赤外線量の比から呼気中の CO₂ ガス分圧を算出します (1 波長分光方式)。

5. 原材料

名 称	原材料
(1) マスク	塩化ビニル樹脂
(2) 酸素チューブ (細) (太)	塩化ビニル樹脂

【使用目的又は効果】

1. 使用目的


患者の呼気 CO₂ 分圧をモニタし、かつ患者の気道に空気・酸素を供給するために使用します。

【使用方法等】

1. 使用方法

- (1) 酸素コネクタを酸素供給装置の接続口に接続する
- (2) 本品の回路に閉塞や、緩み、外れなどがなく、確実に酸素が供給されていることを確認する
- (3) インターフェースコネクタをベッドサイドモニタへ接続する
CO₂ アダプタのインターフェースコネクタをベッドサイドモニタ、および他のモニタ装置の入力コネクタに接続します。
※ウォームアップ時間は約 10 秒です。

- (4) cap-ONE マスクに CO₂ センサを接続する
CO₂ センサを cap-ONE マスクにカチッと音がするまではめ込みます。どちらの方向でもはめ込むことができます。

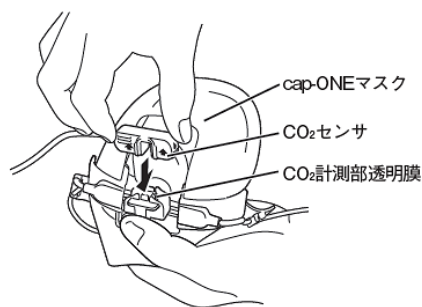


- (5) 空気校正を行う

cap-ONE マスクに CO₂ センサを装着した状態で大気に開放し、空気校正を行います。大気中の CO₂ 分圧値を約 0.5mmHg とします。※本品は呼気ガスの温度を 37°C として校正しています。このため温度によって、-0.4%/°C 程度影響を受けます。

- (6) 患者へ装着する


内側の CO₂ 導入部が鼻の下にくるように cap-ONE マスクを置きます。

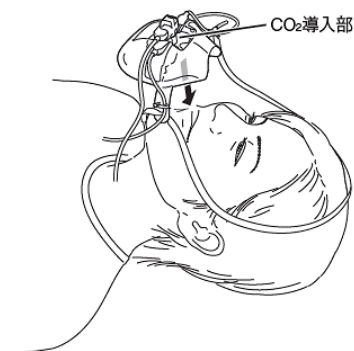


《装着方法》

装着方法は下記の 3 種類あります。

- 1) cap-ONE マスクを顔に当て、ストラップを後頭部にかけて、密着するようにストラップの長さを調整します。

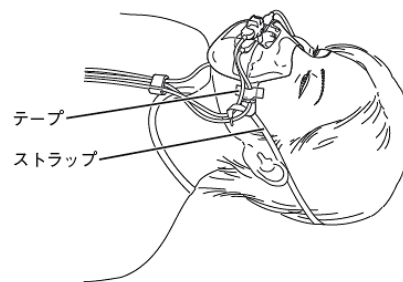

- 2) cap-ONE マスクを顔に当て、酸素チューブを耳にかけアジャスタを調整します。

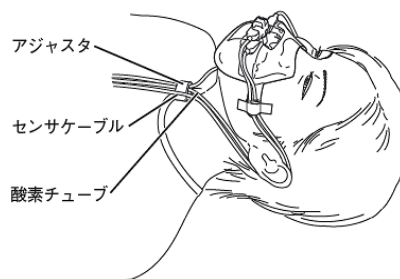

- 3) cap-ONE マスクを顔に当て、酸素チューブを後頭部にかけアジャスタを調整します。



※センサケーブルをマスク、アジャスタにはめ込むことができます。
※マスクを装着したまま口腔ケアをすることができます。

ただし CO₂ 計測部に汚れ等付着しないように注意してください。

- (7) CO₂ センサケーブル、酸素チューブなどをテープで固定する

- (8) 空気・酸素を供給する

酸素濃度の目安は下図のとおりです。

2L/min	40%
4L/min	45%
6L/min	50%
8L/min	55%

- (9) 装着状態の確認

ベッドサイドモニタおよび他のモニタ装置の画面で、CO₂ 分圧が正しく測定されていることを確認します。

※本品と組み合わせて使用可能な医療機器は以下の既承認品・既認証品があります。

製造販売業者はすべて日本光電工業株式会社です。


販売名	承認番号・認証番号
1) 呼吸炭酸ガスモニタ OLG-2800	218AHBZX00008000
ベッドサイドモニタ	
2) BSM-6000 シリーズ ライフスコープ TR	22000BZX01138000
ベッドサイドモニタ	
3) BSM-3000 シリーズ ライフスコープ VS	22300BZX00245000
ベッドサイドモニタ	
4) PVM-2700 シリーズ	22300BZX00461000
デフィブリレータ	
5) TEC-8300 シリーズ カルジオライフ	22400BZX00201000
ベッドサイドモニタ	
6) BSM-1700 シリーズ ライフスコープ PT	22500BZX00398000
ベッドサイドモニタ	
7) CSM-1000 シリーズ ライフスコープ G	22500BZX00483000
呼吸炭酸ガスモニタ OLG-3800	228ADBZX00011000
デフィブリレータ	
9) TEC-5600 シリーズ カルジオライフ	22600BZX00261000
デフィブリレータ	
10) TEC-2603 カルジオライフ S	22700BZX00308000
臨床用ポリグラフ RMC-5000	22600BZX00399000
12) CO ₂ センサキット TG-980 シリーズ	227ADBZX00171000

- (10) 取り外し方法

- cap-ONE マスクを患者から外す
テープなどをはがして、患者から cap-ONE マスクを外します。
- 酸素供給装置の接続口から外す
酸素供給装置の接続口から外すときは、チューブを持たず、酸素コネクタを持ちます。

- 3) CO₂ センサを取り外す


- ① 親指、薬指、小指でマスクの外側を包むように持ちます。
人差し指は CO₂ センサ取付部を押さえます。

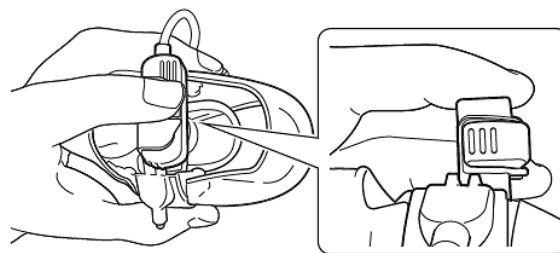

- ② もう一方の手で CO₂ センサを取り外します。
中指を CO₂ センサに添え、人差し指と親指で引き抜きます。



《悪い例》

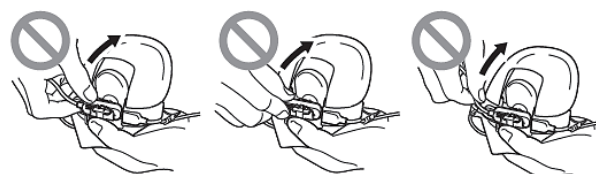

片側を持って外す①

片側を持って外す②

ケーブルを引っ張る

2. 使用方法等に関連する使用上の注意

(1) 全般的な注意事項

- 本品の測定データのみで、患者の状態を判断しないでください。本品の情報に基づく臨床判断は、医師が本品の機能を十分把握した上で、臨床症状や他の検査結果等と合わせて、総合的に行ってください。
- オートクレーブおよび EOG による滅菌はしないでください。cap-ONE マスクおよび CO₂ センサおよびアダプタを傷めるだけでなく安全性を保證できません。
- 急激な温度変化のある環境、ひどく露滴するような環境で使用すると、正しい測定が得られないことがあります。
- 組み合わせて使用している装置側で故障または交換時期を示すメッセージが表示されたときは、本品の点検および交換などを行ってください。メッセージが表示されているときは、CO₂ のモニタリングは停止します。
- ケーブルが漸線した状態で使用すると、測定が不可能になり、患者の状態を把握できなくなります。また、装置の温度が上昇して、熱傷を負う場合があります。
- センサの近くに磁石を近づけないでください。cap-ONE マスクを誤検出し、誤った波形を表示することがあります。
- ケーブル、センサおよびマスクを患者が噛んだり、飲み込んだりしないように注意してください。
- 本品を折り曲げたり、ねじったりしないでください。破損や閉塞の原因となります。閉塞や漏れが生じた場合は、新しい製品と交換してください。
- テープ装着による皮膚損傷を予防するため、適宜患者の状態を確認してください。テープでかぶれた場合は、ただちに使用を中止し、医師の指示に従ってください。
- 強い電磁波により誤動作を起こすことがありますので注意してください。本品は、周囲に強い電磁波などが存在すると、

波形に雑音が混入したり、誤動作を起こすことがあります。機器の使用で、意図せぬ誤動作が発生した場合は、電磁環境の状況を調査し、必要な対策を実施してください。次に一般的な原因と対策の一例をあげます。

① 携帯電話等の使用

電波によって思わぬ誤動作をする可能性があります。医用電気機器の設置してある部屋または建物の中では、携帯電話や小型無線機器などを遠ざけるか、またはそれらの電源を切るよう指導する。

② 電源コンセントを伝わって、他の機器から高周波雑音が入った場合

- ・雑音源を確認し、その経路を雑音除去装置などにより対策する。
- ・雑音源が停止できる機器であれば、その使用を止める。
- ・他の電源コンセントから電源を取る。

③ 静電気の影響があると思われる場合（機器およびその周辺での放電）

- ・装置を使用する前に、測定者、患者とも十分に放電を行う。
- ・部屋を加湿する。

④ 落雷などによる影響

- ・近くで雷が発生したときは、過大な電圧が機器に誘起されることがあります。このような場合は、次の方法で機器を動作させてください。
- ・AC コンセントから電源プラグを抜き、内蔵のバッテリー電源で使用する。
- ・無停電電源装置（JIS T 0601-1 を満足している機種）を使用する。

⑤ 他の機器との近接、積み重ね

本機を他の機器と近接、積み重ねることにより誤動作する可能性があります。使用する配置で正常に動作するか確認してください。

⑥ 指定外のケーブル類、機器類の使用

指定外のケーブル類、機器類を使用した場合、電磁放射特性、電磁イミュニティ特性が悪化することがあります。本機は、指定のケーブル、付属品との組み合わせで、EMC 規格の要求事項を満たしています。指定のケーブル、付属品を使用してください。

⑦ 著しい高感度の生体信号計測

本機は、生体計測に必要な適切な感度で計測できるように設計されていますが、著しい高感度で使用した場合、電磁波によるノイズにより、誤診断をまねくことがあります。機器の使用で意図せぬノイズが混入した場合、電磁環境の状況を調査して対策を実施してください。

⑧ その他

EMC 適合評価での構成と異なる機器と組み合わせて使用した場合、電磁放射特性、電磁イミュニティ特性が悪化することがあります。

11) 本品の使用時には、以下の環境条件を守ってください。

- ① 温度範囲 0～40℃
- ② 湿度範囲 15～95%（ただし結露なきこと）
- ③ 気圧範囲 700～1060hPa

- 12) CO₂ センサの測定値に著しい誤差があると思われるときは、感度校正用ガスを使用して、精度の確認を行ってください。
- 13) CO₂ センサに無理な力が加わると CO₂ センサが破損する原因となります。
- 14) CO₂ センサを取り外すときは、ケーブルや CO₂ センサの片側を持って外さないでください。ケーブルの断線や CO₂ センサの破損の原因となります。
- 15) CO₂ センサを取り外すときは、マスクの内側に指が触れないようにしてください。

(2) cap-ONE マスクの注意事項

- 1) cap-ONE マスクには以下の死腔量があるため、考慮して使用してください。
 - ① YG-272T 7mL
 - ② YG-282T 10mL

- 2) 酸素濃度は患者の呼吸量によって変化します。希望の濃度が得られるように、酸素供給量を調節してください。体内の酸素濃度はパルスオキシメータまたは血液ガス検査装置により定期的に確認してください。

- 3) 加湿器等と接続する場合は、その互換性、安全性を十分に確認した上で使用してください。

- 4) 患者の体重や換気量、cap-ONE マスクの寸法を考慮して cap-ONE マスクを選択してください。対象外のものを使用すると、意図した酸素濃度が得られなかったり、測定値が不正確になることがあります。

- 5) cap-ONE マスクの透明膜の内面には、呼気、吸気の湿度によって曇らないように高性能の防曇膜でコーティングされています。防曇性能が劣化すると正しい測定ができませんので、下記の点を十分に守って使用してください。

- ① cap-ONE マスクは 72 時間の使用をめぐに新しいものと交換してください。

- ② 血液、痰あるいは粘液が防曇膜に付着した場合は、新しい cap-ONE マスクと交換してください。

- ③ 透明膜に傷、ゴミ、薬液を付けないでください。特に内面の防曇膜は、指で触って傷つけたり、汚れを拭いたり、クリーナーなどで洗わないでください。

- 6) cap-ONE マスクは再呼吸を軽減するために酸素供給流量を 2L/min 以上で使用してください。呼気がマスク内に貯留し、再呼吸することがあります。

- 7) cap-ONE マスクの梱包箱は、すべての cap-ONE マスク使用後に廃棄してください。cap-ONE マスクの型式や製造販売業者は、梱包箱のみに記載されています。

- 8) cap-ONE マスクは使用直前まで開封しないでください。

- 9) cap-ONE マスクを交換した場合、また使用環境温度や使用場所が変わったときは、必ず校正を行ってください。

- 10) cap-ONE マスクの位置は CO₂ 波形を確認して調整し、装着状態は定期的に確認してください。装着状態によっては CO₂ 測定が不正確になります。

- 11) 内側の CO₂ 導入部が鼻および口から 1cm 以内になるよう装着してください。離れ過ぎていると CO₂ 測定が不正確になります。

- 12) CO₂ 導入部が鼻および口元に接触し、褥瘡が形成されることがあるので、適時患者の状態を確認してください。

- 13) ストラップおよび酸素チューブは強く締めすぎないようにしてください。圧迫による皮膚損傷を予防するため、定期的に患者の状態を確認してください。

- 14) 酸素チューブを強く引っ張らないでください。マスクから抜けてしまいます。

(3) 清掃・消毒・滅菌に関する注意事項

- 1) cap-ONE マスクは、清掃、消毒および滅菌できません。汚れた場合はただちに新しいものに交換してください。

- 2) 腐食性の強い液体や研磨剤入りの液体は使用しないでください。また、スチールウールや先のものがったもので清掃しないでください。CO₂ センサを傷つけ、正しい測定ができなくなります。

- 3) シンナー、ベンジン、工業用アルコールなどは使用しないでください。CO₂ センサの表面を傷めます。

- 4) エタノールなどの可燃性清掃・消毒剤を使用する場合は、密閉された場所での使用は避け、十分に換気をしながら使用してください。

(4) 輸送および保管に関する注意事項

- 1) 輸送、保管時は梱包箱に記載された以下の環境条件を厳守してください。

- ① 温度範囲 -25～+65℃

- ② 湿度範囲 10～95%（ただし結露なきこと）

- ③ 気圧範囲 700～1060hPa

- 2) 高温時の車内（特にダッシュボードの上など）に保管しないでください。cap-ONE マスクが変形し、正しい測定ができなくなります。

(5) CO₂ センサ・CO₂ アダプタの交換に関する注意事項

- 1) 交換は、当社営業員にご相談ください。
- 2) 交換用の新しいCO₂ センサを袋から取り出したら、取扱いには十分注意してください。静電気、水分、薬液などはCO₂ センサを傷める原因となります。

【使用上の注意】

1. 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）

- (1) 出血傾向、全身状態、栄養状態の悪い患者 [cap-ONE マスクが鼻および口元に接触し、褥瘡が形成されることがあるので、適時患者の状態を確認してください。]
- (2) 麻酔中の患者 [揮発性麻酔薬を使用している場合は、測定誤差を生じます。]（相互作用の項参照）

2. 相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）

(1) 併用禁忌（併用しないこと）

医薬品・医療機器の名称等 (一般的名称/一般名・販売名)	臨床症状・ 措置方法	機序・危険因子
1) 高圧酸素患者治療装置	使用禁止	爆発または火災を 起こすことがある
2) 可燃性麻酔ガスおよび高濃 度酸素雰囲気内での使用	使用禁止	爆発または火災を 起こすことがある
3) 磁気共鳴画像診断装置 (MRI 装置) (cap-ONE マスク以外)	MRI 検査を行うと きは、センサキッ トを患者から取り 外すこと	誘導起電力により 局部的な発熱で患 者が熱傷を負うこ とがある

(2) 併用注意(併用に注意すること)

1) 除細動器

- ① 本品の電撃の保護の程度による分類は、本品を接続するモ
ニタ装置に依存します。モニタ装置の取扱説明書を参照し
てください。

2) 酸素およびN₂O 麻酔ガスを使用する場合

- ① 酸素およびN₂O 麻酔ガス使用下での精度は、モニタ装置
の取扱説明書を参照してください。

3) 麻酔器と併用し、揮発性麻酔薬を使用する場合

- ① 測定値が不正確になり、下表に示す測定誤差を生じます。

ガス名	濃度	測定誤差
ハロセン	4%	+0.04kPa (+0.3mmHg)
エンフルラン	5%	+0.12kPa (+0.9mmHg)
イソフルラン	5%	+0.22kPa (+1.7mmHg)
セボフルラン	6%	+0.28kPa (+2.1mmHg)

条件：1 気圧において、5% (5.1kPa (38mmHg)) CO₂、N₂ バランスを
混合させた乾燥ガス

【保管方法及び有効期間等】

1. 耐用期間

CO₂ センサおよびCO₂ アダプタは消耗品です。

＊ ＊ 2. 有効期間

製造月を含めて 36 カ月以内

【保守・点検に係る事項】


1. 清掃・消毒・滅菌

使用後は CO₂ センサを、必ず以下の液等を含ませた綿棒で清掃し、
自然乾燥させてください。

- ・ 消毒用エタノール（日本薬局方基準を満たすもの。濃度：15℃
でエタノール 76.9～81.4vol%）
 - ・ 水で薄めた中性洗剤
- センサ以外の部分は、消毒用エタノール（日本薬局方基準を満た
すもの。濃度：15℃でエタノール 76.9～81.4vol%）または水で薄
めた中性洗剤を使って清掃・消毒を行ってください。

2. 交換

CO₂ センサキット (TG-970P)は、CO₂ センサ (TG-221T) と CO₂
アダプタ (JG-970P) とを別々に交換することができます。
どちらか一方の故障または、交換時期を示すメッセージが接続さ
れているモニタ装置に表示された場合には、ネジをはずして一方
だけを交換します。

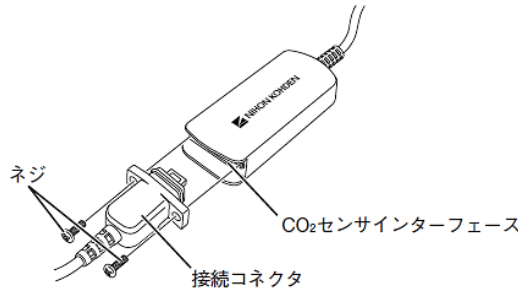

交換にあたり個別に注文する場合は、下記の注文番号にてご注文
ください。

品 名	型 名	個数	注文番号
1) CO ₂ センサキット	TG-970P	1	P909
2) CO ₂ センサ	TG-221T	1	P924
3) CO ₂ アダプタ	JG-970P	1	K987
4) 成人用 cap-ONE マスク	YG-272T	10	V938A
5) 成人用 cap-ONE マスク (大)	YG-282T	10	V938C
6) サージカルテープ	#1527	—	Y242

3. 使用者による保守点検事項

点検項目		点検時期
(1) CO ₂ センサキット、 ケーブル	各部の汚れ、破損の有無	始業時 終業時
	水滴、血液などの付着の 有無	
	接続コネクタの緩み	
(2) CO ₂ センサ	センサ窓の汚れの有無	使用前
(3) cap-ONE マスク	回路に閉塞や緩み、外れな どがなく、確実に酸素が供 給されている	

4. 業者による保守点検事項

点検項目	点検時期
(1) 測定精度の確認	半年ごと

※詳細は、組み合わせて使用しているベッドサイドモニタおよび
他のモニタ装置本体の取扱説明書をお読みください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： 日本光電工業株式会社
電話番号： 03-5996-8000(代表)

日本光電

日本光電工業株式会社

東京都新宿区西落合1-31-4 〒161-8560
☎03-5996-8000 (代表) Fax 03-5996-8091

<https://www.nihonkohden.co.jp/>