

機械器具(06)呼吸補助器

管理医療機器 再使用可能な呼吸回路用コネクタ 34838022

新生児用フローアダプタ TF-122P

再使用禁止(新生児用フローチューブのみ)

【禁忌・禁止】

1. 使用方法

(1) 再使用禁止(新生児用フローチューブのみ)

【形状・構造及び原理等】

1. 概要

本品は、呼吸回路接続部、フローチューブ接続部、ガスサンプリングポートを有しており、呼吸回路内のフローに応じた差圧を発生させる形状となっています。

本品は、呼吸回路に接続可能な新生児用フローアダプタです。


2. 構成

名 称	個 数
(1) 新生児用フローアダプタ TF-122P	1
(2) 付属品	一式

※新生児用フローチューブ(付属品)は再使用禁止です。

※構成品は、補充・修理等のために単体での販売も行います。

3. 形状

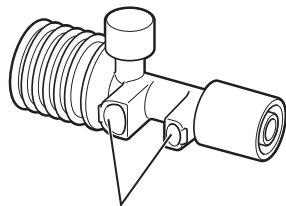

フローチューブ接続部

【使用目的又は効果】

1. 使用目的

本品は気道内圧や換気量を測定するためのものであり、フローチューブを介して本体機器へ接続されます。

【使用方法等】

1. 使用方法

(1) 準備

新生児用フローアダプタのフローチューブ接続部にフローチューブを取り付けます。

(2) 本体機器への接続

フローチューブを接続可能な本体機器へ接続します。

本品で接続可能な本体機器には以下の既認証品があります。

販売名	認証番号
① プレスキュー NRM-1300	304ADBZX00039000

(3) フローゼロ校正

本体機器でフロー計測のためのゼロ校正を行います。

(4) 陽圧換気デバイス*の接続

フローアダプタに陽圧換気デバイス*(ISO 5356-1適合品)を接続します。

*本品目外

(5) 生体情報の確認

本体機器に表示される数値を確認します。

2. 使用方法等に関連する使用上の注意

(1) 全般的な注意事項

- フローアダプタを再使用する場合は、消毒・滅菌を行ってください。交差感染を引き起こすことがあります。
- フローアダプタの呼吸回路への接続は確実に行ってください。確実に接続されていないと、接続部からの空気漏れで患者への送気量が減少します。また、アラーム機能を使用して、患者の換気量を継続的に監視してください。
- フローアダプタのUPマークが上側になるように接続してください。UPマークが下側になるように接続すると、フローチューブに水滴や分泌物が混入しやすくなり、正しく測定できません。また加湿が厳しい状況で使用した場合、正常な設置状況でもフローチューブ内に水滴が混入しやすくなります。チューブに水滴や分泌物が混入した場合、アダプタ内の水を排除し、新しいチューブに交換してください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 有効期間

新生児用フローチューブ:36ヵ月(製造月を含む)

2. 耐用期間

本品は消耗品です。

※開封時に傷、破損があった場合、材料に変質が見られた場合は、無償交換いたします。

【保守・点検に係る事項】

1. 洗浄・消毒

詳細は取扱説明書を参照してください。

2. 滅菌

新生児用フローアダプタを洗浄・消毒し、必要に応じて滅菌します。

高圧蒸気滅菌

温度	時間
121℃	15分

上記の滅菌条件において、本品の滅菌に対する耐久性は、100回までです。

詳細は取扱説明書を参照してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 日本光電工業株式会社

電話番号: 03-5996-8000(代表)

日本光電

日本光電工業株式会社

東京都新宿区西落合1-31-4 〒161-8560
☎03-5996-8000(代表) Fax 03-5996-8091

<https://www.nihonkohden.co.jp/>