

歯科用品 04 整形用品
管理医療機器 歯科根管ポスト成型品 JMDN 38609000


歯研ポスト

【禁忌・禁止】

本合金又は類似成分の合金に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

[形状]

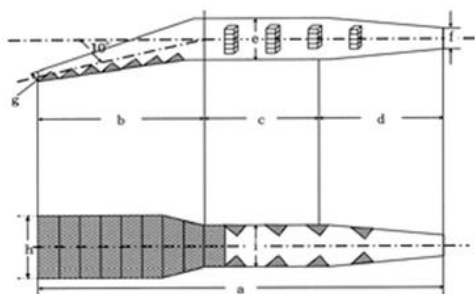

	a	b	c	d	e	f	g	h	i
大	13.5	4	5	4.5	1.6	0.5 φ	0.6	2.8	1.3
中	12.5	4	4	4.5	1.6	0.5 φ	0.6	2.8	1.3
小	10.5	3.5	3.0	4.0	1.5	0.4 φ	0.6	2.0	1.0

(単位：mm)

[構造]

成分：SUS 316L（ステンレス鋼）

[原理]

本品は継続歯の人工歯冠部を維持し、それを歯根に保持する働きをする。

*[参考情報]

引張強 (MPa)	880 以上
耐力 (MPa)	640 以上
伸び (%)	1 以上
耐食性	良

*【使用目的又は効果】

[使用目的]

歯科用合釘に用いるステンレス鋼線である。

[用途]

あらゆる継続歯やポストコアに対応でき、強靱性を有した既成合釘。

*【使用方法等】

- (1) 合釘は大中小ありますから、根管によく適合するものを選んでご使用ください。
- (2) 合釘頭部は歯冠の傾斜度に応じて屈曲調整できます。

- (3) 架工歯のレジン歯（ダミー）部の埋入棒にはコバルタム半円線又は細バー線あるいは楕円線等のいずれかをダミーの大きさに応じて選び、これを合釘頭部に、又は金冠にろう付します。

【使用上の注意】

(1) 使用注意

- ① 本合金の研磨作業などの際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- ② 本合金のろう付時にフラックスを使用する場合には、その説明書に表示してある使用上の注意事項を守ってください。
- ③ 口腔内で本合金の削合や研磨を行わないでください。
- ④ 低融フラックスには、フッ化物が含まれていますので、使用時には室内の換気に留意してください。
- ⑤ 他の合金と混溶しないこと。
- ⑥ 本合金は、記載の用途以外には使用しないこと。
- ⑦ 本合金は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

(2) 重要な基本的注意

本合金の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

*【保管方法及び有効期間等】

* [保管方法]

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

*【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 日本歯研工業株式会社

住 所 〒141-0031

東京都品川区西五反田 5-1-10

電話番号 03-3492-0927