



器具器械 (42) 医療用剥離子
一般医療機器 婦人科用剥離子 70955000
セルビクレイパー®

再使用禁止

【禁忌・禁止】

** 再使用・再滅菌禁止
〈適用対象(患者)〉

・本品に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

alfresa

製造 アルフレッサ ファーマ株式会社
販売元 大阪市中央区石町二丁目2番9号


【形状・構造及び原理等】

1. 主要部の形状と名称

本品はポリスチレン(ミディアムインパクトスチロール)を原料とした子宮頸部・膣スミア採取用器具で、滅菌済み品である。

滅菌方法:放射線滅菌

寸法:先端部 8mm、頭部 30mm、軸部 110mm、尾部 40mm

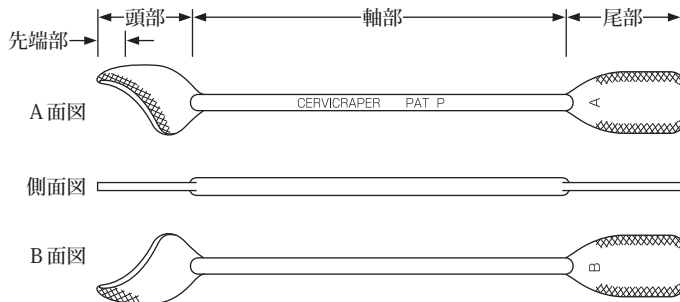

2. 原材料

ポリスチレン(ミディアムインパクトスチロール)

3. 原理等

子宮頸部を擦過し、細胞を付着させる。

【使用目的又は効果】

子宮頸部・膣スミア採取用

【使用方法等】

- 滅菌袋の切り目を破り、本品を取り出します。
- 陰鏡を用い子宮口に本品の先端部を少し入れ、軽く押し付けながら、軸部を時計方向に回転擦過して、細胞を採取します。
- 膣壁等、面積の広い部位より細胞を擦過採取する場合は、尾部を用います。
- 本品A面頭部、A B面尾部の▨▨▨▨部に細胞が付着しますので、これを直ちにスライドグラスに塗抹し、細胞診検査用固定剤で固定した後、パパニコロ染色液にて染色を行います。

【使用上の注意】

- 重要な基本的注意
1) 子宮頸部擦過細胞診の目的以外には使用しないこと。
- その他の注意
1) 使用後は医療用廃棄物として適切な処理をすること。
2) 包装が破損したり、汚染した場合は使用しないこと。
3) 再滅菌して使用しないこと。滅菌袋開封後、未使用のものは廃棄すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 保管方法
1) 高温、多湿、直射日光及び水ぬれを避けて室温で保管すること。
2) 包装材料に傷をつけたり、ピンホールを生じさせないように取り扱うこと。
3) 製品は改良されることがあるので、先入れ先出しを励行すること。
4) 製品に記載してある使用期限を確認し、使用期限を過ぎたものは廃棄すること。
5) 開封後、使用しなかったものは廃棄すること。
- 有効期間
1) 適切な貯蔵方法で保管する時、使用期限は製造日より5年。
「自己認証データによる」

®登録商標