

*2009年 10月27日改訂〔第2版〕
2006年 3月10日作成


製造販売届出番号 13B3X00158000002

器具器械6 呼吸補助器
一般医療機器 特定保守管理医療機器

活気ゲンⅡ

【警告】
油類は絶対に付着させないでください。
[高压酸素を使用しますので発火の原因になります。]

【形状、構造等】

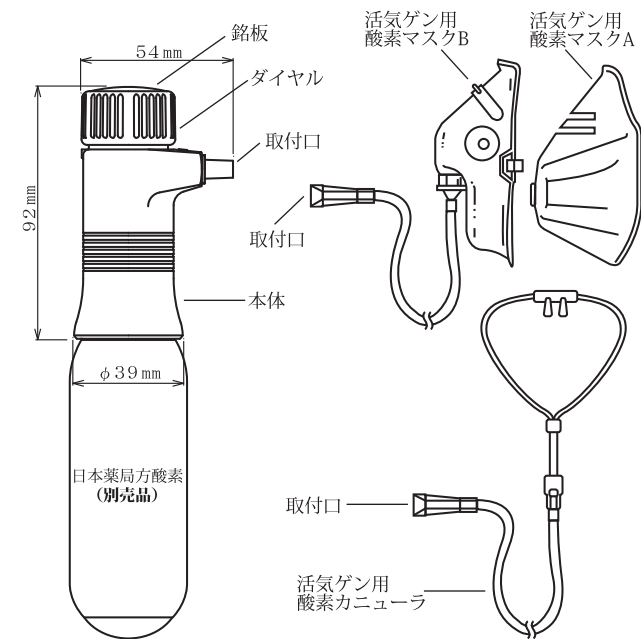

標準総質量：340 g
※別売品の日本薬局方酸素カートリッジを使用してください。

【性能、使用目的、効能又は効果】

性能
日本薬局方酸素吐出流量：2 L/min ± 2.0 %
使用目的
本品は、日本薬局方酸素カートリッジを使用して酸素吸入用に使用するものです。
効能又は効果
酸素欠乏による諸症状の改善

【操作方法又は使用方法】

使用方法
1. カートリッジの取付け方
取扱説明書の記載に従って、本体に日本薬局方酸素カートリッジを取付けてください。
2. 使い方
(1) 取扱説明書の記載に従って、本体のマスク接続口に、酸素マスク又は酸素カニューラを差し込みます。
(2) 本体のダイヤルを矢印の方向に止まるまで回し、铭板の最大流量表示を△印の位置に合わせると、1分間に2リットルの酸素が供給されます。
(3) 酸素の供給をストップさせる場合は、ダイヤルの铭板の「CLOSE」を△印に合わせます。
3. カートリッジの交換の仕方
ダイヤルを回してもガスが出なくなったら、ガストリ

ッジが空になったためですので、新品の専用酸素カートリッジを準備し、取扱説明書の記載に従って交換してください。

使用方法の詳細は、取扱説明書を参照してください。

【使用上の注意】

- 〔重要な基本的注意〕
1. ご使用の際は、医師にご相談ください。
 2. 分解や改造は絶対しないでください。
 3. 油類は絶対に付着させないでください。
 4. 交換部品は、決められた物を使用してください。
 5. 火気の近くでの使用や保管は絶対しないでください。
 6. 酸素ガスカートリッジは、酸素ガスが完全になくなるまで絶対に、本体から外さないでください。
 7. 酸素ガスカートリッジの取付に工具を用いないでください。
 8. 酸素ガスカートリッジを取付ける場合、封板やネジ部にゴミ、油類の付着や異常の無いことを確認してください。
 9. 酸素ガスカートリッジの取付け、取外し時は必ず本体のダイヤルを「CLOSE」（閉）の位置で行ってください。
 10. 酸素ガスカートリッジに表示の注意事項も併せ厳守してください。
 11. 清掃時に揮発性溶剤は使用しないでください。
 12. 本体をぬらしたり、水没させないでください。
 13. 使用済みの酸素カートリッジは、蓋(封板)に穴が開いていることを確認してから、不燃物として処理してください。

使用上の注意の詳細は、取扱説明書を参照してください。

*【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

貯蔵・保管方法
周囲温度は0～40℃の間で、子供の手の届かない所に保管してください。
耐用年数
本品の耐用年数は5年です。

*【保守点検に関わる事項】

使用者による保守点検事項
・ご使用前には清掃をしてください。
・酸素ガスカートリッジ交換前に、必ず取付部（ネジ、針、パッキン）に油類、異物の無い事を確認してください。

【包装】

1セット／箱

【製造販売業者名及び住所】

NTG 日本炭酸瓦斯株式会社
〒120-0012東京都足立区青井3-12-15
tel 03-3849-1571（代）

取扱説明書を必ずご参照ください。