

*2009年10月27日改訂〔第2版〕
2006年 3月 10日作成

製造販売届出番号 13B3X00158000003


器具器械 6 呼吸補助器
一般医療機器 特定保守管理医療機器

活気ゲンOQ

【警告】

油類は絶対に付着させないでください。
[高压酸素を使用しますので発火の原因になります。]

【形状、構造等】

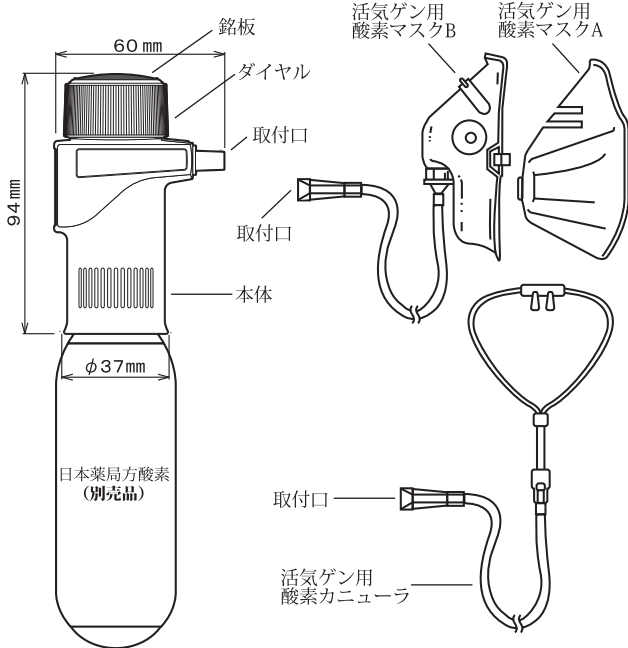

標準総質量：370 g
※別売品の日本薬局方酸素カートリッジを使用してください。

【性能、使用目的、効能又は効果】

性能
日本薬局方酸素吐出流量：2 L/min±2.0 %
使用目的
本品は、日本薬局方酸素カートリッジを使用して酸素吸入用に使用するものです。
効能又は効果
酸素欠乏による諸症状の改善

【操作方法又は使用方法】

- 使用方法
1. カートリッジの取付け方
取扱説明書の記載に従って、本体に日本薬局方酸素カートリッジを取付けてください。
 2. 使い方
(1) 取扱説明書の記載に従って、本体のマスク接続口に、酸素マスク又は酸素カニューラを差し込みます。
(2) 本体のダイヤルを矢印の方向に止まるまで回し銘板の最大流量表示を白線の位置に合わせると、1分間に2リットルの酸素が供給されます。
(3) 酸素の供給をストップさせる場合は、ダイヤルの銘板の「CLOSE」を白線に合わせます。
 3. カートリッジの交換の仕方
残量ゲージ目盛がE赤色位置となりダイヤルを回してもガスが出なくなったら、ガスカートリッジが空になったためです。

で、新品の専用酸素カートリッジを準備し、取扱説明書の記載に従って交換してください。

4. 圧力計に関して

本体に所定の酸素カートリッジを取付ける前は、ブルーのマークはE内にあり、取付後はF内にあります。
※この圧力計はあくまでも目安であるため、ガスの有無の確認をする程度と考えてください。

使用方法の詳細は、取扱説明書を参照してください。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

1. ご使用の際は、医師にご相談ください。
2. 分解や改造は絶対しないでください。
3. 油類は絶対に付着させないでください。
4. 交換部品は、決められた物を使用してください。
5. 火気の近くでの使用や保管は絶対しないでください。
6. 酸素ガスカートリッジは、酸素ガスが完全になるまで絶対に、本体から外さないでください。
7. 酸素ガスカートリッジの取付に工具を用いないでください。
8. 酸素ガスカートリッジを取付ける場合、封板やネジ部にゴミ、油類の付着や異常の無いことを確認してください。
9. 酸素ガスカートリッジの取付け、取外し時は必ず本体のダイヤルを「CLOSE」(閉)の位置で行ってください。
10. 酸素ガスカートリッジに表示の注意事項も併せて厳守してください。
11. 清掃時に揮発性溶剤は使用しないでください。
12. 本体をぬらしたり、水没させないでください。
13. 使用済みの酸素カートリッジは、蓋(封板)に穴が開いていることを確認してから、不燃物として処理してください。

使用上の注意の詳細は、取扱説明書を参照してください。

*【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

貯蔵・保管方法
周囲温度は0～40℃の間で、子供の手の届かない所に保管してください。
耐用年数
本品の耐用年数は5年です。

*【保守点検に関わる事項】

使用者による保守点検事項
・ご使用前には清掃をしてください。
・酸素ガスカートリッジ交換前に、必ず取付部（ネジ、針、パッキン）に油類、異物の無い事を確認してください。

【包装】

1セット／箱

【製造販売業者名及び住所】

NTS 日本炭酸瓦斯株式会社
〒120-0012東京都足立区青井3-12-15
tel 03-3849-1571（代）

取扱説明書を必ずご参照ください。