

*2009年10月27日改訂〔第2版〕
2006年 3月 10日作成

製造販売届出番号 13B3X00158000004


器具器械 6 呼吸補助器
一般医療機器 特定保守管理医療機器

活気ゲンOQ 1L

【警告】

油類は絶対に付着させないでください。
[高压酸素を使用しますので発火の原因になります。]

【形状、構造等】

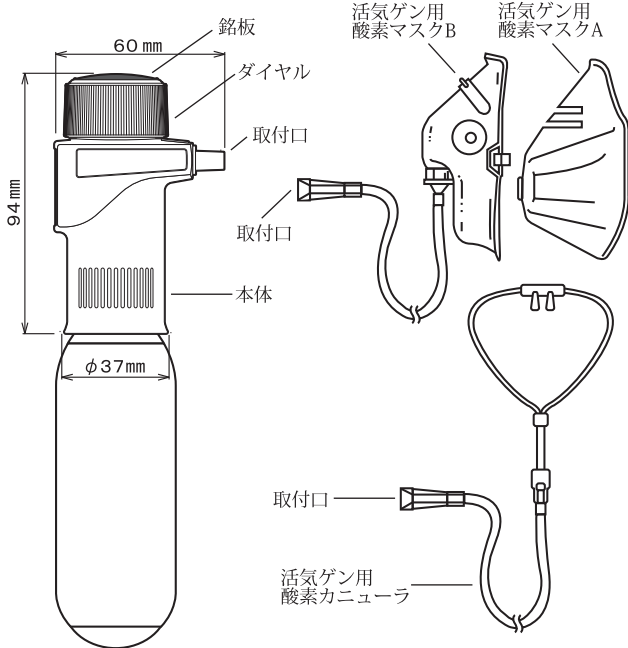

標準総質量：370 g
※別売品の日本薬局方酸素カートリッジを使用してください。

【性能、使用目的、効能又は効果】

性能

日本薬局方酸素吐出流量：1 L/min ± 3.0 %

使用目的

本品は、日本薬局方酸素カートリッジを使用して酸素吸入用に使用するものです。

効能又は効果

酸素欠乏による諸症状の改善

【操作方法又は使用方法】

使用方法

1. カートリッジの取付け方
取扱説明書の記載に従って、本体に日本薬局方酸素カートリッジを取付けてください。
2. 使い方
(1) 取扱説明書の記載に従って、本体のマスク接続口に、酸素マスク又は酸素カニューラを差し込みます。
(2) 本体のダイヤルを矢印の方向に止まるまで回し 銘板の最大流量表示を白線の位置に合わせると、1分間に1リットルの酸素が供給されます。
(3) 酸素の供給をストップさせる場合は、ダイヤルの銘板の「CLOSE」を白線に合わせます。
3. カートリッジの交換の仕方
残量ゲージ目盛がE赤色位置となりダイヤルを回してもガスが出なくなったら、ガスカートリッジが空になったためですの

で、新品の専用酸素カートリッジを準備し、取扱説明書の記載に従って交換してください。

4. 圧力計に関して

本体に所定の酸素カートリッジを取付ける前は、ブルーのマークはE内にあり、取付後はF内にあります。

※この圧力計はあくまでも目安であるため、ガスの有無の確認をする程度と考えてください。

使用方法の詳細は、取扱説明書を参照してください。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

1. ご使用の際は、医師にご相談ください。
2. 分解や改造は絶対しないでください。
3. 油類は絶対に付着させないでください。
4. 交換部品は、決められた物を使用してください。
5. 火気の近くでの使用や保管は絶対しないでください。
6. 酸素ガスカートリッジは、酸素ガスが完全になるまで絶対に、本体から外さないでください。
7. 酸素ガスカートリッジの取付に工具を用いないでください。
8. 酸素ガスカートリッジを取付ける場合、封板やネジ部にゴミ、油類の付着や異常の無いことを確認してください。
9. 酸素ガスカートリッジの取付け、取外し時は必ず本体のダイヤルを「CLOSE」(閉)の位置で行ってください。
10. 酸素ガスカートリッジに表示の注意事項も併せて厳守してください。
11. 清掃時に揮発性溶剤は使用しないでください。
12. 本体をぬらしたり、水没させないでください。
13. 使用済みの酸素カートリッジは、蓋(封板)に穴が開いていることを確認してから、不燃物として処理してください。

使用上の注意の詳細は、取扱説明書を参照してください。

*【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

貯蔵・保管方法

周囲温度は0～40℃の間で、子供の手の届かない所に保管してください。

耐用年数

本品の耐用年数は5年です。

*【保守点検に関わる事項】

使用者による保守点検事項

- ・ご使用前には清掃をしてください。
- ・酸素ガスカートリッジ交換前に、必ず取付部（ネジ、針、パッキン）に油類、異物の無い事を確認してください。

【包装】

1セット／箱

【製造販売業者名及び住所】



日本炭酸瓦斯株式会社
〒120-0012東京都足立区青井3-12-15
tel 03-3849-1571（代）

取扱説明書を必ずご参照ください。