

機械器具51 医療用嘴管及び体液誘導管
管理医療機器 間欠泌尿器用カテーテル 36125000
*(洗浄向け泌尿器用カテーテル 34930010)

JMSネラトンカテーテル

再使用禁止

*(コネクタありタイプ)


【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

*【形状・構造及び原理等】

*本品は、体内に挿入するカテーテルとドレンバッグ、シリンジ等に接続する接続部を有するコネクタからなる。カテーテル先端には側孔を有する。

*＜構成＞

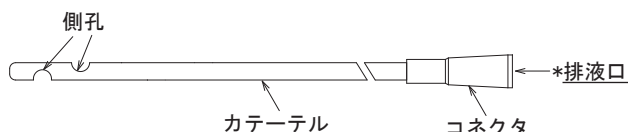

- ・本品はポリ塩化ビニル(可塑剤：フタル酸ジ(2-エチルヘキシル))を使用している。
- ・上記製品と当該製品の構成が異なる場合がある。

＜ネラトンカテーテルの仕様＞

フレンチ(F)	公称外径(mm)	有効長(mm)
8	2.7	120～500
10	3.3	
12	4.0	
14	4.7	
16	5.3	
18	6.0	
20	6.7	
22	7.3	
24	8.0	
26	8.7	

*【使用目的又は効果】

*尿道経由でぼうこう(膀胱)に挿入し、導尿、採尿、ぼうこう(膀胱)洗浄に用いる。

*【使用方法等】

*○導尿に使用する場合

1. 包装から本品を取出します。
 2. 外尿道口周辺を消毒します。
 3. 外尿道口にカテーテルを先端から挿入します。
 4. カテーテルの排水口から尿が出てくることにより、カテーテルの先端がぼうこう(膀胱)内に入ったことを確認します。
- *5. 必要に応じて、ドレンバッグ(排尿用袋)やドレンチューブのオスコネクタを本品の排水口に、緩みや外れが生じないようにしっかりと接続します。
6. 使用終了後、カテーテルをゆっくり抜去します。

*○ぼうこう(膀胱)洗浄に使用する場合

- *1. 包装から本品を取出します。
- *2. 外尿道口周辺を消毒します。
- *3. 外尿道口にカテーテルを先端から挿入します。
- *4. カテーテルの排水口から尿が出てくることにより、カテーテルの先端がぼうこう(膀胱)内に入ったことを確認します。
- *5. 洗浄液の入ったシリンジを本品の排水口に、緩みや外れが生じないようにしっかりと接続します。

*6. 洗浄液を注入し、ぼうこう(膀胱)内を洗浄します。

*7. 使用終了後、カテーテルをゆっくり抜去します。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- カテーテル挿入時に異常な抵抗を感じた場合は、無理に挿入せず、カテーテルを抜去すること。
- 尿の排出を確認できない場合は、カテーテルに折れや閉塞がないか確認すること。

*【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 包装を開封したらただちに使用すること。
- 使用中は接続部の緩み、液漏れ及び破損等注意到し、定期的を確認すること。
- 鉗子等でカテーテルをクランプする場合、カテーテルを傷つけないように注意すること。[カテーテルの破損、液漏れが生じる可能性がある。]

*●本品の8～10Fは7.4N(0.75kgf)、12～26Fは9.8N(1.0kgf)を超える引っ張り負荷を加えないこと。

- 本品はポリ塩化ビニルの可塑剤であるフタル酸ジ(2-エチルヘキシル)が溶出する可能性があるため、注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- 水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。

2. 有効期間

- 包装又は箱の使用期限欄を参照すること。[自己認証(当社データ)による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社ジェイ・エム・エス

電話番号：082-243-5806