


機械器具 74 医薬品注入器
管理医療機器 単回使用注排用先丸針 30889012

サイドホールアーチカニューラ

再使用禁止

【禁忌・禁止】 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】 〈構造図(代表図)〉

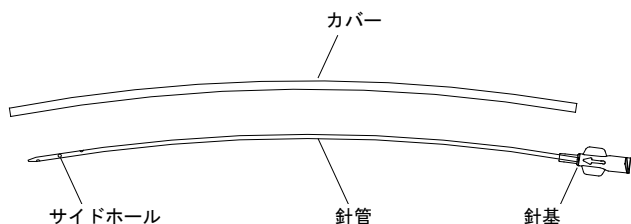

〈原材料〉

構成部品	原材料
針管	ステンレス鋼
針基	ポリプロピレン

〈仕様〉

外径	ゲージ	有効長	引抜強度
1.8 mm	15G	100~265 mm	69N
1.6 mm	16G		

〈原理〉

本品は、シリンジと接続し、目的部位にサイドホールを介して薬液等の投与又は排出を行う。

【使用目的又は効果】

本品は、医薬品等の液体を投与又は排出するために用いる。

【使用方法等】

1. 包装から本品を取り出します。
2. 本品の針基をシリンジに確実に接続します。
3. カバーを引いて取り外します。
4. あらかじめ切開した開口部から本品を目的部位まで挿入し、薬液等の注入又は排出を行います。

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

1. 開口部(小切開部)から挿入すること。[本製品の先端は刃を有さないため、開口部(小切開部)以外からの挿入は組織を損傷するおそれがある。]
2. シリンジと接続する際は、次の事項に注意すること。
 - (1) 過度な締めつけをしないこと。[針基の破損が生じ、液漏れ、空気混入が生じるおそれがある。]
 - (2) シリンジの接続部に薬液が付着した場合は、薬液をふきとり、本品と接続すること。[接続部に緩みが生じる。]
 - (3) カバーを付けたまま接続すること。
 - (4) 緩みや外れが生じないように確実に接続し、液漏れ等の異常がないことを確認すること。
3. 使用中に横方向の力を加えないこと。[針管又は針基に曲がりや破損が生じるおそれがある。]

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

1. 使用中は針基接続部の緩み、液漏れ及び破損等に注意し、定期的に確認すること。
2. 高圧注入器を用いて注入しないこと。[組織を損傷させたり、本品が破損したりするおそれがある。]

〈不具合・有害事象〉

1. その他の不具合
空気混入、漏れ、外れ、緩み、破損、変形
2. その他の有害事象
組織損傷

【保管方法及び有効期間等】

〈有効期間〉

3 年 [自己認証(当社データ)による]
包装の使用期限欄を参照すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
株式会社ジェイ・エム・エス

問い合わせ先
TEL 0120-923-107