

機械器具 74 医薬品注入器
一般医療機器 注射筒・針用アダプタ 35384000

アダプター F L L G

再使用禁止


(コンテナカバータイプ)

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

<構成>

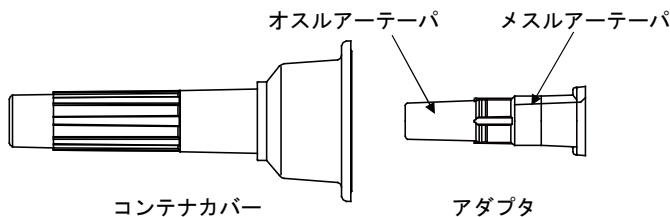

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- 水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。

2. 有効期間

- 箱の使用期限欄を参照すること。[自己認証(当社データ)による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

株式会社ジェイ・エム・エス

電話番号：082-243-5806

【使用目的又は効果】

筒先がロック形状の注射筒に接続して、ニードルレス混注口に差し込む器具である。

**【使用方法等】

**1. 併用可能な医薬品

- ** 本品は、中外製薬株式会社製『エポジン注シリンジ』又は『ミルセラ注シリンジ』（以下、専用シリンジ）に接続して使用します。

**2. 使用方法

- (1) フィルムのふたを完全に剥がします。
- ** (2) コンテナカバーを手で固定し、アダプタを専用シリンジのルアーロック部に、緩みや外れが生じないように回転させながらしっかりと接続します。
- (3) アダプタ内部に薬液を満たします。
- ** (4) コンテナカバーを外し、アダプタを血液回路等のニードルレス混注口にまっすぐ挿入し、薬液を注入します。
- ** (5) 注入終了後、ニードルレス混注口からまっすぐ引き抜きます。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- **● 専用シリンジとの接続時には、過度に締めつけたり横方向への負荷を加えたりしないこと。また、アダプタを鉗子等で挟まないこと。[アダプタの破損により液漏れ、エア混入が生じる可能性がある。]
- メスルアーターバに薬液等を付着させないこと。[接続部に緩みが生じる。]
- 接続後は、漏れ等の異常がないことを確認すること。
- **● 血液回路等のニードルレス混注口への挿入及びその後の引き抜き時には、ねじらず、まっすぐ操作を行うこと。[ねじった場合は専用シリンジとの接続部が緩み、血液漏れ等が生じる。]

**【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 専用シリンジ以外のものに使用しないこと。
- *● 本品を専用シリンジに接続する前に、血液回路等のニードルレス混注口に挿入しないこと。[ニードルレス混注口が開放状態となり、血液漏れ等が生じる。]
- オスルアーターバはロック構造となっていないため、ニードルレス混注口に挿入した状態で放置しないこと。
- 包装を開封したらすぐに使用すること。