

機械器具 56 採血又は輸血用器具
一般医療機器 ルアーアダプタ 35075000

カテーテルジョイント


再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

**【形状・構造及び原理等】

**【構造図（代表図）】

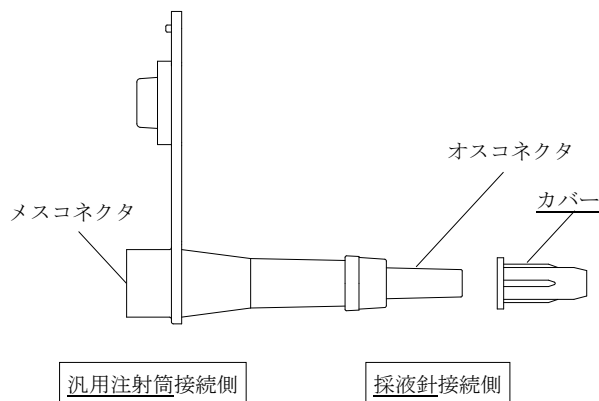

＜原材料＞

構成部品	原材料
メスコネクタ	ポリ塩化ビニル
オスコネクタ	ポリカーボネート

・本品はポリ塩化ビニル(可塑剤：フタル酸ジ(2-エチルヘキシル))を使用している。

**【原理】

本品は、アンプルやバイアル等の容器の薬剤を採取するための機器である。メスコネクタに指定の汎用注射筒を接続し、オスコネクタに指定の採液針を接続することで、採液用途として使用を可能とするものである。

**【使用目的又は効果】

2つの器具を接続し、採液用途として使用する単回使用器具。

【使用方法等】

1. 包装から本品を取り出します。
- **2. メスコネクタに指定の汎用注射筒を確実に接続します。
- **3. オスコネクタのカバーを外し、指定の採液針を確実に接続します。
- **4. 薬液等を吸引します。
- **5. 指定の汎用注射筒から本品を取り外します。

**【組み合わせて使用する医療機器】

- **1. メスコネクタは、以下の汎用注射筒に接続して使用します。

販売名	届出番号
JMS 注入器	34B1X00001000009
JMSシリンジ カテーテルフィット	34B1X00001000027

- **2. オスコネクタは、以下の採液針に接続して使用します。

販売名	届出番号
鈍針	34B1X00001000029
プラスチックカニューラ	34B1X00001000031

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- **1. 他の医療機器を接続する際は、緩みや外れが生じないように確実に行うこと。また、過度な嵌合をしないこと。[コネクタが外れないおそれがある。]
- **2. コネクタのテーパ部に薬液等が可能な限り付着しないように注意すること。[接続部に緩みが生じるおそれがある。]
- **3. 接続部に横方向の力を加えないこと。[接続部が外れるおそれがある。]

*【使用上の注意】

**【重要な基本的注意】

本品はポリ塩化ビニルの可塑剤であるフタル酸ジ(2-エチルヘキシル)が溶出するおそれがある。

**【不具合・有害事象】

その他の不具合
固着、外れ、緩み

【保管方法及び有効期間等】

＜有効期間＞

3年 [自己認証(当社データ)による]
包装の使用期限欄を参照すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
株式会社ジェイ・エム・エス

問い合わせ先

TEL 0120-923-107