

機械器具 74 医薬品注入器
一般医療機器 経腸栄養注入セット 70400000


ジェイフィード栄養剤用バッグ

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

**【形状・構造及び原理等】

〈構造図〉

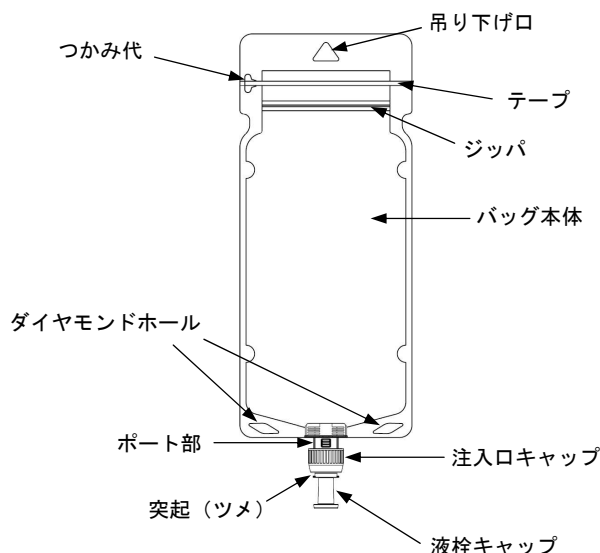

・バッグの内容量：300mL、600mL

〈原材料〉

構成部品	原材料
バッグ本体	ポリエチレン
ポート部	ポリエチレン
ジッパ	ポリエチレン系テープ
注入口キャップ	ポリプロピレン
液栓キャップ	スチレン系熱可塑性エラストマー

〈仕様〉

項目	性能
耐圧性	20kPa

**〈原理〉

注入口キャップに栄養投与セットを接続し、バッグ内に充填した栄養剤等を患者へ投与する。

【使用目的又は効果】

胃又は腸に挿入したカテーテルと連結して経腸栄養剤を投与する器具をいう。

【使用方法等】

1. 栄養剤等の注入

- (1) 専用架台を準備します。
- (2) 包装から本品を取り出します。

** (3) ダイヤモンドホールの横の朱色 (300mL) 又は紫色 (600mL) の部分を保持し、ポート部側を専用架台に取り付けます。

- (4) 専用架台のロート装着部にロートを取り付けます。

- (5) 注入口キャップを外し、専用架台の注入口キャップ置き場に置きます。このとき、液栓キャップは装着したままにしておきます。
- (6) ロート台を移動させ、バッグ注入口にロート口がセットされたことを確認後、あらかじめ調製した栄養剤等をバッグ内に充填します。
- (7) 充填後、ロート台を所定の位置に移動させます。
- (8) 注入口キャップを閉めます。
- (9) 専用架台から本品を取り外します。

2. 栄養投与セットとの接続

- (1) 本品に接続する専用コネクタ (Q ロック) のついた栄養投与セットのクランプを閉じます。
 - (2) バッグのポート部を片手で保持し、注入口キャップが閉まっていることを確認した後、液栓キャップ側を上向きに持ち上げます。
 - (3) 注入口キャップが緩まないように液栓キャップを外します。
 - (4) 清浄綿等で注入口キャップを清拭し、清潔な状態にします。
 - (5) ポート部を持ち、栄養投与セットの専用コネクタ (Q ロック) をまっすぐ注入口キャップに挿入します。このとき、専用コネクタ (Q ロック) は突きあたるまで押し込みます。
 - (6) 押し込んだ状態で専用コネクタ (Q ロック) を右に回転させ、注入口キャップの突起 (ツメ) と接続します。接続できた場合はカチッと感があります。
 - (7) 栄養投与セットの使用方法に従って使用します。
- #### 3. 水分の補充
- (1) 栄養剤等の投与後、バッグのつかみ代を真横に引っ張り、片面を開口させます。
 - (2) ジッパを開封して水分を補充した後、ジッパを閉めます。

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

1. 栄養投与セットの専用コネクタ (Q ロック) を接続する場合は、ロック部分が本品の注入口キャップの突起 (ツメ) に確実に接続 (ロック) されていることを確認すること。また、ロック部分を過度に回転させないこと。[接続が不十分な場合、外れ、液漏れが生じるおそれがある。][過度に回転させるとロック部分や突起 (ツメ) が破損するおそれがある。]
2. バッグのつかみ代を引っ張って開封する場合は、テープ (白) にそって真横にまっすぐ引っ張ること。[破損が生じるおそれがある。]

*【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

1. 栄養剤等を注入する前にジッパが閉まっていることを確認すること。
2. 冷蔵保存等、低温下では本品の耐衝撃性が低下しているため、強い衝撃を加えないこと。[破損するおそれがある。]
- ** 3. バッグを加温する場合は、湯煎 (60℃程度) にかけること。また、繰り返しの加温は行わないこと。[変形、漏れ、外れ等が生じるおそれがある。]
4. バッグ内に固形物を入れないこと。[注入口キャップが詰まり、必要な投与ができなくなるおそれがある。]
5. 粘度が高い又は不溶解物を含む栄養剤等を投与する場合、流量の管理に注意すること。[詰まり等により、流量に変化が生じるおそれがある。]

*6. 使用中は接続部の緩み、液漏れ及び破損等に注意し、定期的に確認すること。

7. バッグの目盛は目安として使用すること。

〈不具合・有害事象〉

その他の不具合

空気混入、漏れ、外れ、緩み、詰まり、破損

【保管方法及び有効期間等】

〈有効期間〉

3 年〔自己認証（当社データ）による〕

包装の使用期限欄を参照すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社ジェイ・エム・エス

問い合わせ先

TEL 082-243-5806